

Brukerhåndbok

MagniLink Mini

ProVista AS

Nils Hansens Vei 20
0667 Oslo - Norway

Tel: +47 22 69 61 00
Faks: +47 37 05 86 87

mail@provista.no
www.provista.no

LVI Low Vision International

Verkstadsgatan 5
SE-352 46 Växjö

Tel: +46 470-727700

info@lvi.se
www.lvi.se

Innholdsfortegnelse

1	Om LVI.....	5
2	Introduksjon til MagniLink Mini	6
3	Informasjon	7
3.1	Gjenbruk, installasjon og vedlikehold	7
3.2	Rengjøring	7
3.3	Sikkerhetsinformasjon	7
4	Utpakking	8
4.1	Emballasje	8
5	Kamera	9
5.1	Felle ut stativet.....	9
5.2	Bytte mellom moduser	9
5.3	Justerskrue	10
6	Programvare.....	11
6.1	Installasjon.....	11
6.2	Beskrivelse	11
6.3	Funksjoner via menyer.....	12
6.4	Funksjoner via bevegelser.....	16
6.5	Funksjoner via tastaturet	17
6.6	Notatverktøy	19
6.7	Informasjons- og innstillingsvindu	23
6.8	Kvalitet på OCR-behandling.....	27
7	Ergonomi.....	28
8	Teknisk informasjon	29
9	Samsvarserklæring.....	30

1 Om LVI

LVI Low Vision International AB ble grunnlagt i 1978 og er en av verdens ledende produsenter av utstyr for synshemmede. Nye produkter utvikles i tett samarbeid med brukere og fagfolk innen synsrehabilitering. LVI er kvalitetssertifisert i henhold til ISO 9001 og miljøsertifisert i henhold til ISO 14001.

Informasjonen i håndboken er nøye kontrollert. Det påpekes allikevel at LVI tar ingen ansvar for unøyaktigheter i håndboken. Under ingen forhold vil LVI være ansvarlig for direkte, indirekte, spesielle, tilfeldige, eller følgeskader som et resultat av feil eller utelatelser i håndboken. LVI Low Vision International har en uttrykt målsetning om kontinuerlig produktutvikling. Vi forbeholder oss derfor retten ved alle tilfeller uten advarsel å gjøre endringer og forbedringer i denne håndboken og det produkt som her beskrives.

2 Introduksjon til MagniLink Mini

Takk for at du valgte dette systemet. Vårt mål er at du skal bli fornøyd med ditt valg av leverandør og lesehjelpemiddel.

MagniLink Mini er et bærbart kamerasystem med autofokus, som kan kobles til en PC eller iPad. Systemet er utviklet for å gjøre hverdagen enklere for svaksynte.



Systemene oppfyller alle CE-sertifiseringskrav for medisinsk utstyr i samsvar med EU-forordning 2017/745.

3 Informasjon

3.1 Gjenbruk, installasjon og vedlikehold

Enheten skal kun repareres og klargjøres av et autorisert selskap. Gjenbruk kan kun utføres etter korrekt inspeksjon og rengjøring/desinfeksjon.

3.2 Rengjøring

Les dette før rengjøring og vedlikehold av utstyr:

- Koble enheten fra strømforsyningen før rengjøring.
- Bruk en lett fuktig (ikke våt) klut og rengjørings-/desinfiserende middel beregnet for skjermer og datamaskiner.
- Ikke la noen form for væske komme inn i enheten.

3.3 Sikkerhetsinformasjon

- Bruk aldri produktet hvis det har vært utsatt for vann eller andre væsker. Skadede eller våte produkter kan forårsake elektrisk støt eller brann.
- Dette produktet inneholder en neodymmagnet. Det er en potensiell risiko for brukere med pacemaker. Hvis magneten kommer for nær, kan magnetfeltet påvirke pacemakerens drift.
- Hvis produktet flyttes fra kulden og inn i et varmt rom, kan det danne seg kondens (fuktighet) inni enheten eller på kameralinsen. For å unngå problemer med kondens, bør enheten installeres i rommet minst 30 minutter før bruk.
- Hvis systemet må rengjøres, trekker du ut alle kablene og bruker en litt fuktig (ikke våt) klut. Bruk kun vann eller et rengjøringsmiddel som er ment for skjermer og datamaskiner.
- Stol ikke 100 prosent på resultatet av en OCR-konvertering; OCR-motoren kan feiltolke teksten. Det er spesielt viktig å være klar over dette når du skal behandle sensitiv informasjon, f.eks. en legemiddelresept.

Hvis du er i tvil, ta kontakt med leverandøren.

4 Utpakking

Systemet leveres i en eske som inneholder følgende:

- Kamera
- Etui
- Brukerveiledning

Kontroller først at esken ikke har ytre skader. Hvis den har skader, må du kontakte transportøren og melde fra om skaden.

Åpne esken, ta ut MagniLink TAB og fjern emballasjen.

4.1 Emballasje

Emballasjen består av følgende emballasjematerialer (LVI anbefaler at emballasjen ligger igjen i esken i tilfelle du må returnere systemet eller flytte det):

- Emballasjemateriale (XPE)
- Eske (bølgepapp)
- Polyetylen (LDPE4)

Når det gjelder sortering og innsamling av emballasjematerialer, kan du ringe til kommunen for å høre hvilke regler som gjelder der du bor.

Vær klar over at produktet og tilbehøret må resirkuleres som elektronisk avfall. Et utslitt batteri resirkuleres som elektronisk avfall.


ADVARSEL



Produktet leveres pakket i en plastpose. For å unngå fare for kveling, må du oppbevare posen utilgjengelig for barn og spedbarn.

5 Kamera

5.1 Felle ut stativet

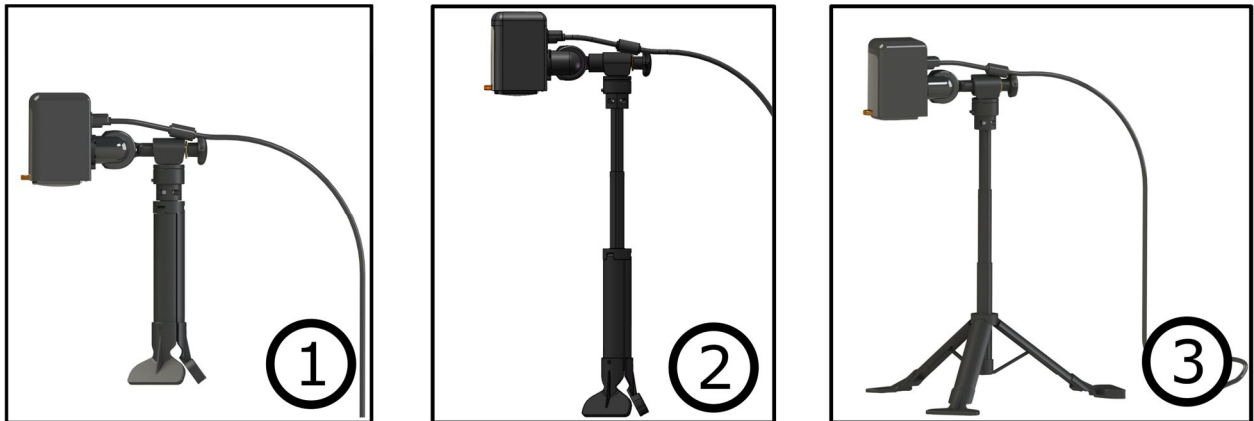

- Hold i kameraet.
- Trekk ut teleskoparmen til ønsket lengde.
- Fell ut beina til de når endeposisjonen.

5.2 Bytte mellom moduser



Koble kameraet til datamaskinen med en USB-kabel. Dreii på skruen for å bytte mellom avstandsmodus og bordlesing. Fell ned linsen hvis du vil se på en gjenstand på avstand.


5.3 Justerskrue



Hvis kameraet ikke holder seg i riktig vinkel, stram justerskruen ved det bevegelige leddet til kameraet blir stående i ønsket posisjon.

6 Programvare

6.1 Installasjon

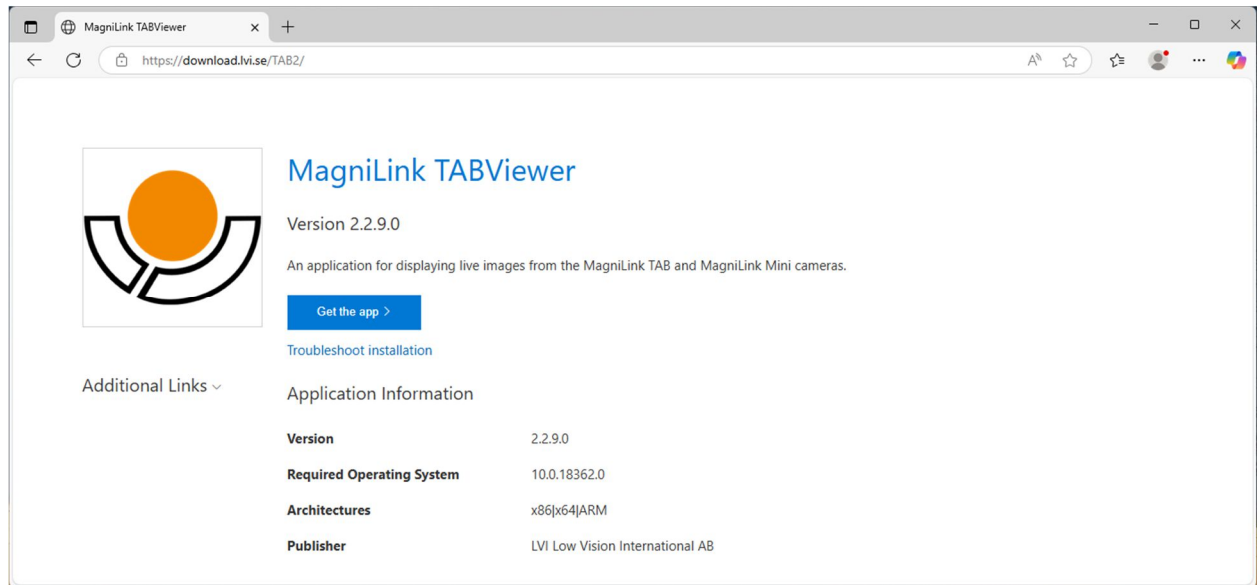

Start nettleseren din. Gå til <https://download.lvi.se/TAB2> og last ned installasjonsfilen. Dobbeltklikk på filen og følg instruksjonene.

6.2 Beskrivelse

Programvaren leveres forhåndsinstallert og starter automatisk når du slår på enheten. Programvaren omfatter tre ulike visninger: en kameravisning, en OCR-visning og en innstillingsvisning. Det er også et verktøy du kan bruke til å ta notater i et PDF-dokument eller i et bilde som er tatt.

Programvarens ulike funksjoner kan betjenes via menyer, bevegelser eller tastaturet. Programvaren er kompatibel med Microsoft Surface Pen og skjermleseren i Windows 10 og Windows 11.

Hvis du ønsker å slå av programvaren, trykker og holder du fem fingre på skjermen for å gå ut av fullskjermsmodus. Trykk deretter på krysset oppe i høyre hjørne.

6.3 Funksjoner via menyer

Følgende meny vises når applikasjonen er i kameravisning.



Veksle mellom kameravisning og OCR-visning.



Veksle mellom avstandskamera og det fremre og bakre kameraet. Et trykk med to fingre endrer retning.



Zoom inn.



Zoom ut.



Start OCR. Når du trykker på knappen med to fingre, vises resultatet av OCR-behandlingen på en ny side.



Åpne en undermeny med følgende fem knapper.



Skanning av en QR-kode. Hvis QR-koden inneholder en lenke, åpnes en dialog hvor du kan åpne lenken.



Frys kamerabildet. Trykk igjen for å oppheve frysingen.



Åpne video i Windows' standardprogram for videovisning. Ett trykk med to fingre åpner den sist innspilte videoen uten dialog.



Åpne bilde i Windows' standardprogram for bildevisning. Ett trykk med to fingre åpner det siste bildet tatt uten dialog.



Ta opp video. Dialogboksen "Lagre videoklipp" åpnes. Det foreslås automatisk et filnavn (dagens dato og klokkeslett). Trykk på "Lagre" for å lagre med det foreslåtte navnet. Hvis du vil lagre videoen i en annen mappe, eller med et annet navn, kan du endre dette i dialogboksen. Avslutt opptaket ved å trykke på knappen igjen. Et trykk med to fingre starter opptak uten dialog.



Ta et bilde. Dialogboksen "Lagre bilder" åpnes. Det foreslås automatisk et filnavn (dagens dato og klokkeslett). Bare trykk på "Lagre" for å lagre bildet. Hvis du vil lagre bildet et annet sted eller med et annet navn eller i et annet format (standard er JPG), kan du endre dette manuelt. Et trykk med to fingre tar et bilde uten dialog.



Åpne notatverktøyet. Ett trykk med to fingre åpner det sammen med kamerabildet.



Åpne en undermeny med følgende knapper.



Veksle mellom naturlige farger og gråtoneskala.



Veksle mellom kunstige farger. Du kan rulle bakover mellom de kunstige fargene ved å trykke med to fingre.



Øk lysstyrke eller kontrast.



Reduser lysstyrke eller kontrast.



Speilvend bildet.




Roter bildet medurs. Ett trykk med to fingre roterer bildet moturs.



Åpne Innstillinger-visningen.

Følgende meny vises når applikasjonen er i OCR-visning.

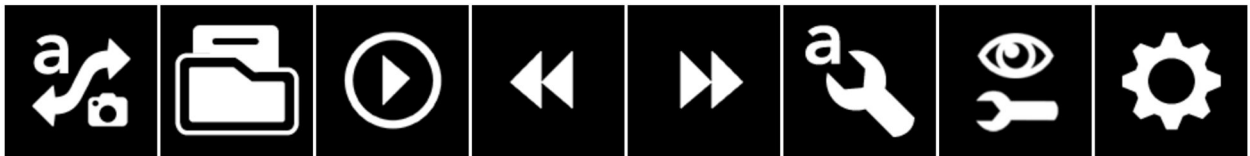

Veksle mellom kameravisning og OCR-visning.



Åpne en undermeny der du finner følgende tre alternativer.



Åpne dokument. I dialogboksen velger du filen du vil åpne. Du kan åpne PDF-filer og bildefiler, .bmp, .jpg, .png og .tiff, så vel som lagrede .zip-filer.



Lagre dokument. Det foreslås automatisk et filnavn (dagens dato og klokkeslett). Du kan lagre teksten som en RTF- (.rtf) eller ZIP-fil.



Åpne notatverktøyet. Ett trykk med to fingre åpner det sammen med det aktuelle dokumentet.



Start lesing.



Gå bakover i teksten. Avhengig av hvilken lesemodus som er valgt, vil du enten gå tilbake til forrige tegn, ord, setning eller avsnitt. Et trykk med to fingre tar deg tilbake til forrige side.



Gå forover i teksten. Avhengig av hvilken lesemodus som er valgt, vil du enten gå forover til neste tegn, ord, setning eller avsnitt. Et trykk med to fingre går til neste side.



Åpne en undermeny med følgende innstillinger.



Gå til neste lesemodus. Tilgjengelige moduser er: tegn, ord, setning og avsnitt.



Endre visningsmodus. Visningsmodusene som er tilgjengelige, er "sidevisning", "linjevisning", "ordvisning", "bildevisning", "bilde og ord" og "bilde og linje".



Øk skriftstørrelse.



Reduser skriftstørrelse.



Åpne en undermeny med følgende fire knapper.



Veksle mellom naturlige farger og gråtoneskala.



Veksle mellom kunstige farger. Du kan rulle bakover mellom de kunstige fargene ved å trykke med to fingre.



Øk lysstyrke eller kontrast.



Reduser lysstyrke eller kontrast.



Åpne Innstillinger-visningen.

6.4 Funksjoner via bevegelser

Noen funksjoner kan betjenes via bevegelser på nettbrettet. Å trykke og holde betyr at du holder fingrene på stedet i mer enn et halvt sekund. Du kan velge hvilke bevegelser du vil slå av i innstillingene.

Generelt

Trykk med to fingre

Naturlige farger

Trykk og hold med fire fingre

Åpne innstillinger

Trykk og hold med fem fingre

Slå fullskjermvisning av og på

Knip

Endre forstørrelse

Roter to fingre

Roter bildet

Dra en finger

Panorer gjennom bildet

Dra to fingre horisontalt

Endre kontrastnivå

Dra to fingre vertikalt

Endre kunstig farge

Kamera

Dra fire fingre horisontalt

Trykk og hold med to fingre

Trykk og hold med tre fingre

Trykk med tre fingre

Dra tre fingre horisontalt

Trykk og hold med en finger

Trykk med fire fingre

Dobbeltrykk

Bytt kamera

Vinkelkorrigering av/på

Speilvend bildet

Autofokus av/på

Ikke mulig med det fremre kameraet.

Endre manuell fokus

Bare mulig med avstandskameraet.

Start OCR-behandling

Frys

Skjul meny

OCR

Dra tre fingre vertikalt

Dra tre fingre horisontalt

Dra fire fingre horisontalt

Juster lydstyrken

Still inn talehastigheten

Endre visningsmodus

6.5 Funksjoner via tastaturet

De fleste funksjonene kan håndteres via tastaturet. Snarveikommandoene kan endres i innstillingene. Nedenfor ser du standardinnstillingene for snarveikommandoene.

F1

F2

Skift + F2

F3

Skift + F3

Pil opp

Pil ned

Ctrl + J

Skift + pil opp

Naturlige farger

Positive farger forover

Positive farger bakover

Negative farger forover

Negative farger bakover

Øk forstørrelsen

Reduser forstørrelsen

Autofokus av/på

Ikke mulig med det fremre kameraet.

Øk fokusavstand

Bare mulig med avstandskameraet.

Skift + pil ned	Redusere fokusavstand Bare mulig med avstandskameraet.
Pil høyre	Øk lysstyrke/kontrast
Pil venstre	Reduser lysstyrke/kontrast
Ctrl + I	Speilvend kamerabilde
Ctrl + R	Roter medurs
Ctrl + Skift + R	Roter moturs
Ctrl + K	Vinkelkorrigering av/på
Ctrl + F	Slå fullskjermvisning av og på
Ctrl + B	Vis batteristatus
F9	Innstillinger
F7	Bytt kamera
Ctrl + H	Skjul meny
Ctrl + Shift + F	Frys
F5	Lagre bilde
Skift + F5	Lagre bilde raskt
Ctrl + F5	Start videoopptak
Ctrl + Skift + F5	Start videoopptak raskt
F6	Åpne bilde
Skift + F6	Åpne bilde raskt
Ctrl + F6	Åpne video
Ctrl + Skift + F6	Åpne video raskt
F4	Start OCR Teksten fra OCR-behandlingen erstatter eksisterende tekst.
Shift + F4	Start OCR-innsetting Teksten fra OCR-behandlingen settes inn på en ny side.
V	Veksle mellom kameravisning og OCR-visning
Alt + F5	Lagre dokumenter
Alt + F6	Åpne dokument
Skift + Pluss	Øk skriftstørrelse

Skift + Minus

1

2

B

3

4

5

Page Down

Page Up

8

9

6

7

Ctrl + O

Ctrl + S

Ctrl + O

Ctrl + Z

Ctrl + Skift + Z

Reduser skriftstørrelse

Start lesing

Stopp lesing

Endre visningsmodus

Les forrige

Les neste

Bytt lesemodus

Neste page

Hvis flere sider er skannet, går du til neste side.

Forrige side

Hvis flere sider er skannet, går du til forrige side.

Reduser lydstyrken

Øk lydstyrken

Reduser talehastighet

Øk talehastighet

Neste stemme


Lagre tegning

Åpne bilde

Angre

Gjør om

6.6 Notatverktøy

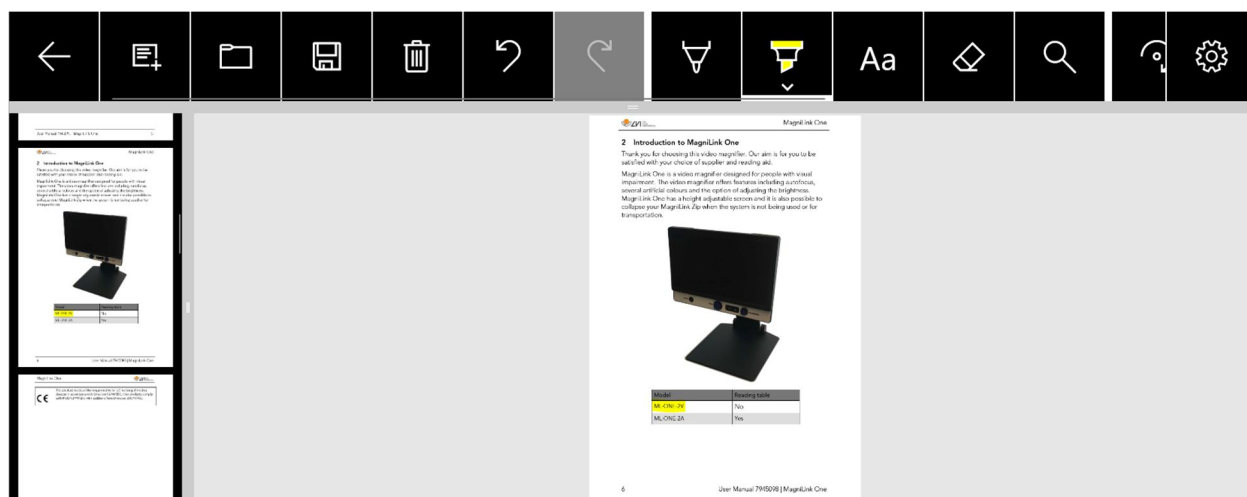

Notatverktøyet består av tre komponenter.

- Øverst er en menylinje med knapper.
- Til venstre er en liste over bilder. Du kan gå til et bilde ved å klikke på det. Du kan slette et bilde ved å klikke i øvre høyre hjørne av bildet.
- En overflate der du kan tegne, forstørre og panorere i bildet.

Knappene på menylinjen har følgende funksjoner.



Forlat notatverktøyet.



Åpner en ny tom side.



Åpne bilde. Det er mulig å åpne bildefilene .jpg og .png.



Lagre bilde. Det er mulig å lagre bilder som .pdf og .png.



Sletter den gjeldende siden.



Angre.



Gjenopprett etter å ha trykket på Angre.



Tegn med penn. Trykk og hold åpner en dialogboks der du kan velge farge og størrelse.



Tegn med merkepenn. Trykk og hold åpner en dialogboks der du kan velge farge og størrelse.



Sett inn tekst. Trykk og hold åpner en dialogboks der du kan velge farge, størrelse og skrift. Når du har satt inn tekst, kan du flytte den rundt.



Slett.



Forstørr og panorer i bildet.



Roter bildet. Eventuelle endringer du har gjort i bildet, fjernes hvis du roterer.



OCR-prosess. Etter at bildet har vært OCR-behandlet, kan du begynne å lese.



Start lesing.



Stopp lesing.



Les forrige.



Les neste.




Gå til innstillinger.

6.7 Informasjons- og innstillingsvindu

Informasjons- og innstillingsvinduet består av en rekke ulike faner som inneholder applikasjonsinformasjon og alternative innstillinger.

Du kan endre størrelsen på innstillingsmenyene ved å plassere to fingre på skjermen og føre dem fra eller mot hverandre.


6.7.1 Om programmet

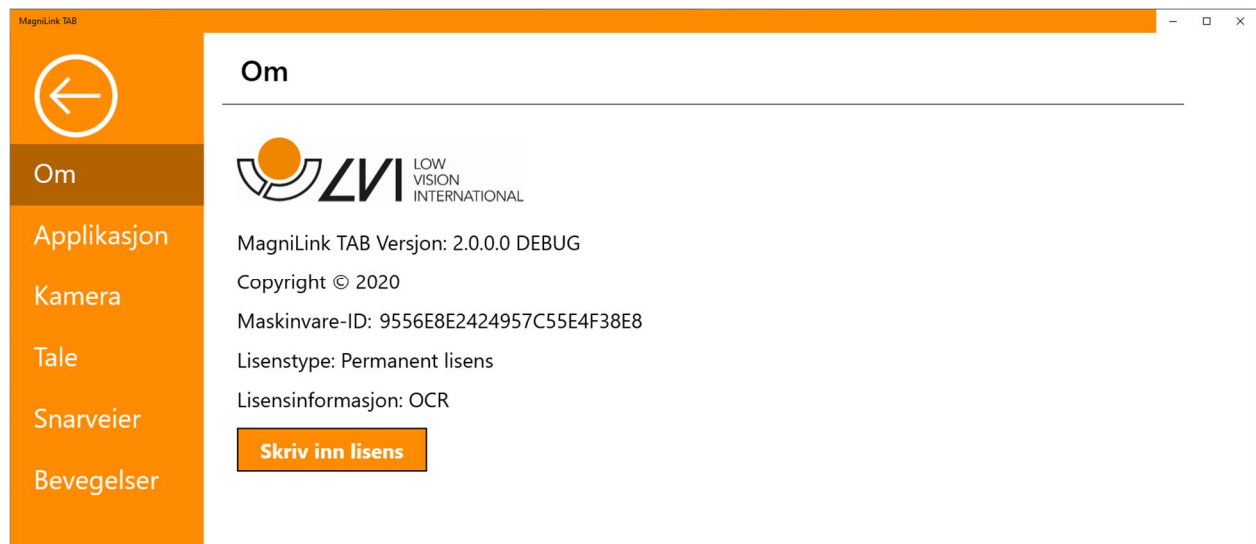

Informasjon om programvareversjon og systemlisens finner du under denne fanen.

Hvis du vil oppdatere systemlisensen, kan du gjøre dette ved å trykke på knappen "enter licence".

6.7.2 Applikasjonsinnstillinger

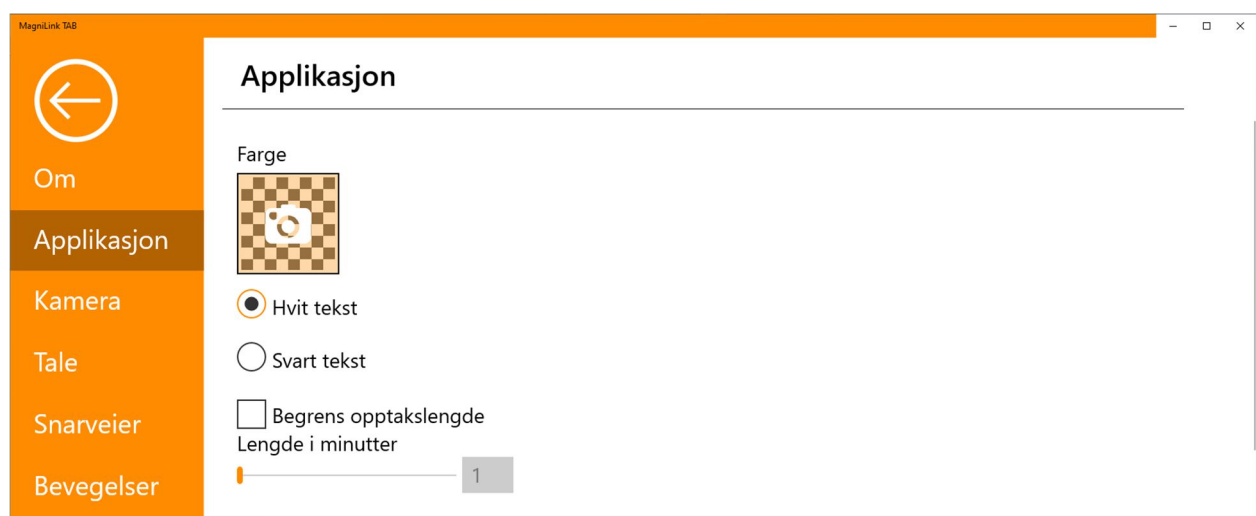

Farge

Det er mulig å trykke på kameraikonet og angi hvilken farge på

applikasjonen som ønskes. Du kan også justere gjennomsiktigheten. Denne fargen brukes både på innstillingsmenyen og menyene i kamera- og OCR-modus.

Hvit tekst

Kryss av i denne boksen for å få hvit tekst og hvite symboler i menyene.

Svart tekst

Kryss av i denne boksen for å få svart tekst og svarte symboler i menyene.


Begrens opptakslengde

Aktiver denne funksjonen hvis du ønsker å begrense opptakslengden.

Lengde i minutter

Hvis du valgte å begrense opptakslengden, kan du angi grensen i minutter her, fra 1 til 60 minutter.

6.7.3 Kamerainnstillinger

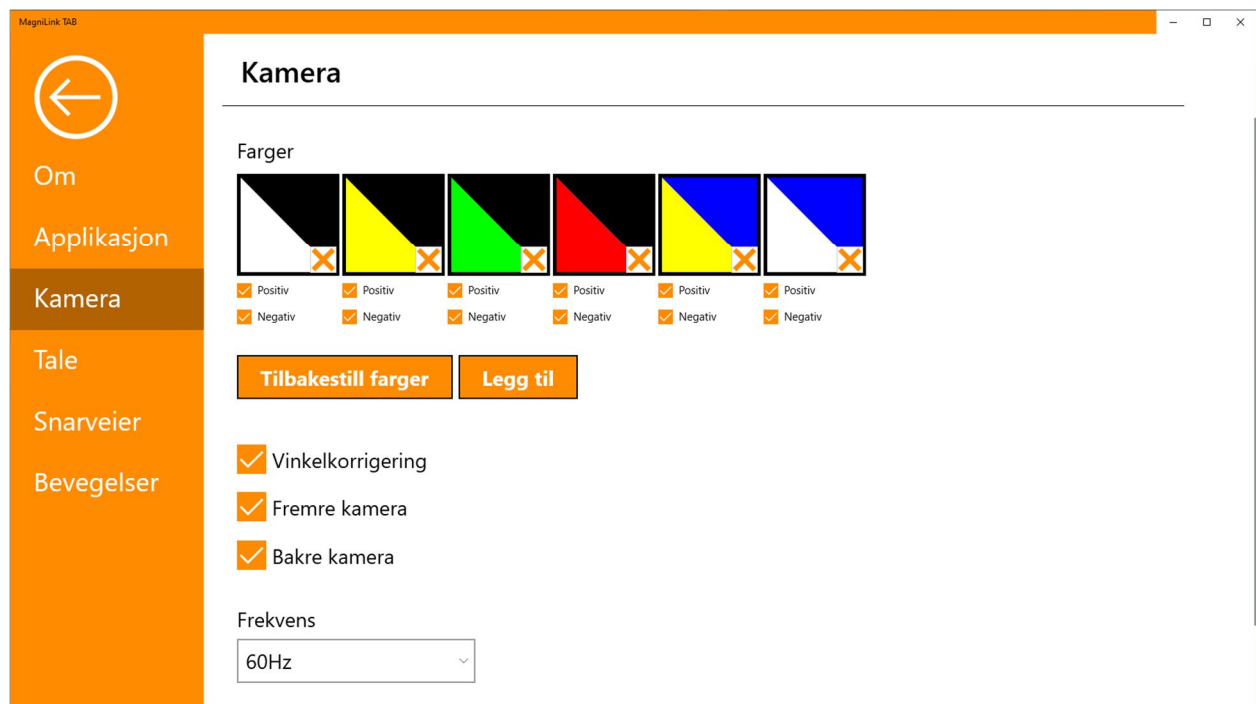

Farger

Det er mulig å fjerne kunstige farger ved å fjerne avkrysningen i boksen for den valgte fargen og endre de kunstige fargene i systemet ved å trykke på en fargetrekant og angi den ønskede fargen fra fargekartet som vises.

Vinkelkorrigering

Når denne er valgt, kompenseres det for det bakre kameraets tilt i videoen.

Fremre kamera

Når denne ikke er valgt, kan du ikke bytte til fremre kamera. Du kan ikke oppheve dette valget hvis det bakre kameraet ikke er valgt.


Bakre kamera

Når denne ikke er valgt, kan du ikke bytte til bakre kamera. Du kan ikke oppheve dette valget hvis det fremre kameraet ikke er valgt.

Frekvens

Avhengig av omgivelsesbelysningen kan det være lurt å endre frekvensen til kameraene mellom 50 Hz og 60 Hz. Når du har endret frekvensen til avstandskameraet, må du koble fra kameraet og starte applikasjonen på nytt.

6.7.4 Taleinnstillinger

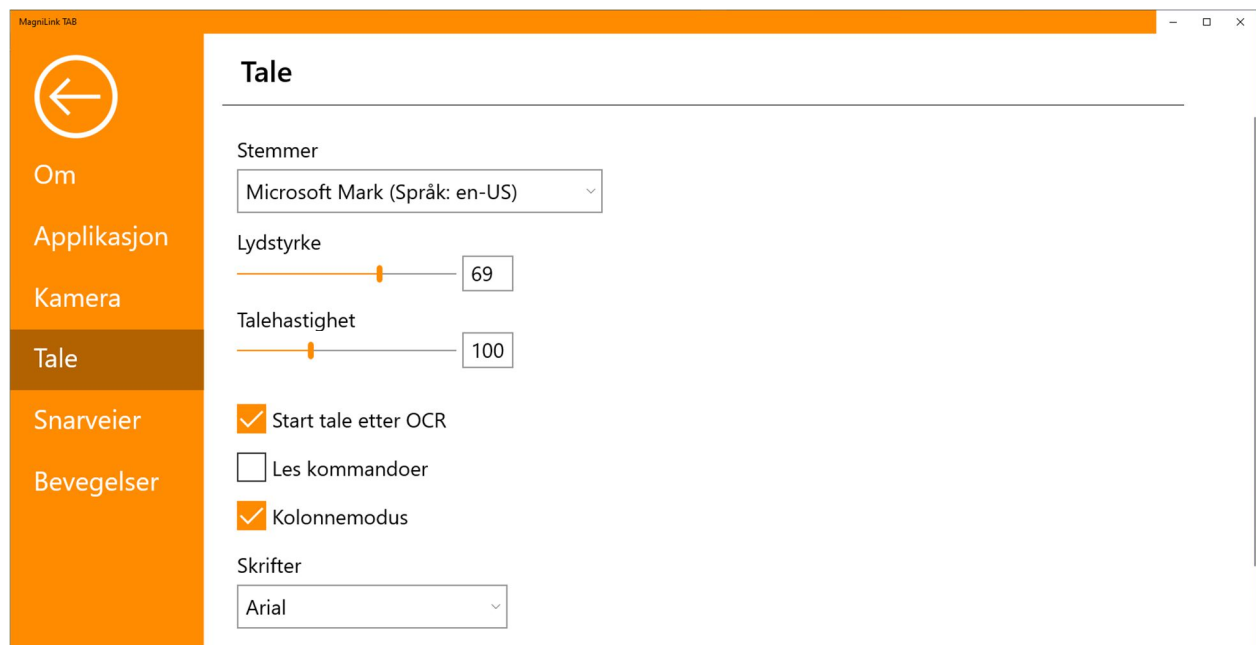

Stemmer

Hvis flere stemmer er tilgjengelige, kan du velge mellom dem. Du kan få andre stemmer ved å laste ned språk i Windows-innstillinger. For at en stemme skal være tilgjengelig, må Windows OCR støtte talespråket.

Lydstyrke

Stille inn lydnivået til stemmen.

Talehastighet

Stille inn talehastigheten.

Start tale etter OCR

Hvis det er krysset av i denne boksen, vil teksten automatisk bli lest opp høyt etter at et bilde er OCR-behandlet.

Les kommandoer

Når det er kryssset av i denne boksen, vil applikasjonen lese opp menyene når du bruker dem.


Kolonnemodus

Når denne innstillingen er aktivert, behandler OCR-motoren teksten i kolonner, noe som er nyttig hvis det for eksempel er en avistekst som skal OCR-behandles.

Skrift

Her kan du angi hvilken skrift som skal brukes til å vise den OCR-behandlede teksten. Skriften som brukes, har ingen innvirkning på resultatet av OCR-behandlingen.


6.7.5 Snarveikommandoer

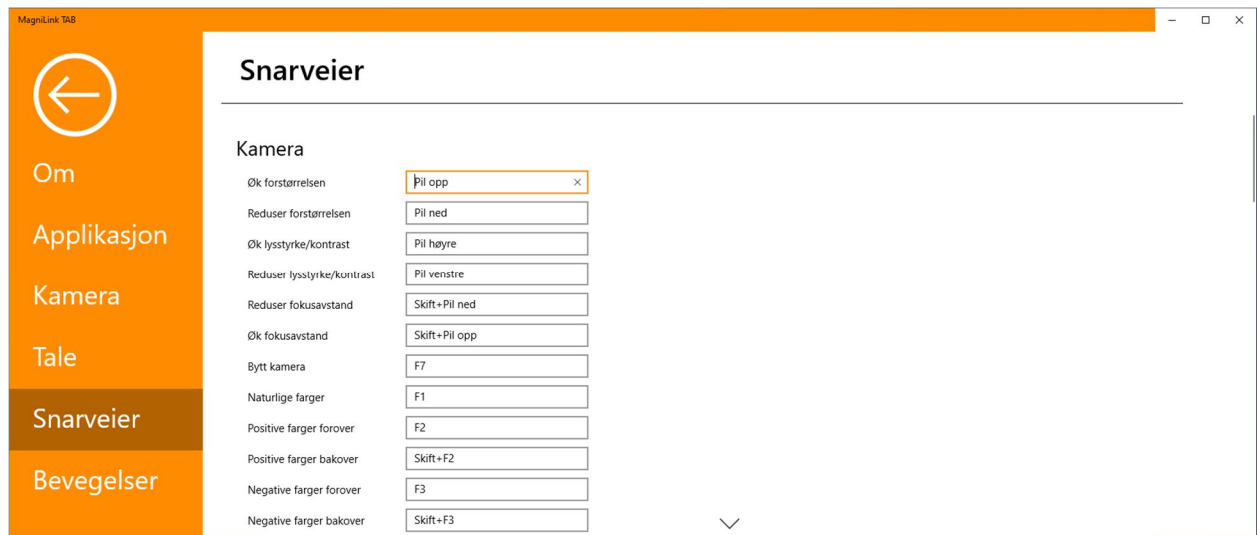

Snarveier	
Kamera	
Øk forstørrelsen	Pil opp
Reduser forstørrelsen	Pil ned
Øk lysstyrke/contrast	Pil høyre
Reduser lysstyrke/contrast	Pil venstre
Reduser fokusavstand	Skift+Pil ned
Øk fokusavstand	Skift+Pil opp
Bytt kamera	F7
Naturlige farger	F1
Positive farger forover	F2
Positive farger bakover	Skift+F2
Negative farger forover	F3
Negative farger bakover	Skift+F3

Her kan du endre snarveikommandoene som brukes for applikasjonen. Når du skal endre en snarveikommando, tabulerer du til kommandoen som skal endres og skriver inn den nye tastekombinasjonen. Hvis du taster inn en kombinasjon som allerede er i bruk for en annen kommando, vil den andre kommandoen bli slettet. Du må legge inn en ny tastekombinasjon for den andre kommandoen.

6.7.6 Bevegelser

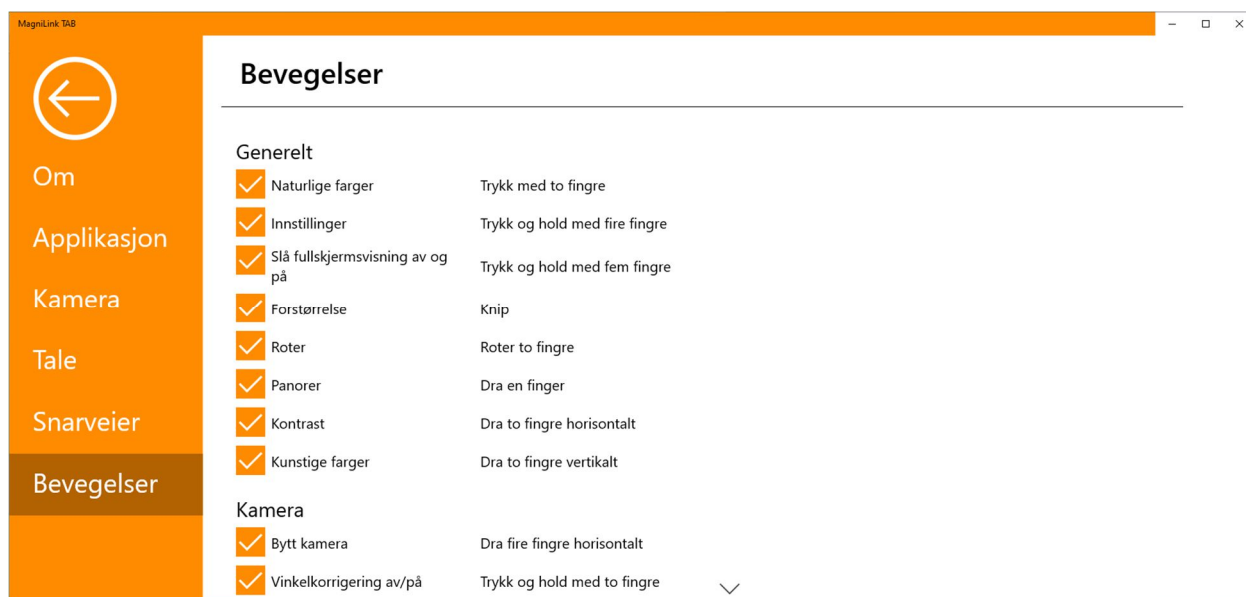

Her kan du velge hvilke bevegelser som skal brukes. Du kan slå av en bevegelse ved å fjerne avkrysningen i den aktuelle boksen.

6.8 Kvalitet på OCR-behandling

For å få best mulig resultat av OCR-konverteringen, bør du være klar over følgende.

- Forviss deg om at forstørrelsen er tilstrekkelig. Svært liten tekst gir dårlig resultat i OCR-programvaren. Vi anbefaler en skriftstørrelse på minst 12 pkt. for den minste forstørrelsen på lesekameraet.
- Unngå glanset papir da dette gir refleksjoner i bildet. Dette gir dårligere resultat av OCR-konverteringen. Hvis du skal bruke glanset papir, anbefaler vi at du slår av lyset på enheten.
- OCR-motoren kan ha problemer med å tolke enkelte skifter.
- Det er viktig at teksten har høy nok kontrast.
- Det er viktig at språket for OCR-motoren er det samme som for teksten.

7 Ergonomi

Det er viktig at arbeidsplassen rundt systemet er komfortabel og at du sitter riktig. Dette for at du skal kunne bruke det så lenge som mulig uten å utsette nakke og rygg for unødvendige belastninger.


Du bør tenke på følgende.

- Stolen bør stå inntil bordet som utstyret står på, og du bør ikke sitte i stolen for lenge om gangen. Vi anbefaler en god kontorstol med regulerbar høyde.
- Setet på stolen skal være i en høyde som ikke gjør at bena dine visner bort; bena skal ha en vinkel på 90 grader og føttene skal være på gulvet.
- Bordet skal være i en høyde der du kan hvile underarmen horisontalt på den. Det er viktig at bordet verken er for høyt eller for lavt for deg. Den ideelle løsningen er om skjermen er litt under øyenivå og i en så rett linje foran deg som mulig.
- Steng ut dagslyset. Lys fra taklamper, bordlamper og vinduer kan forårsake refleksjoner på skjermen. Derfor bør du ikke plassere lysene der de lyser direkte på skjermen eller deg selv.
- Hvis du bruker enheten i lange perioder, er det en fare for at gjentatte bevegelser gir deg smerter i nakken, skuldrene og ryggen. Du kan også bli sliten i øynene av å se på skjermen for lenge.

8 Teknisk informasjon

Kamera

Forstørrelsesområde	0,9 - 50x (Høyde 33 cm, iPad Pro 12,9")
Vekt	360 g
Oppdateringsfrekvens	60 Hz
Dimensjoner, åpnet	B x L x H: 310 x 310 x 430 mm
Dimensjoner, lagt sammen	B x L x H: 300 x 200 x 80 mm
Driftstemperatur	5 til 30°C
Oppbevarings- og transporttemperatur	-20 til 60°C

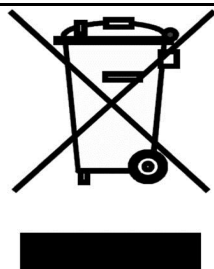

Avhending av gammelt elektrisk og elektronisk utstyr (gjelder for EU-land og alle andre europeiske land med egne innsamlingsordninger)

Hvis produktet eller emballasjen har dette symbolet på seg, skal det ikke håndteres som vanlig husholdningsavfall. Det skal i stedet leveres inn til en miljøstasjon for resirkulering av elektriske og elektroniske komponenter. Ved å sørge for at dette produktet avhendes på riktig måte hjelper du til med å redusere den negative virkningen på helse og miljø som ellers kunne ha skjedd hvis produktet ble kastet på feil måte. Resirkulering bidrar til en mer bærekraftig bruk av naturressursene. Hvis du ønsker mer informasjon om resirkulering av dette produktet, kan du kontakte kommunen, din lokale miljøstasjon eller butikken der du kjøpte produktet.

9 Samsvarserklæring

DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturers name: *LVI Low Vision International AB*

Manufacturers Address: *Verkstadsgatan 5
S-352 46 Växjö
Sweden*

Web: *http://www.lviglobal.se*

SRN (Single Registration Number): *SE-MF-000004178*

Basic UDI-DI (GMN): *7330724ML-MiniWV*

Brand name or trademark: *MagniLink*

Product code: ***ML-Mini***

Classification: *Class 1*


Type of equipment: *Reading Aid*

Conformity assessment route: *LVI Low Vision International AB uses the following
procedures for the CE-labeling of their products
according to the Regulation MDR 2017/745:
Class [1]: EC conformity declaration according to
Annex I + Annex II +Annex VII*

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of LVI Low Vision International AB. We hereby declare that the medical device(s) specified above meet the provision of the Regulation (EU) MDR 2017/745 for medical devices and Regulation (EU) 2023/1542 concerning batteries. This declaration is supported by the Quality System approval to ISO 9001 issued by Intertek. All supporting documentation is retained at the premises of the manufacturer.

☒ Manufacturer ☐ Manufacturer's authorized representative

Date
05-05-2025

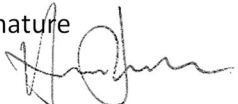Signature


Position
Managing Director

Clarification
Henrik Blomdahl

Alfabetisk stikkordregister

Applikasjonsinnstillinger	23
Beskrivelse	11
Bevegelser	27
Bytte mellom moduser.....	9
Emballasje	8
Ergonomi	28
Felle ut stativet	9
Funksjoner via bevegelser	16
Funksjoner via menyer	12
Funksjoner via tastaturet.....	17
Gjenbruk, installasjon og vedlikehold	7
Informasjon	7
Informasjons- og innstillingsvindu.....	23
Installasjon	11
Introduksjon til MagniLink Mini	6
Justerskrue	10
Kamera	9
Kamerainnstillinger.....	24
Kvalitet på OCR-behandling	27
Notatverktøy	19
Om LVI.....	5
Om programmet	23
Programvare	11
Rengjøring	7
Samsvarserklæring	30
Sikkerhetsinformasjon	7
Snarveikommandoer	26
Taleinnstillinger	25
Teknisk informasjon.....	29
Utpakking	8