

SNOW 12

Téléagrandisseur 12"



Guide de l'utilisateur

V1.0

ZOOMAX Technology Co., Limited

9F, Building D, Paradise Software Park, No.3 Xidoumen Road, Xihu District,
Hangzhou, Chine 310012

Copyright© 2019 ZOOMAX Technology Co., Limited. Tous droits réservés.
ZOOMAX® est une marque commerciale de ZOOMAX Technology Co.,
Limited aux États-Unis et dans d'autres pays. Les informations contenues
dans le présent document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
La reproduction ou la diffusion même partielle

de cette publication, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce
soit, électronique ou mécanique, à quelque fin que ce soit, est interdite
sans l'autorisation écrite expresse de ZOOMAX.

Nous vous invitons à adresser toute question par e-mail à
sales@zoomax.com. Pour consulter la base de connaissance, rendez-vous
sur www.zoomax.com et sélectionnez les liens pertinents.

TABLE DES MATIÈRES

1. Introduction.....	1
2. Sécurité et maintenance.....	2
3. Prise en main du Snow 12.....	3
3.1 Contenu du coffret.....	3
3.2 Description générale.....	3
3.3 Charger la batterie.....	5
3.4 État du témoin d'alimentation.....	5
4. Fonctionnement de base.....	6
4.1 Introduction au fonctionnement de base.....	6
4.2 Mise sous/hors tension.....	9
4.3 Mode Veille.....	9
4.4 Vision de près/de loin.....	10
4.5 Touche agrandissement.....	11
4.6 Déplacer l'image avec le stick analogique.....	11
4.7 Sélection du mode de couleur.....	12
4.8 Fonction Figer et enregistrer.....	13
5. Fonctionnement avancé.....	15
5.1 Menu principal.....	15
5.1.1 Accéder au/Quitter le menu principal	15
5.1.2 Synthèse vocale.....	16
5.1.3 Accéder à la galerie.....	16
5.1.4 Caméra à distance (SnowLink).....	16
5.1.5 Menu Réglages.....	17
5.1.6 Informations sur le système.....	23

5.2 Transfert de fichiers avec des ordinateurs.....	25
5.3 Raccordement à un téléviseur ou à un moniteur	28
6.Fonction OCR et de synthèse vocale.....	30
6.1 Accéder à/Quitter la fonction de synthèse vocale	30
6.2 Commencer.....	31
6.2.1Interface utilisateur des textes	33
6.2.2 Interface utilisateur des images	35
7. Dépannage.....	38
8. Caractéristiques techniques.....	40

1. Introduction

1.1 À propos de votre Snow 12

Nous vous remercions d'avoir acheté le nouveau Snow 12, un téléagrandisseur simple d'utilisation et aux fonctions très performantes.

Veuillez lire attentivement ce guide de l'utilisateur avant d'utiliser votre téléagrandisseur. Ce guide vous aidera à mieux comprendre les fonctionnalités du Snow 12 et vous permettra de profiter pleinement de votre téléagrandisseur Snow 12.

REMARQUE :

Il existe DEUX versions du téléagrandisseur Snow 12 : une version SANS synthèse vocale et une version AVEC synthèse vocale.

Vous trouverez l'icône



dans le coin supérieur droit de

l'emballage indiquant la version.

1.2 À propos de ce guide de l'utilisateur

Nous nous attachons à améliorer constamment nos produits Zoomax. Il est donc possible que ce guide ne soit pas la dernière version disponible. Vous pouvez cependant télécharger la version la plus récente du guide de l'utilisateur depuis l'onglet Support sur <https://www.zoomax.com>

Si vous avez des questions après avoir lu ce guide, veuillez contacter votre fournisseur pour obtenir de l'aide.

2. Sécurité et maintenance

- Pour garder votre téléagrandisseur Snow 12 en parfait état, veuillez lire attentivement les consignes de sécurité suivantes :
- Pour éviter tout risque d'incendie, n'exposez pas votre Snow 12 à une chaleur excessive ou à la lumière directe du soleil.
- Pour éviter les risques de dommages électriques, tenez votre Snow 12 éloigné des liquides et des produits chimiques.
- Pour éviter tout risque de choc électrique, n'essayez pas de démonter l'appareil. Pour toute intervention, il convient de s'adresser à un atelier de réparation agréé.
- Débranchez toujours le Snow 12 avant de le nettoyer. Utilisez le chiffon de nettoyage ou un chiffon doux et humide pour nettoyer l'extérieur. N'utilisez pas de détergents ni de produits abrasifs pour ne pas endommager votre téléagrandisseur.
- L'utilisation d'une protection d'écran risque d'altérer le fonctionnement de l'écran tactile.
- Utilisez le Snow 12 dans des environnements où la température est comprise entre 10°C et 40°C (50°F et 104°F)

3. Prise en main du Snow 12

3.1 Contenu du coffret

Le Snow 12 est livré avec les accessoires suivants

dans le coffret :

- Snow 12
- Support pliable
- Sac de transport
- Sac de rangement
- Guide de l'utilisateur
- Fiche de guide rapide
- Adaptateur d'alimentation
- Câble USB
- Câble HDMI
- Adaptateur USB 3.0 vers USB Type C
- Chiffon de nettoyage

S'il manque des articles dans votre colis, veuillez contacter votre distributeur.

3.2 Description générale

Le support pliable est un accessoire standard pour le Snow 12.



Le Snow 12 peut être utilisé seul ou sur le support pliable afin de disposer d'un plus grand espace pour écrire.



(A) Snow 12



(B) Snow 12 avec Support pliable

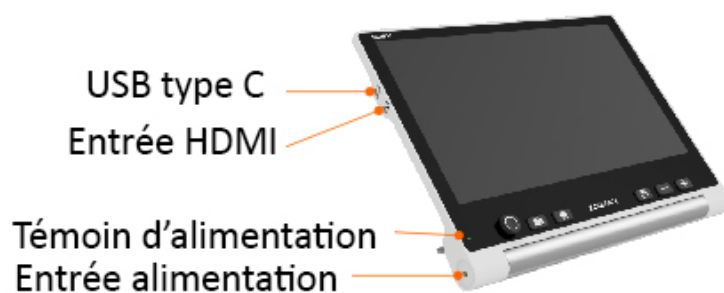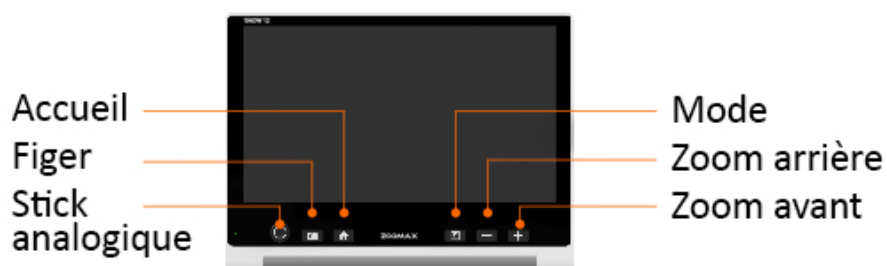

3.3 Charger la batterie

- La batterie DOIT être complètement chargée avant la toute PREMIÈRE utilisation de votre Snow 12.
- Pour charger la batterie, branchez simplement l'adaptateur d'alimentation fourni dans une prise de courant disponible et raccordez-le à votre appareil. Veuillez noter que le témoin d'alimentation est ROUGE pendant la recharge de l'appareil.
- Une fois que la batterie est complètement chargée, le témoin d'alimentation devient VERT. Lorsque la batterie est vide, il faut compter environ 2 heures pour recharger complètement la batterie.
- La durée d'autonomie du Snow 12 est de 2 heures et demi-3 heures environ en utilisation continue. Lorsque la batterie est faible, l'icône de batterie faible  s'affiche dans le coin inférieur gauche. Veuillez recharger la batterie si l'appareil s'éteint de façon inattendue.

3.4 État du témoin d'alimentation

ROUGE : Lorsqu'une source d'alimentation est connectée à l'appareil, le témoin est rouge, que l'appareil soit allumé ou non.

VERT : Lorsque la batterie n'est pas en charge, ou complètement chargée lorsque l'appareil est connecté à l'adaptateur d'alimentation, le témoin est vert.

TÉMOIN ÉTEINT : Le témoin s'éteint automatiquement lorsque l'appareil est éteint et déconnecté de toute source d'alimentation.

4. Fonctionnement de base

4.1 Introduction au fonctionnement de base


REMARQUE :

Toutes les fonctions du fonctionnement de base sont disponibles dans les deux versions de Snow 12 (avec ou sans synthèse vocale). Ces fonctions ne peuvent être effectuées que lorsque le mode de synthèse vocale est désactivé si l'appareil est équipé de la fonction de synthèse vocale.


Ouvrir/fermer le support de Snow 12

Appuyez sur le "**BOUTON POUSSOIR**" situé en bas derrière le couvercle pour libérer le support.


Repoussez le "**PIEDS SUPPORT**" vers l'arrière pour fermer le support.

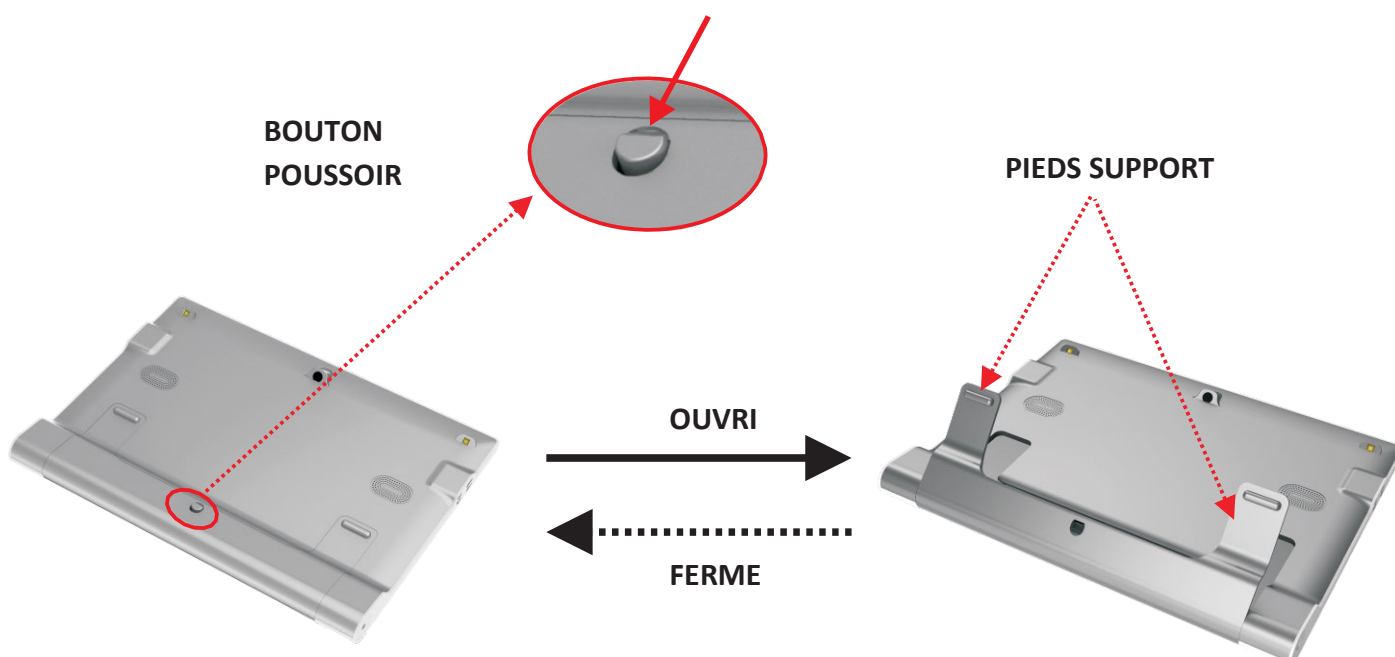


Comment ouvrir le support pliable

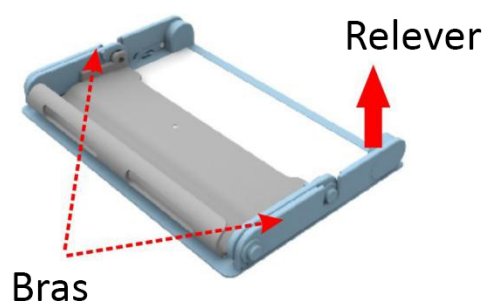

①

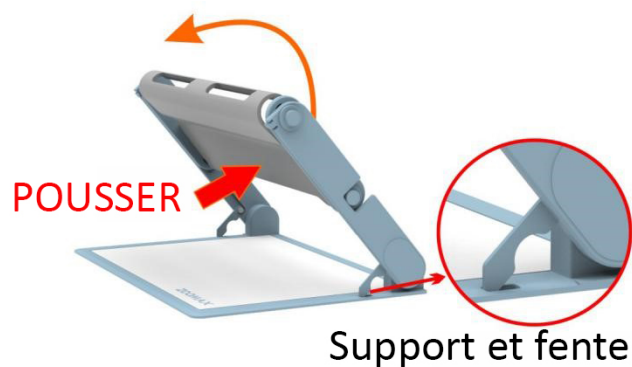

②

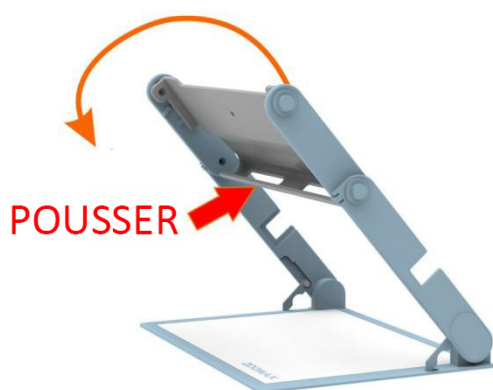

③



④

ÉTAPE 1

Soulevez le bras vers le haut pour introduire les supports dans la fente.


ÉTAPE 2

Poussez et faites pivoter le plateau vers le haut.

ÉTAPE 3

Poussez et faites pivoter à nouveau le plateau vers le haut.

Comment ouvrir le support pliable

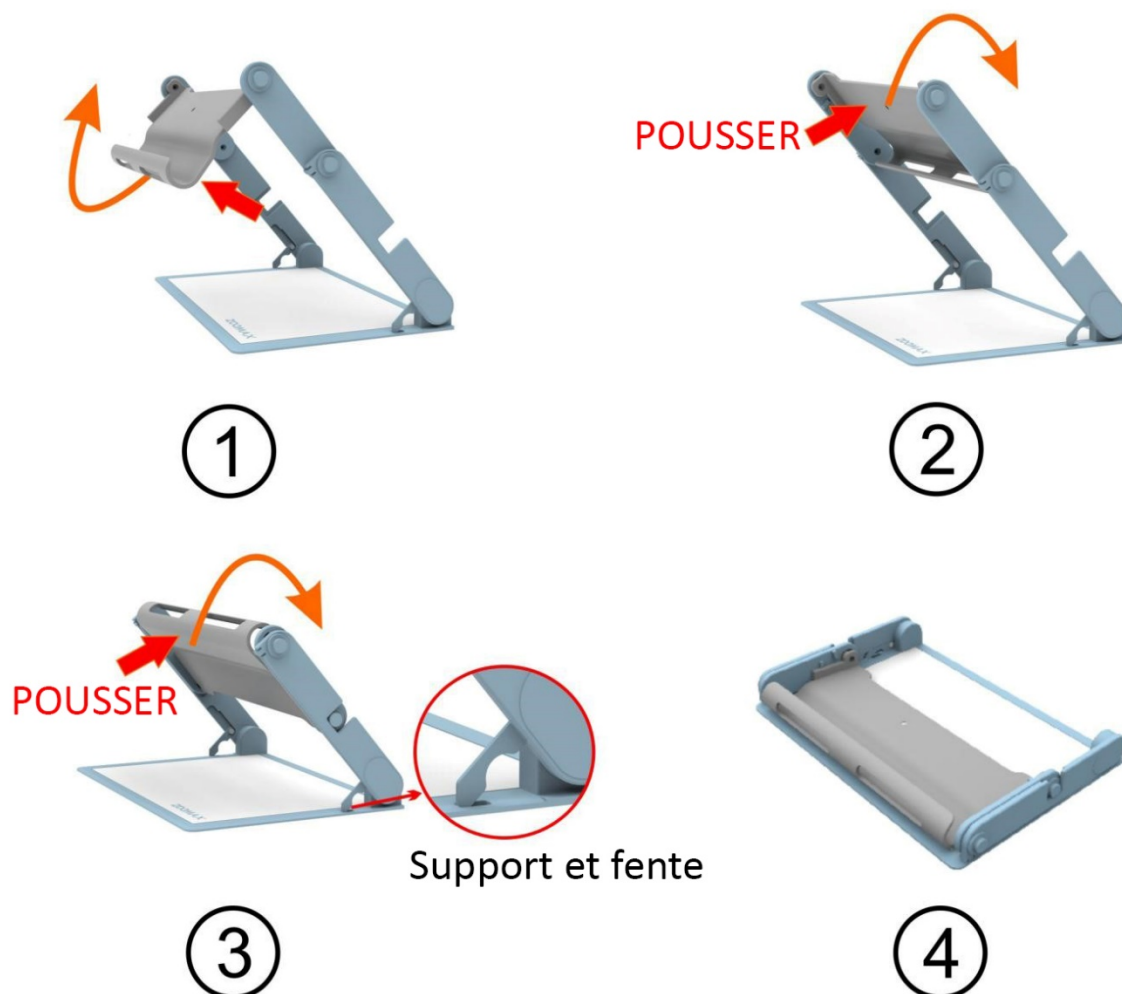

ÉTAPE 1

Enlevez d'abord le Snow du support pliable.

ÉTAPE 2

Poussez puis faites pivoter le plateau vers le haut.

ÉTAPE 3

Poussez et faites pivoter à nouveau le plateau vers le haut.

ÉTAPE 4

Soulevez les bras du support pliable puis sortez le support de la fente avec les deux mains. Ensuite, tenez les bras et reposez-les légèrement.

4.2 Mise sous/hors tension

- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton marche/arrêt pendant 3 secondes : le témoin d'alimentation devient vert.
- Puis, quelques secondes plus tard, l'image en temps réel s'affiche à l'écran.
- Veuillez noter que le Snow 12 fonctionne sous le système d'exploitation ANDROID. Le temps de mise sous tension de l'appareil est légèrement plus long. La conception spéciale du mode veille permet de réduire la fréquence de mise sous/hors tension.
- Pour éteindre votre Snow 12, appuyez et maintenez enfoncé le bouton Marche/arrêt pendant quelques secondes jusqu'à ce que le témoin d'alimentation s'éteigne.

4.3 Mode veille

- Le mode veille éteindra votre écran bien que l'appareil restera sous tension. Il est conçu pour mettre l'appareil en mode d'économie d'énergie et permettre une utilisation aisée. L'appareil entrera en mode veille lorsque :
 - A. il n'est pas utilisé pendant 3 minutes
 - B. on a brièvement appuyé sur le bouton marche/arrêt.
- En mode veille, l'appareil s'éteindra automatiquement après 30 minutes d'inactivité.
- Quitter le mode veille : appuyez à nouveau brièvement sur le bouton marche/arrêt pour sortir de ce mode.




Bouton marche/arrêt

4.4 Vision de près/de loin

Ouvrez ou fermez le support pour sélectionner soit le mode de vision de près, soit le mode de vision de loin.

Appuyez sur le bouton poussoir situé en bas derrière le couvercle pour ouvrir le support.

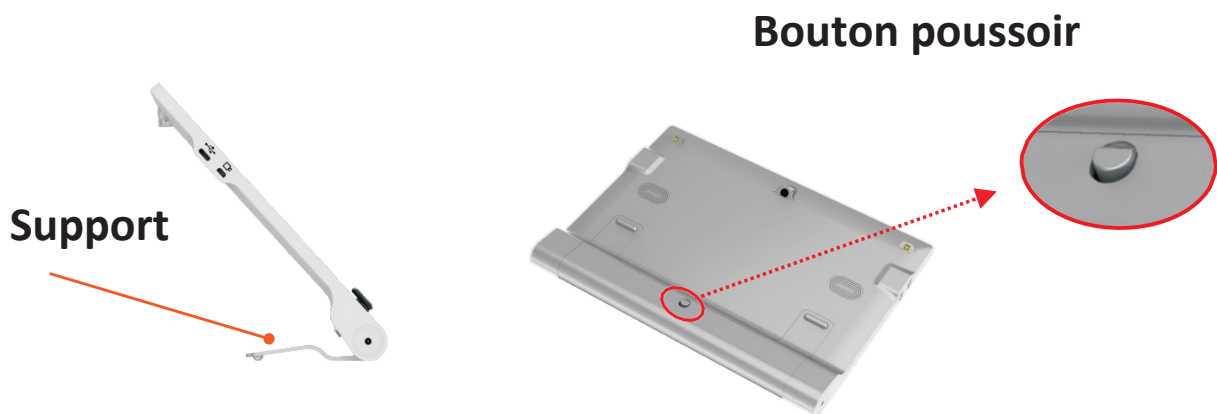

- Ouvrez le support pour passer au mode de vision de près. Le voyant LED va s'allumer.
- Fermez le support pour passer au mode de vision de loin. En mode vision de loin, vous pouvez appuyer sur l'écran pour faire la mise au point si la caméra ne parvient pas à le faire dans les premières secondes.

4.5 touche agrandissement



Zoom arrière

Zoom avant

- Appuyez sur le bouton "+" pour effectuer un zoom avant et sur le bouton "-" pour effectuer un zoom arrière.
- Lorsque le support de lecture est ouvert et que le document de lecture est posé à plat en dessous, la plage de grossissement est comprise entre 2,7X et 19X (2,5X et 19X sur support pliable).
- Branchez l'appareil à un téléviseur ou à un moniteur pour augmenter le grossissement général. Reportez-vous au chapitre 5.3.

4.6 Déplacer l'image avec le stick analogique

Poussez le curseur stick vers le haut/le bas/à gauche/à droite pour déplacer l'image en temps réel avec un grossissement élevé.

Poussez le stick analogique vers le haut/bas/gauche/droite rapidement deux fois pour déplacer la vue vers le bord de l'écran.

4.7 Sélection du mode de couleur

Mode normal

Appuyez sur le bouton Mode et vous pourrez choisir parmi 10 modes de couleurs à contraste élevé plus le mode toutes les couleurs. Le mode de couleur par défaut est le mode toutes les couleurs. Les options de couleurs du Snow 12 sont répertoriées ci-dessous :

- Toutes les couleurs
- Texte blanc sur fond noir
- Texte noir sur fond blanc
- Texte blanc sur fond bleu
- Texte bleu sur fond blanc
- Texte jaune sur fond noir
- Texte noir sur fond jaune
- Texte vert sur fond noir
- Texte noir sur fond vert
- Texte jaune sur fond bleu
- Texte bleu sur fond jaune

Passer rapidement au mode Toutes les couleurs

Appuyez sur le bouton Mode pendant 1 seconde en mode couleur à contraste élevé pour passer rapidement au mode Toutes les couleurs.

Mode de couleur de préférence

Vous pouvez choisir votre mode couleur de préférence dans le menu Réglages. Reportez-vous au chapitre 5.1.5.

4.8 Fonction Figer et enregistrer

Mise au point automatique / Mise au point tactile

- Par défaut, la caméra est mise au point automatiquement.
- Vous pouvez également appuyer sur l'écran tactile pour faire la mise au point sur l'objet que vous souhaitez visualiser. Après avoir sélectionné différents modes de visualisation (permutation par exemple entre le mode de vision de près et de loin), appuyez sur l'écran pour faire la mise au point.

Figer une image

- Placez votre Snow 12 au-dessus du document affiché.

Appuyez brièvement sur le bouton Figer pour figer une image en temps réel. Un bouton "  " sera disponible dans le coin inférieur droit.

Appuyez sur ce bouton pour développer la barre des touches représentée ci-dessous.



Réduire la barres des touches

Enregistrer

Galerie

Retour

Réduire la barre des touches

Appuyez sur l'icône "Réduire"  pour réduire la barre des touches.

Enregistrer une image figée

Appuyez sur l'icône "Enregistrer"  pour enregistrer l'image figée dans la galerie. Une coche va apparaître à l'écran pour confirmer que l'image a bien été enregistrée.

Accéder à/Quitter la galerie

Appuyez sur l'icône "galerie"  pour accéder à la galerie. Appuyez sur l'icône "retour"  ou appuyez sur bouton Geler pour revenir en arrière.

Pour en savoir plus, reportez-vous au chapitre 5.1.3.

Afficher une image figée

Il est possible d'agrandir/de réduire l'image et de changer le mode de couleur.

- Vous pouvez visualiser l'image en faisant un panoramique sur l'écran tactile ou en déplaçant le stick analogique pour afficher la partie masquée de l'image lorsqu'elle est agrandie.

- Appuyez sur le bouton Figer pour revenir au mode d'affichage en temps réel. Vous pouvez également appuyer sur l'icône Retour  pour revenir à ce mode d'affichage.


5. Fonctionnement avancé

5.1 Menu principal

5.1.1 Accéder au/Quitter le menu principal

Accéder au menu principal

En mode d’affichage en temps réel, appuyez brièvement sur le bouton “Accueil” pour activer le menu principal, présenté dans la figure ci-dessous.

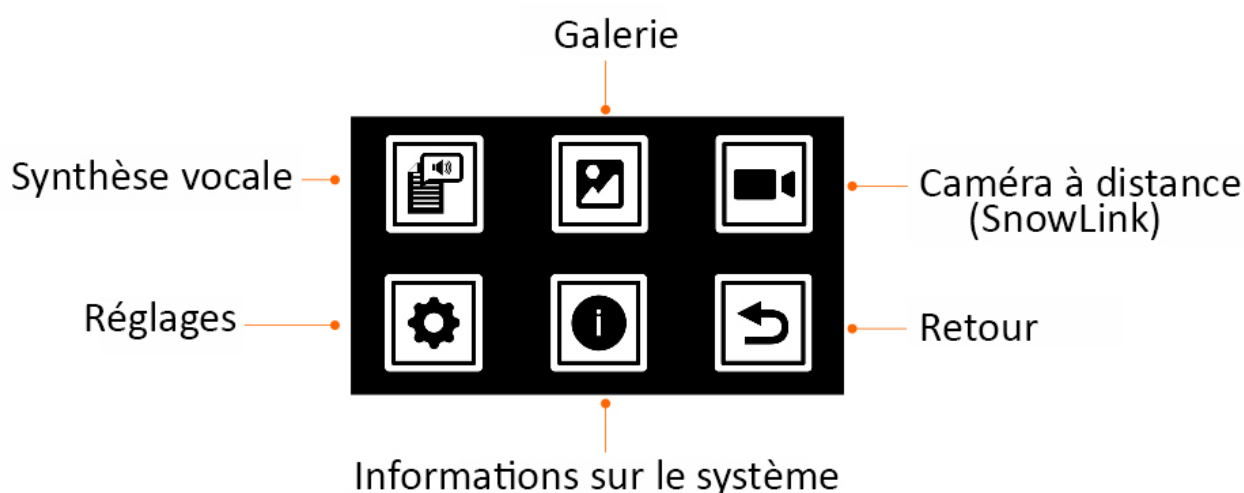

Poussez le stick analogique vers le haut/vers le bas/à gauche/à droite pour accéder aux six icônes : synthèse vocale, galerie, caméra à distance, réglages, information sur le système et retour. Pour accéder à/activer l'élément, appuyez sur le stick analogique pour le sélectionner, puis appuyez sur le bouton Mode pour accéder à/activer, ou touchez l'élément si la touche de fonction est activée.

Quitter le menu principal

Appuyez sur le bouton Accueil pour quitter le menu principal.

Ou appuyez sur l'icône Retour pour quitter le menu principal.

5.1.2 Synthèse vocale

Reportez-vous au chapitre 6.

5.1.3 Accéder à la galerie

Après avoir choisi l'icône Galerie , sélectionnez l'icône Photo et PDF pour accéder à la galerie. Veuillez noter qu'une troisième icône TXT/RTF sera présente si vous accédez à la galerie en mode de synthèse vocale.

Appuyez sur le bouton Figer pour quitter la galerie. Ou appuyez sur l'icône Retour  pour sortir.

5.1.4 Caméra à distance (SnowLink)

Le téléagrandisseur Snow 12 peut être connecté à une caméra à distance SnowLink avec le port d'entrée HDMI sur le côté gauche de l'appareil.


Nous vous invitons à contacter votre fournisseur ou Zoomax si vous souhaitez essayer le mode de vision de loin avec SnowLink.



5.1.5 Menu Réglages

Choisissez l'icône Réglages et appuyez sur le bouton Mode pour entrer dans le menu Réglages.

Poussez le stick analogique vers le haut/le bas/ à gauche/à droite pour passer d'une icône à l'autre. Appuyez sur le bouton Mode pour confirmer ou changer de paramètre. Vous pouvez également appuyer sur les icônes.

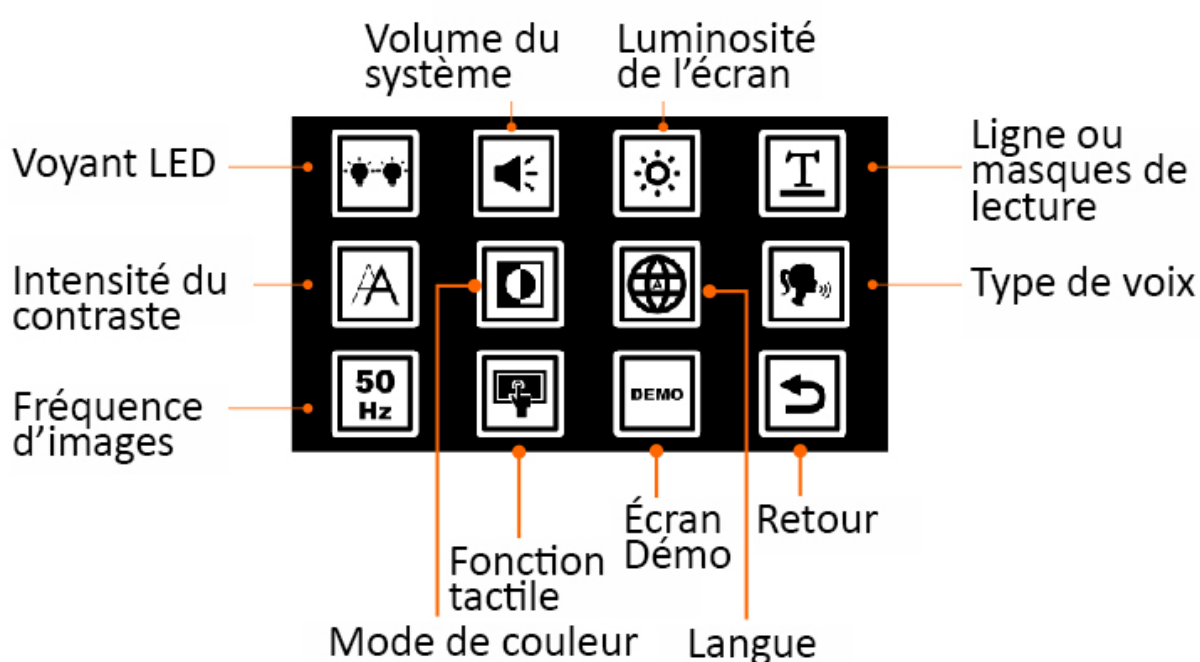

Allumer/éteindre les voyants LED


Sélectionnez l'icône de voyant LED, puis appuyez sur le bouton Mode pour faire défiler 4 types de voyants LED : gauche allumé et droit allumé, gauche allumé et droit éteint, gauche éteint et droit allumé, gauche éteint et droit allumé, gauche éteint et droit éteint. Vous pouvez appuyer sur l'icône pour passer de l'un à l'autre.

Par défaut, les voyants LED sont allumés pour la vision de près. Les voyants LED sont éteints en mode vision de loin et avec les fonctions OCR et de synthèse vocale.

Volume du système

Sélectionnez l'icône de volume du système, puis appuyez sur le bouton Mode ou appuyez sur l'icône pour régler le volume. Poussez le stick analogique à droite ou à gauche pour augmenter ou diminuer le volume.

Vous pouvez également appuyer sur les curseurs de la case pour régler le volume.

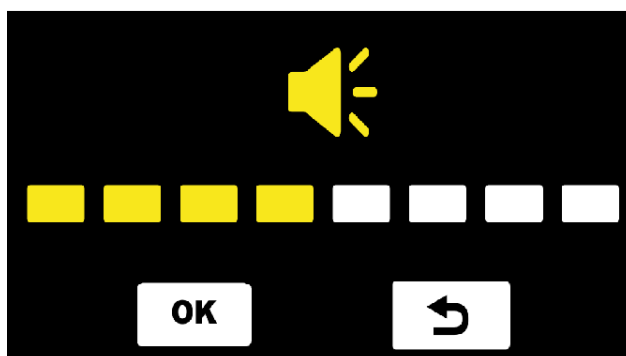

Appuyez sur “**OK**” pour confirmer, ou sur “↶” pour revenir si la fonction d’écran tactile est activée, sinon appuyez sur le bouton Mode pour confirmer, ou sur le bouton Figer pour revenir.


Au total, 8 niveaux de volume sont disponibles. Le niveau de volume par défaut est réglé sur un volume moyen.

Réglage de la luminosité de l’écran

Tout d'abord, sélectionnez l'icône de luminosité de l’écran, puis appuyez sur la touche Mode ou appuyez sur l'icône pour régler la luminosité.

Ensuite, poussez le stick analogique à droite ou à gauche pour augmenter ou réduire la luminosité de l’écran.

Vous pouvez également appuyer sur les curseurs de la case pour régler la luminosité.

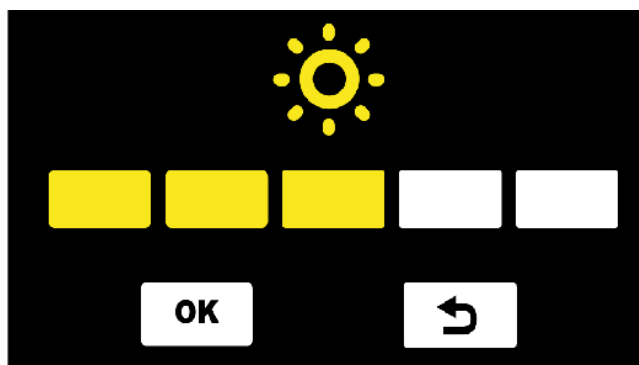

Appuyez sur “**OK**” pour confirmer, ou sur “↶” pour revenir si la fonction d’écran tactile est activée, sinon appuyez sur le bouton Mode pour confirmer, ou sur le bouton Figer pour revenir.

Au total, 5 niveaux de luminosité sont disponibles : 5,4,3,2,1.

Par défaut, le niveau de luminosité est défini à 3.

Ligne et masques de lecture

Pour accéder à la ligne et aux masques de lecture, appuyez simultanément sur les touches de zoom avant et zoom arrière sans entrer dans le menu principal.

Pour passer de la ligne de lecture aux masques de lecture et inversement, répétez à nouveau la procédure.

Vous pouvez définir la position de la ligne de lecture ou la largeur entre les masques de lecture dans le menu Réglages.

Choisissez l’icône “Ligne et masques de lecture” dans le menu Réglages, puis appuyez sur le bouton Mode pour accéder à la page de réglage. Poussez le stick analogique à droite ou à gauche pour définir la ligne ou les masques de lecture.

Poussez le stick analogique vers le haut ou vers le bas pour définir la position de la ligne de lecture ou la largeur entre les masques de lecture.

Vous pouvez également appuyer sur l’icône pour choisir la ligne de lecture et le style des masques, et déplacer la position de la ligne ou les masques en touchant l’écran.


Appuyez sur “**OK**” pour confirmer, ou sur “↶” pour revenir si la fonction d’écran tactile est activée, sinon appuyez sur le bouton Mode pour confirmer, ou sur le bouton Figer pour revenir.

Régler l'intensité du contraste

L’intensité de contraste la plus adaptée peut varier en fonction des différents documents de lecture.

Choisissez l'icône "Intensité du contraste" et appuyez sur le bouton Mode pour accéder à la page de réglage. Poussez le stick analogique vers le haut/vers le bas pour régler l'intensité du contraste.

Appuyez sur “**OK**” pour confirmer ou sur “↶” pour revenir si la fonction de l’écran tactile est activée, sinon appuyez sur le bouton Mode pour confirmer, ou sur le bouton Figer pour revenir.

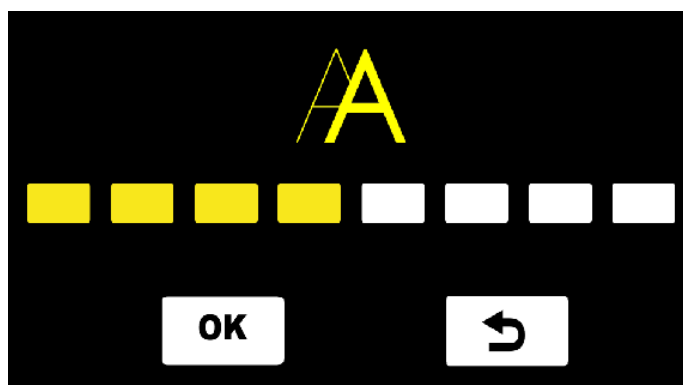

Il est également possible de régler l’intensité du contraste sans avoir à accéder à la page de réglage. Tout en maintenant appuyé le bouton Mode, appuyez sur le bouton de Zoom avant “+” ou le bouton de Zoom arrière “-” pour régler la luminosité du contraste.

Sélectionner le mode de couleur de préférence

Sélectionnez l'icône "Mode de couleur", puis appuyez sur le bouton Mode pour accéder à la page de réglage. Poussez le stick analogique vers la droite/la gauche/en haut/en bas pour changer le mode de couleur. Appuyez sur le bouton Mode pour sélectionner ou désélectionner le mode de couleur. Vous pouvez également appuyer sur les icônes du mode de couleur pour sélectionner ou désélectionner le mode de couleur.

Appuyez sur "**OK**" pour confirmer ou sur " pour revenir si la fonction de l'écran tactile est activée, sinon appuyez sur le bouton Mode pour confirmer, ou sur le bouton Figer pour revenir.

Au total, 10 modes de couleur à contraste élevé sont disponibles. Tous sont sélectionnés par défaut.

Langue

Sélectionnez l'icône "Langue", puis appuyez sur le bouton Mode pour accéder à la page de réglage. Poussez le stick analogique vers le haut/vers le bas pour choisir la langue. Appuyez sur le bouton Mode pour confirmer. Appuyez sur l'icône "Retour" pour revenir.

Vous pouvez également balayer l'écran vers le haut/le bas pour sélectionner la langue. La langue par défaut est l'anglais.

REMARQUE :

1. La langue de la commande vocale est la même que celle de l'OCR et de la synthèse vocale. Si la langue de la commande vocale est définie à Auto, la commande vocale sera en anglais et la détection automatique de la langue dans l'OCR et la synthèse vocale sera activée.
2. La détection automatique de la langue sera désactivée si la langue de la commande vocale est définie sur une autre langue spécifique.

Femme/Homme

Sélectionnez l'icône "Femme/Homme", puis appuyez sur le bouton Mode pour choisir entre la voix "féminine" et la voix "masculine".

Vous pouvez appuyer sur l'icône pour passer de l'un à l'autre. Par défaut, la voix est Féminine.

REMARQUE :

Les langues existantes indiquées ci-dessous ne sont disponibles qu'avec une voix FÉMININE : English (IND) / Français (CA) / Norsk / Limba română / Türk dili / Svenska.

Fréquence d'images : 50/60Hz

Choisissez "50/60Hz" et appuyez sur le bouton Mode pour passer entre 50Hz et 60Hz. Vous pouvez également appuyer sur l'icône pour passer de l'une à l'autre.

Activer/désactiver la fonction tactile

Appuyez sur l'icône de fonction de l'écran tactile ou appuyez sur le bouton Mode pour désactiver la fonction d'écran tactile.

Appuyez sur le bouton Mode pour l'activer.


La fonction d'écran tactile est activée par défaut.

Mode démo

Appuyez sur l'icône "Démo", puis le Snow 12 présentera la fonction principale automatiquement.

5.1.6 Informations sur le système

Sélectionnez l'icône "Informations sur le système" et appuyez sur le bouton Mode pour accéder à la page de réglage, illustrée ci-dessous. Vous pouvez également appuyer sur l'icône pour entrer.

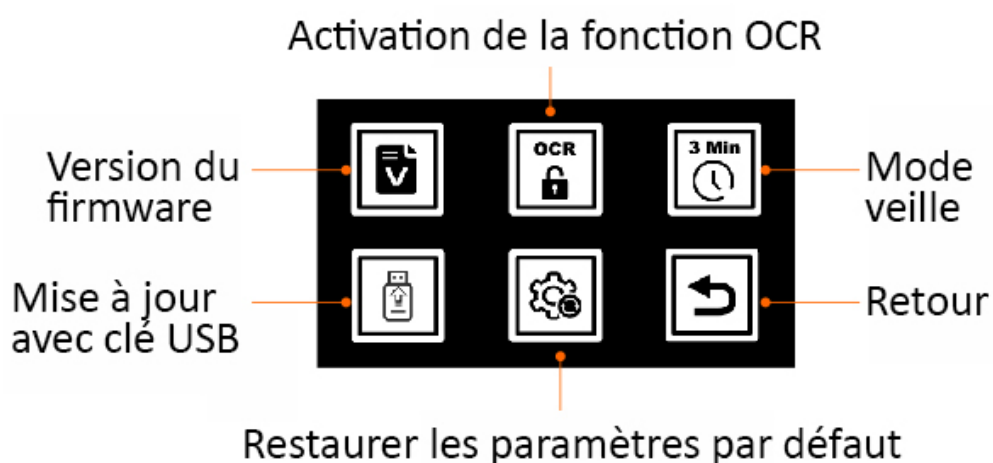

Version du Firmware

Sélectionnez l'icône de la version Firmware, puis appuyez sur le bouton Mode ou sur l'icône pour vérifier la version du firmware. Appuyez sur l'icône de retour ou appuyez sur le bouton Figer pour revenir.

Activer la fonction OCR et de synthèse vocale

Si le téléagrandisseur Snow 12 que vous avez acheté n'est pas doté de la fonction OCR et de synthèse vocale et si vous souhaitez passer à la version OCR, veuillez contacter votre distributeur ou Zoomax.

Pour le distributeur :

Avant d'activer la fonction OCR, vous devez obtenir un code QR pour l'activation à l'adresse suivante sur le site Web : <http://zoomaxupgrade.com>. Sélectionnez l'icône "Activer la fonction OCR" sur le Snow 12 pour scanner le code QR que vous obtenez.

Activation/Désactivation du mode veille automatique après 3 minutes de non-utilisation

Appuyez sur cette icône  pour activer la fonction de mode veille automatique après 3 minutes de non-utilisation. Dans ce mode, l'appareil ne se met pas en mode veille avant de s'éteindre. Si le mode Démo est désactivé, l'appareil basculera en mode veille s'il n'est pas utilisé pendant 3 minutes.

Le mode veille automatique après 3 minutes de non-utilisation est activé par défaut. Sélectionnez l'icône et appuyez sur le bouton Mode pour désactiver le mode de mise en veille automatique après -minutes. Vous pouvez appuyer sur l'icône pour activer ou désactiver cette fonction.

Mise à niveau du firmware avec une clé USB

Avant la mise à niveau du firmware, veuillez préparer une clé USB avec le firmware de Zoomax. Veuillez vous assurer que le firmware a été enregistré dans le répertoire racine de la clé USB.

Tout d'abord, insérez la clé USB avec l'adaptateur USB 3.0 vers USB Type C (fourni) dans le port "USB type C".

Ensuite, sélectionnez l'icône "Mise à niveau du firmware", puis appuyez sur la touche Mode pour confirmer. Vous pouvez également appuyer sur l'icône pour confirmer. Le processus de mise à niveau prendra plusieurs secondes environ.

Lorsque le processus de mise à niveau est terminé, l'appareil redémarre automatiquement.

Restaurer les paramètres par défaut

Sélectionnez l'icône "Restaurer les paramètres par défaut", puis appuyez sur le bouton Mode pour confirmer. Il vous sera demandé si vous souhaitez ou non supprimer toutes les photos. Si vous choisissez Oui, toutes les photos seront automatiquement supprimées lorsque les paramètres par défaut seront restaurés. Ensuite, l'appareil redémarrera.


5.2 Transfert de fichiers avec des ordinateurs

Il est possible de transférer des fichiers stockés dans le Snow 12 vers votre ordinateur en utilisant le câble USB fourni. Il est également possible de transférer les fichiers dans votre ordinateur vers le Snow 12.

Les étapes sont les suivantes :

1. Assurez-vous que votre Snow 12 et votre ordinateur sont allumés.

2. Raccordez l'appareil à l'ordinateur avec le câble USB : insérez le connecteur USB de type C (le petit connecteur) au port de type C de votre Snow 12, puis branchez le connecteur USB 3.0 (le gros connecteur) au port USB de votre ordinateur.

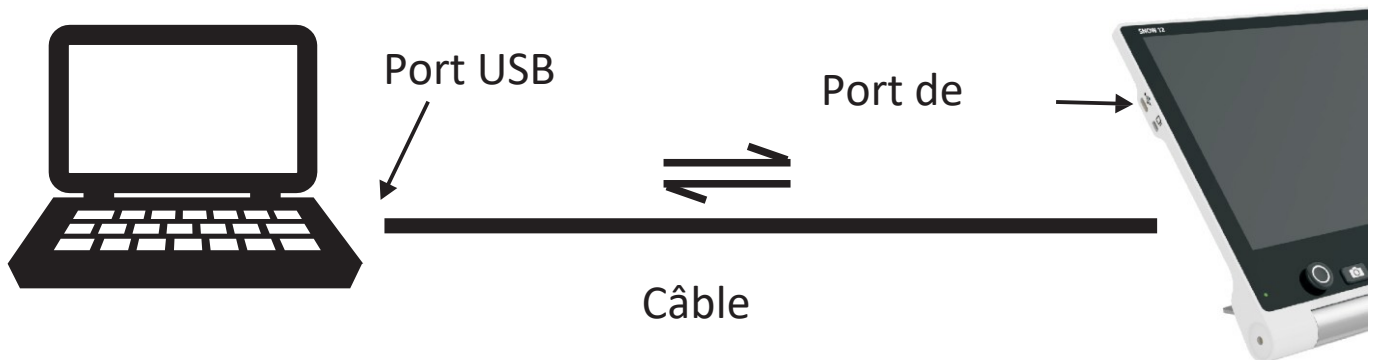

REMARQUE :


Actuellement, le Snow 12 ne peut être connecté qu'à un ordinateur fonctionnant sous Microsoft Windows. Le support pour l'environnement Mac est en cours de développement. Si vous avez besoin de vous connecter à un Mac, veuillez contacter votre distributeur Zoomax ou le siège social de Zoomax pour obtenir de l'aide.

3. Lorsque le Snow 12 est connecté,

- Le témoin d'alimentation devient rouge.
- Le Snow 12 s'affiche en tant que périphérique externe.
- Double-cliquez sur le dossier intitulé "Snow 12" pour y accéder.

4. Pour transférer des fichiers :

Le Dossier "Snow 12" comporte plusieurs sous-dossiers (présentés dans la figure ci-dessous). Ouvrez le dossier "DCIM", et le dossier Photo, le dossier PDF, le dossier TXT/RTF et le dossier Photo (OCR) vont s'afficher.

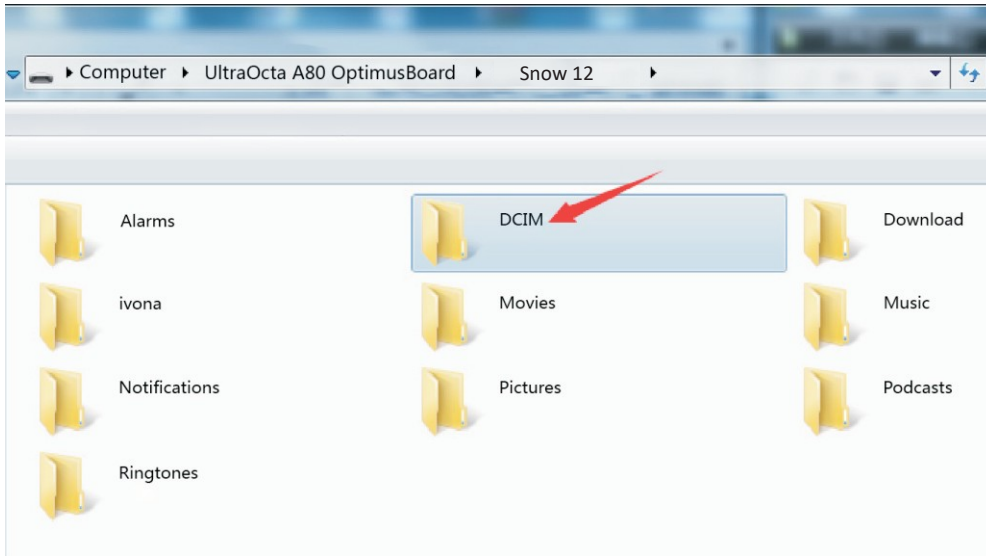

Sélectionnez le dossier correspondant, puis sélectionnez le fichier que vous voulez transférer. Vous pouvez soit copier ou couper le fichier sélectionné et le transférer du téléagrandisseur dans votre ordinateur ou de l'ordinateur dans le téléagrandisseur.

REMARQUE :

Toutes les images stockées dans le dossier Photo ne peuvent être visionnées/lues qu'en mode non OCR et de synthèse vocale.

Toutes les images stockées dans le dossier Photo (OCR) et le dossier TXT/RTF ne peuvent être visionnées/lues qu'en mode OCR et de synthèse vocale.


REMARQUE :

Évitez impérativement de modifier le nom du dossier, sinon l'appareil sera dans l'incapacité de retrouver les images transférées de l'ordinateur ou les images stockées précédemment.

5.3 Raccordement à un téléviseur ou à un moniteur

Pour visionner un document de lecture sur un écran plus large, vous pouvez connecter l'appareil à un téléviseur ou un moniteur.

1. Veillez à mettre votre téléviseur ou moniteur sous tension.
2. Raccordez le téléagrandisseur au téléviseur ou au moniteur en utilisant le câble HDMI fourni. Il suffit de brancher une extrémité du câble HDMI dans le port micro HDMI de votre Snow 12 et l'autre extrémité du câble HDMI dans n'importe quel port HDMI disponible sur votre téléviseur ou moniteur.

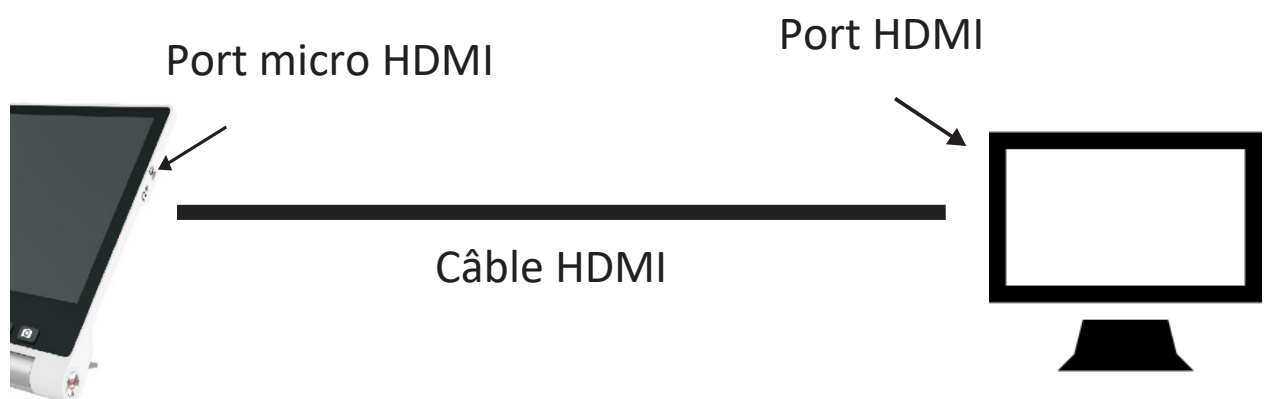

Une fois que l'appareil est branché, l'écran du Snow 12 va s'éteindre automatiquement et entrer en mode de sortie HDMI. Le contenu du document s'affichera sur le moniteur ou le téléviseur. L'écran s'allumera lorsque vous toucherez l'écran. Si vous ne touchez pas l'écran dans les 30 secondes suivantes, l'écran s'éteindra automatiquement.

REMARQUE :

Votre Snow 12 peut également être raccordé à une télévision ou à un moniteur qui n'est pas équipé(e) de port HDMI. Nous vous invitons à contacter votre distributeur Zoomax local pour en savoir plus sur les adaptateurs disponibles pour brancher votre Snow 12 à un téléviseur ou à un moniteur sans port HDMI.

6. Fonction OCR et de synthèse vocale

REMARQUE :

Une icône



☒ OUI
☐ NON

dans le coin supérieur droit de

de l'emballage indique que le Snow 12 à l'intérieur de ce colis est doté de la fonction de synthèse vocale.

Après avoir acheté l'appareil sans la fonction de synthèse vocale, vous bénéficierez d'un essai gratuit qui vous permettra d'utiliser la fonction jusqu'à 30 fois au total.

Vous pouvez contacter votre fournisseur local pour accéder au service de mise à jour de la version si vous souhaitez utiliser la fonction de synthèse vocale de façon permanente par la suite. Il convient de noter que le service de mise à niveau vous sera facturé.

6.1 Accéder à/Quitter la fonction de synthèse vocale

Accéder à la fonction OCR et de synthèse vocale

En mode d'affichage en temps réel (et non en mode d'image figée ou d'image enregistrée), appuyez et maintenez enfoncé le bouton Figer pendant 3 secondes pour accéder à la fonction de synthèse vocale. L'icône de synthèse

vocale  s'affichera ensuite à l'écran.

Vous pouvez également accéder à la fonction de synthèse vocale depuis la page du menu principal.

Quitter la fonction de synthèse vocale

Pour quitter la fonction de synthèse vocale en mode d'affichage en temps réel, appuyez et maintenez enfoncé le bouton Figer pendant 3 secondes pour quitter la fonction. Vous pouvez également appuyer sur l'icône dans le coin inférieur droit  de l'écran pour quitter la fonction.

Contrôle du grossissement dans la fonction de synthèse vocale

REMARQUE :

En mode de synthèse vocale, le grossissement et le mode de couleur par défaut ne peuvent pas être modifiés. Le Snow 12 peut numériser une page entière sur le support pliable.

6.2 Commencer

1. Assurez-vous d'avoir activé la fonction de synthèse vocale (reportez-vous au chapitre 6.1 pour savoir comment activer la fonction de synthèse vocale). L'icône de synthèse vocale  s'affichera à l'écran et toujours dans le coin inférieur gauche de l'écran pour indiquer que cette fonction est activée.
2. Placez le document à plat en dessous du Snow 12.
3. Appuyez sur l'écran pour faire la mise au point.
4. Appuyez brièvement sur le bouton Figer pour numériser le document.

Bouton Figer



5. Quelques secondes plus tard, l'appareil va commencer à lire le document numérisé.


➤ REMARQUE:

Par défaut, les voyants LED sont éteints en mode de synthèse vocale. Vous pouvez allumer/éteindre les voyants en appuyant sur l'icône LED dans le coin supérieur gauche en fonction de la luminosité de l'environnement.

➤ REMARQUE:

Par défaut, la détection automatique de la langue est activée, à l'exception de ces quatre langues: Limba română / Magyar / 日本語 / 中文. Pour ces quatre langues, veuillez prérégler la langue dans le menu de configuration avant de commencer la lecture à voix haute. Plus d'informations sont disponibles au chapitre 6.4. Sinon, la fonction ne pourra pas être exécutée correctement avec comme conséquence du texte inintelligible ou le message “ ⓘ ”.

6.2.1 Interface utilisateur des textes

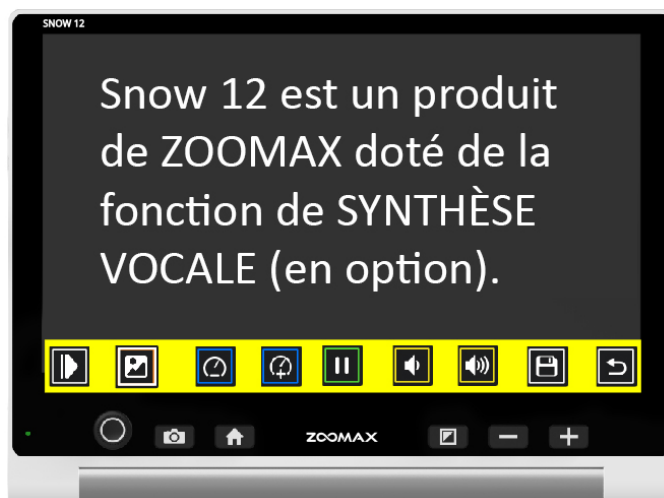

Touche agrandissement dans la vue de texte

Pendant la lecture, vous pouvez appuyer sur le bouton “+” ou “-” pour modifier le grossissement du texte.

- Appuyez sur le bouton “+” pour augmenter le grossissement du texte.
- Appuyez sur le bouton “-” pour diminuer le grossissement du texte.

Appuyez sur le mot pour lire à partir de ce mot

Vous pouvez appuyer sur un mot et le Snow 12 va démarrer la lecture à partir de ce mot.

Barre des touches

La barre des touches sur l’interface utilisateur est identique à celle sur la page de l’image à l’exception de .

Enregistrer le document

Pour enregistrer le document sur l'interface utilisateur des images, appuyez sur l'icône "Enregistrer" sur la barre des touches. Vous devez choisir le format dans lequel vous souhaitez l'enregistrer, entre "txt" et "rtf".

Appuyez sur l'icône "txt" ou "rtf" pour confirmer si la fonction de l'écran tactile est activée, sinon déplacez le stick analogique vers la gauche/la droite pour sélectionner "txt" ou "rtf", puis appuyez sur le bouton Mode pour confirmer, ou sur le bouton Figer pour revenir.

Couleur du texte

Pendant la lecture, vous pouvez appuyer sur le bouton Mode pour modifier le mode de couleur de contraste. 4 modes de couleur sont disponibles :


- Texte blanc sur fond noir
- Texte noir sur fond blanc
- Texte jaune sur fond noir
- Texte noir sur fond jaune

Le mode de couleur de contraste par défaut est le mode de contraste avec texte blanc sur fond noir.

REMARQUE :


Il n'est pas possible de modifier le mode de couleur de l'interface utilisateur des images.

6.2.2 Interface utilisateur des images

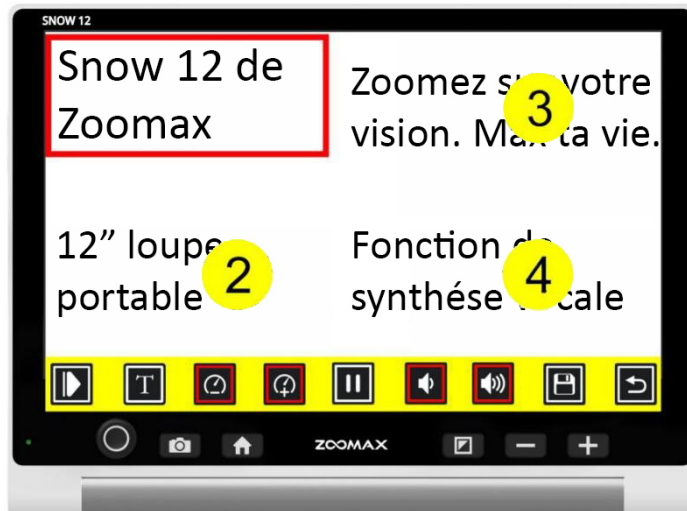

Barre des touches

La figure suivante présente la barre des touches de la synthèse vocale. Utilisez la barre des touches pour démarrer ou mettre en pause la lecture, régler la vitesse de lecture, régler le volume, passer à l'interface utilisateur des textes et réduire/développer la barre des touches.

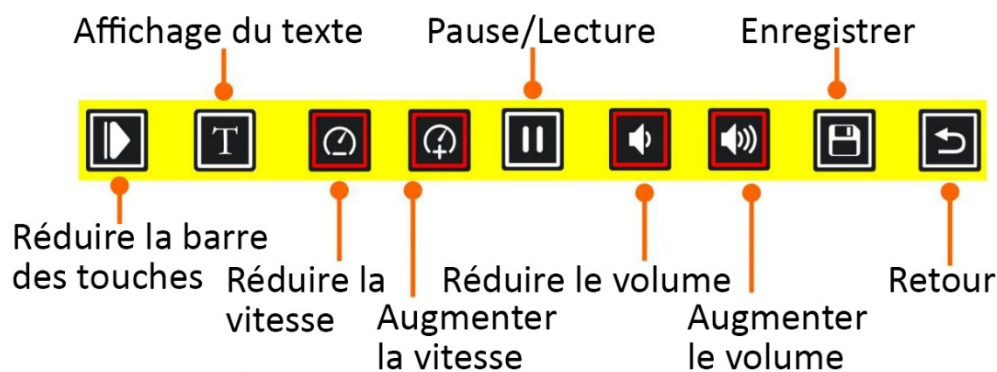

- Appuyez   sur pour régler la vitesse de lecture. Appuyez   sur pour régler le volume de la voix.
- Appuyez  sur pour mettre la lecture en pause. Appuyez  sur pour démarrer la lecture.
- Appuyez  sur pour réduire la barre des touches et cette icône changera en . Appuyez  sur pour développer la barre des touches.
- Appuyez  sur pour passer à la page de texte (voir chapitre 6.2). Appuyez  sur pour enregistrer la photo.

Lire des documents enregistrés dans la galerie

Dans la fonction de synthèse vocale, appuyez sur le bouton Accueil, sélectionnez l'icône de la galerie, puis appuyez sur le bouton Mode pour ouvrir la galerie. Vous pouvez également appuyer sur l'icône. Sélectionnez l'icône "JPG" pour afficher la liste des images enregistrées.

- Faites défiler l'écran pour parcourir l'index des documents si la fonction d'écran tactile est activée. Sinon, déplacez le stick analogique vers la droite/la gauche.

- Appuyez sur le document pour le sélectionner. ou appuyez sur le bouton Mode pour confirmer.

- Une icône de lecture  est présente au milieu du document. Appuyez sur cette icône pour démarrer la lecture du document.

Pour ouvrir un fichier PDF, sélectionnez le bouton "PDF" pour afficher la liste des fichiers PDF.

Pour ouvrir des fichiers txt ou rtf, sélectionnez le bouton "TXT/RTF" pour afficher la liste des fichiers enregistrés.

Supprimer des documents enregistrés

REMARQUE :

Il n'est pas possible de convertir les graphiques et les tableaux en texte avec précision.

N'utilisez pas cette fonction pour lire des tableaux et des graphiques.

Placez le Snow 12 sur le support pliable pour lui permettre de numériser plus de contenu du document de lecture dans la fonction OCR et de synthèse vocale. Le stand pliable permet au Snow 12 de prendre une image en pleine page.

REMARQUE :

Si la taille de la police est trop petite lors de la numérisation d'une feuille A4 entière, le processus de synthèse vocale peut échouer et " ⓘ " s'affichera à l'écran.

Lorsque vous relevez l'appareil pour prendre une photo d'un document, assurez-vous que les conditions d'éclairage sont suffisantes.

7. Dépannage

Problèmes	Solutions
Écran noir	- Vérifiez que l'appareil est sous tension et qu'il n'est pas en mode veille. - Chargez la batterie. - Diminuez le niveau de grossissement.
L'appareil est éteint	- Chargez la batterie.
L'image sur l'écran est noire ou déformée.	- Assurez-vous que l'appareil est posé à plat sur le document visionné.
Taches ou marques sur l'écran.	- Nettoyez la caméra et l'écran avec un chiffon doux.
L'appareil est connecté à un téléviseur, mais aucune image ne s'affiche sur l'écran du téléviseur.	- Assurez-vous que le téléviseur est sous tension. - Assurez-vous que le câble HDMI est correctement branché au téléviseur - Appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant 2 secondes pour forcer l'extinction de l'appareil. Redémarrez ensuite l'appareil.
Échec de la fonction de synthèse vocale ou le message "Not found" (Non trouvée) s'affiche à l'écran	- Ne déplacez pas l'appareil ou le document de lecture pendant la numérisation du document.
Choix de langue erroné	- Assurez-vous que la langue de la synthèse vocale est identique à celle du document de lecture.

Tout autre problème qui n'est pas mentionné dans ce guide.	- Appuyez simultanément sur le bouton marche/arrêt et le bouton “+” pour forcer l’extinction de l’appareil. Redémarrez ensuite l’appareil. Si la méthode ci-dessus ne produit aucun effet, veuillez contacter votre distributeur Zoomax ou le siège social de Zoomax pour obtenir de l’aide.
---	--

8. Caractéristiques techniques

- Grossissement :

 - 2,7X - 19X (vision de près)

 - 2,5X - 19X (sur support pliable)

- Modes de couleurs : Toutes les couleurs et 10 modes de couleurs à contraste élevé

- Écran : Écran tactile de 12 pouces ; résolution d'écran : 1920*1080p

- Caméra : Mise au point automatique / Mise au point tactile ; 13M de pixels

- Dimensions :

 - 29*22*2.4 cm (12*9*1 pouces) — Snow 12

 - 35*23*4 cm (14*9*1,6 pouces) — Support pliable replié

- Poids :

 - Snow 12 : 960 g (2,1 livres) Support
pliable : 1230 g (2,7 livres)

- Utilisation en continu : autonomie d'environ 2,5 à 3 heures (pour allumer/éteindre les LED,

la luminosité et la fréquence de numérisation des photos)

- Temps de charge : 2 heures

- Adaptateur d'alimentation : Entrée : 100-240 V ; Sortie : 15 V/4 A

- Capacité de stockage : environ 1,5 Go. Par exemple, si vous stockez des images uniquement sans la fonction de synthèse vocale, il peut stocker jusqu'à 1000 images. Si vous stockez des documents uniquement sous la fonction de synthèse vocale, il peut stocker jusqu'à 200 images

