

MagniLink S Premium 2

Petit, simple et mobile

MagniLink S Premium 2 est le téléagrandisseur le plus performant, répondant à des exigences extrêmes en termes de qualité et de mobilité. Il offre une qualité d'image supérieure, une technologie de pointe et des fonctions intelligentes. De plus, il se transporte facilement, par exemple entre la maison et l'école ou le bureau – et peut être connecté à un ordinateur ou à un moniteur. Vous pouvez ainsi choisir les fonctions et les options qui correspondent à vos besoins.





Mode à distance et mode lecture

Vous pourrez commuter facilement entre le mode à distance et le mode lecture. Il suffit de tourner la caméra et d'ouvrir l'objectif pour que votre MagniLink S Premium 2 devienne en une seconde une caméra à distance.

Facilité d'utilisation

L'appareil est facile à configurer et est prêt à l'emploi en quelques secondes. Les boutons tactiles facilitent l'installation et l'utilisation. Toutes les pièces ont été conçues et fabriquées dans un souci de durabilité, de recyclage et de facilité d'utilisation.

Les pieds supports rétractables réduisent l'encombrement et permettent de placer le système à proximité d'un ordinateur portable, sur sa gauche ou sur sa droite.

Hauteur de travail dégagée

Leader sur le marché avec sa hauteur de lecture de 31 cm, il permet de tourner les pages des livres et des classeurs volumineux.

Une alimentation sans souci

L'utilisateur n'aura jamais à se préoccuper de la puissance de la batterie ou des chargeurs de batterie égarés car le système est alimenté par l'ordinateur.

Faites-en le vôtre !

Le logiciel contrôle les fonctionnalités du système telles que le grossissement, les couleurs artificielles ou la luminosité et offre à l'utilisateur la possibilité d'effectuer facilement des réglages personnels pour une expérience optimale.

Écoutez votre texte

Le logiciel inclus est utilisé pour afficher l'image de votre MagniLink S Premium 2 sur un PC, Mac ou Chromebook. Vous pouvez également choisir la fonction de synthèse vocale (TTS). Grâce à cette fonction, il est possible de traiter un texte et de l'écouter. Le texte traité peut être affiché en plusieurs modes différents, par exemple, mot à mot ou ligne par ligne, et ce, pendant que le texte est lu.

Il est possible de traiter l'image prise avec la caméra MagniLink connectée, et vous pouvez également importer des documents extérieurs pour les traiter. Il est également possible de coller un texte directement dans le programme afin qu'il soit lu. Pouvoir écouter un texte en même temps que le lire permet d'en améliorer la compréhension et l'endurance à la lecture.


Compatibilité

Le logiciel inclus est compatible avec plusieurs autres logiciels de grossissement, tels que ZoomText et SuperNova.

MagniLink S Premium 2 peut être utilisé avec Windows, Mac OS, IOS (iPad) et Chrome OS. Si vous ne souhaitez pas connecter l'appareil à un ordinateur, il peut également être connecté directement à un écran.

Partagez votre écran

À l'aide du logiciel, vous pouvez partager l'écran entre votre ordinateur et votre téléagrandisseur – parfait pour étudier. Si vous choisissez un kit de division de matériel informatique, vous pouvez également connecter une caméra à distance externe pour obtenir une solution à deux caméras. Cela peut faciliter le travail de l'élève lorsqu'il ou elle a par exemple besoin de voir ce que l'enseignant fait au tableau et en même temps de regarder dans son livre ou dans ses notes.

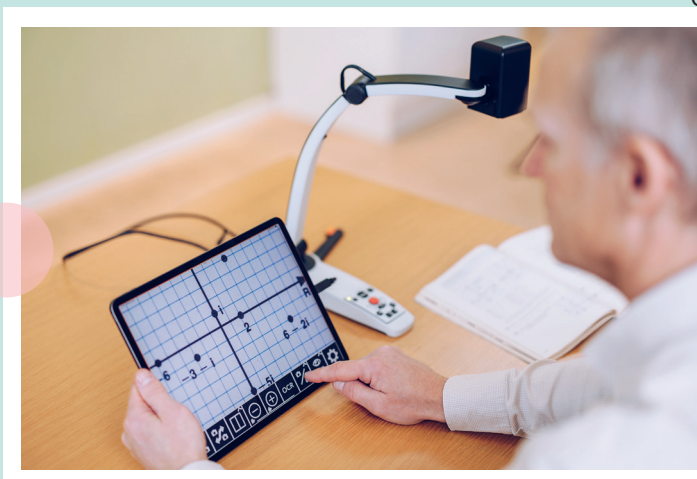



Connexion à l'iPad*



1. Téléchargez MagniLink Viewer depuis l'App Store.
2. Connectez-vous directement à un iPad via USB C.

Il est recommandé d'utiliser un hub USB avec un minimum de 2 ports.

(1 x USB-C PD max. 100 W (pas de données), 1-3 x USB-C 3.2 GEN 2 – vitesse de données maximale 10 Gbit/s / max. Charge de 7,5 W par port)

* iPad Pro 11" (3e génération, 2021), iPad Pro 12,9" (5e génération, 2021) et iPad Air (5e génération, 2022) avec port USB-C et IOS 17.0. Pour toute question concernant le choix du HUB USB/adaptateur secteur, veuillez nous contacter (voir les coordonnées en dernière page).

Stations d'accueil astucieuses

Avec une station d'accueil, votre MagniLink S Premium 2 devient le système fixe dont vous avez besoin. Connectez et déconnectez facilement l'appareil de la station pour permuter entre un système fixe et un système portable. Toutes les stations d'accueil sont fournies avec un panneau de contrôle externe. Différentes stations d'accueil sont proposées :

- **Station d'accueil avec table X/Y**
Taille A3 et freins à friction dans les deux directions.
- **Station d'accueil avec pince de table**
Idéale si vous disposez de peu d'espace de travail et souhaitez installer votre appareil sur votre bureau.
- **Station d'accueil avec un plateau**
Idéale si vous disposez de peu d'espace de travail mais souhaitez une certaine flexibilité d'installation.





Contactez-nous
et nous vous
aiderons à choisir
parmi les options
et accessoires
qui vous
conviennent !

Caractéristiques techniques

Modèle

MagniLink S Premium 2

Connexions

USB 3.0 (type C), HDMI

Résolution de la caméra

HD: 1280 x 720, FHD: 1920 x 1080

Plage d'agrandissement

HD: 1.4x-75x*, FHD: 1.1x-75x*

Hauteur de travail dégagée

31 cm

Modes de couleurs

Couleurs naturelles, 6 couleurs artificielles
(positives/négatives)

Modes d'affichage

Lecture (gauche/droite), à distance, miroir

Fréquence d'images

60 images/seconde entièrement numériques

Poids

1,9 kg

Compatibilité

PC: ZoomText 10.X ou version plus récente
Dolphin SuperNova 12 ou version plus récente

Configuration minimale du système

PC : Windows 7 ou version plus récente

Mac : Mac OS X 10.14 ou version plus récente

Chromebook : Chrome OS 59 ou version plus récente

iPad : iPad Pro 11" (3e génération, 2021),
iPad Pro 12,9" (5e génération, 2021) et iPad
Air (5e génération, 2022) avec port USB-C et
IOS 17.0.

* Le grossissement min / max peut être configuré dans le logiciel EUC

MagniLink S Premium 2

La société LVI Low Vision International est reconnue comme étant l'un des plus grands fabricants d'assistance à la basse vision. Sa mission consiste à faciliter la vie quotidienne des personnes souffrant de déficiences visuelles.

Nous sommes certifiés ISO 14001 & 9001



Intertek

LVI Low Vision International GmbH

Hinterbrunnenstrasse 1
8312 Winterberg, SUISSE
Tel: 052 202 96 16
E-mail: info@lvi.ch

WWW.LVI.CH



LVI Low Vision International

Verkstadsgratan 5
352 46 Växjö, SWEDEN
Tel: +46 (0)470 72 77 00
Fax: +46 (0)470 72 77 25
E-mail: info@lvi.se

WWW.LVI.SE