

MagniLink S Premium 2



Klein, einfach und mobil

Mit überragender Bildqualität, moderner Technologie und intelligenten Funktionen präsentiert sich die MagniLink S Premium 2 als ultimatives Lesesystem für Nutzer mit hohen Erwartungen an Qualität und Mobilität. Ausgesprochen leicht zu transportieren und überaus flexibel einsetzbar, kann sie bis an den Arbeitsplatz mitgenommen und an einen Computer oder Bildschirm angeschlossen werden. Ergänzen Sie Ihr MagniLink S Premium 2 mit genau den Funktionen und Optionen, die Sie wirklich benötigen.





Lese- und Distanzkamera

In Sekundenschnelle kann zwischen Lese- und Distanzmodus gewechselt werden. Einfach den Kamerakopf drehen und die Nahlinse am Kameraobjektiv hochklappen – und schon wird das MagniLink S Premium 2 zur Distanzkamera.

Benutzerfreundlich

Das Design ist sehr bedienungsfreundlich. Die wichtigsten Elemente für Aufbau und Nutzung des Systems sind orange hervorgehoben. Die Bedienelemente für sämtliche Hauptfunktionen sind taktil gekennzeichnet. Alle Geräteteile sind langlebig, recyclingfähig und ergonomisch.

Aufklappbare Stützbeine minimieren die Standfläche, so dass das Gerät direkt neben Laptop oder Tastatur aufgestellt werden kann, wahlweise rechts oder links. Das Gerät wird über USB 3.0 (type C) mit Strom versorgt. Probleme mit unzureichender Batterieladung oder nicht greifbaren Ladegeräten sind ausgeschlossen.

Freie Arbeitshöhe

Dank einer grosszügigen Arbeitshöhe von 31 cm lassen sich sogar grosse Bücher oder voluminöse Ordner bequem umblättern.

Machen Sie sie zu der Ihren!

Alle Funktionen des Geräts können über die kameraeigene Software gesteuert werden. Sie bietet dem Benutzer individuelle Einstellungsmöglichkeiten. Die Software ist für PC, Mac und Chromebook verfügbar.

Text to Speech als Option

Die mitgelieferte Software wird für die Anzeige von Bildern von Ihrer MagniLink S Premium 2 auf einem PC, Mac oder Chromebook genutzt. Optional enthält die Software eine Text-zu-Sprache-Funktion, TTS (Text to Speech). Diese Funktion ermöglicht die OCR-Verarbeitung eines Textes und ihn vorlesen zu lassen. Der OCR-verarbeitete Text kann in verschiedenen Wiedergabemodi angezeigt werden, beispielsweise Wort für Wort oder Zeile für Zeile, und zugleich ist der Text mit Sprache synchronisiert.

Sie können sowohl Text aus einem Bild, das Sie mit Ihrer MagniLink S Premium 2 aufgenommen haben, OCR-verarbeiten als auch andere Dokumente in der Software einlesen, um sie OCR-verarbeiten zu lassen. Es ist auch möglich, Text direkt in das Programm einzufügen, um ihn laut vorlesen zu lassen.


Kompatibilität

Die Software ist mit mehreren anderen Vergrößerungssoftwares wie zum Beispiel ZoomText und SuperNova kompatibel.

MagniLink S Premium 2 kann mit Windows, Mac OS, IOS (iPad) und Chrome OS genutzt werden. Wenn Sie sie nicht an einen Computer anschliessen möchten, lässt sie sich auch direkt an einen Bildschirm anschliessen.

Teilen Sie Ihren Bildschirm

Mit der Software können Sie Ihre Bildschirm-anzeige zwischen Ihrem Computer und Ihrer MagniLink S Premium 2 aufteilen – ideal für die Schule und am Arbeitsplatz. In bestimmten Situationen ist eine Lösung mit zwei Kameras optimal. Das kann in der Schule hilfreich sein, wenn der betreffende Schüler beispielsweise sehen muss, was der Lehrer vorne an der Tafel macht und zugleich in sein Lehrbuch oder auf seine Notizen schauen muss.

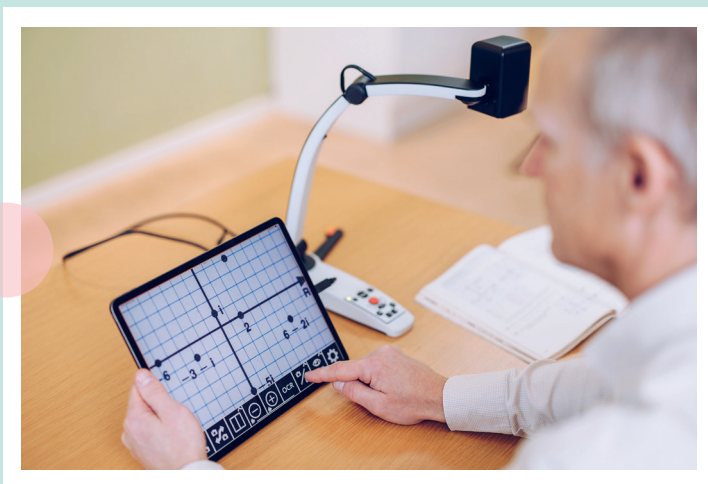



So stellen Sie eine Verbindung zum iPad her*



1. Laden Sie MagniLink Viewer aus dem App Store herunter.
2. Über USB C direkt mit einem iPad verbinden.

Es wird empfohlen, einen USB-HUB mit mindestens 2 Anschlüssen zu verwenden.

(1 x USB-C PD max. 100 W (keine Daten), 1-3 x USB-C 3.2 GEN 2 – max. Datengeschwindigkeit 10 Gbit/s / max. 7,5 W Laden pro Port)

* iPad Pro 11" (Generation 3, 2021), iPad Pro 12,9" (Generation 5, 2021) und iPad Air (Generation 5, 2022) mit USB-C-Anschluss und IOS 17.0. Bei Fragen zur Auswahl des USB-HUB/AC-Adapters kontaktieren Sie uns bitte (siehe Kontaktinformationen auf der letzten Seite).

Intelligente Dockingstationen

Mit einer Dockingstation lässt sich das MagniLink S Premium 2 bei Bedarf als stationäres System nutzen. Das An- und Abdocken zum Wechsel zwischen stationärem und tragbarem System dauert nur Sekunden. Alle Dockingstationen werden mit einem externen Bedienelement geliefert. Folgende Dockingstationen sind erhältlich:

- **Dockingstation mit X/Y-Lesetisch**
Der Komfort-Kreuztisch im A3-Format eignet sich besonders beim stationären Einsatz mit grossen Vorlagen.
- **Dockingstation mit Tischklemme**
Ideal bei kleinen Arbeitstischen.
- **Dockingstation mit Grundplatte**
Ideal für eine flexible Positionierung, auch bei kleinen Arbeitstischen.





Technische Daten

Modell

MagniLink S Premium 2

Anschlüsse

USB 3.0 (type C), HDMI

Kameraauflösung

HD: 1280 x 720, FHD: 1920 x 1080

Vergrößerungsbereich

HD: 1.4x-75x*, FHD: 1.1x-75x*

Freie Arbeitshöhe

31 cm

Farbmodi

Echtfarbdarstellung, 6 Kontrastfarben
(positiv/negativ)

* Einstellungen sind über die Software
individuell konfigurierbar.

Anzeigemodi

Lesen (links/rechts), Distanz, Spiegelmodus

Bildfrequenz

60 digitale Vollbilder/Sekunde

Gewicht

1,9 kg

Kompatibilität

PC: ZoomText 10.X oder höher, Dolphin
SuperNova 12 oder höher

Systemvoraussetzungen

PC: Windows 7 oder höher
Mac: Mac OSX 10.6 oder höher
Chromebook: Chrome OS 59 oder höher

iPad: iPad Pro 11" (3. Generation, 2021),
iPad Pro 12,9" (5. Generation, 2021) und
iPad Air (5. Generation, 2022) mit USB-C-
Anschluss und IOS 17.0.

MagniLink S Premium 2

LVI Low Vision International ist als einer der weltweit führenden Hersteller von elektronisch vergrößernden Sehhilfen anerkannt mit der Mission, das tägliche Leben für Menschen mit Sehbehinderung angenehmer zu gestalten.

Wir sind zertifiziert nach ISO 14001 & 9001.



Intertek

LVI Low Vision International GmbH

Hinterbrunnenstrasse 1
8312 Winterberg, SCHWEIZ
Tel: 052 202 96 16
E-mail: info@lvi.ch
WWW.LVI.CH



LVI Low Vision International
Verkstadsatan 5
352 46 Växjö, SWEDEN
Tel: +46 (0)470 72 77 00
Fax: +46 (0)470 72 77 25
E-mail: info@lvi.se
WWW.LVI.SE