

Bruksanvisning

inklusive monteringsanvisning

Glamox Luxo LFM LED G2

LVI Low Vision International

Verkstadsgatan 5

Tel: +46 470 – 727700

E-mail: info@lvi.se

352 46 Växjö

Fax: +46 470 – 727725

Internet: www.lvi.se

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1.	INTRODUKTION	4
2.	PRODUKT LFM LED G2	5
3.	MONTERING	7
	Försiktighetsåtgärder.....	7
	Renhållning	8
	Felsökning	8
	Säkerhet	8
	Miljömässiga förhållanden	9
	Klassifikation	9
4.	SÄKERHETSINFORMATION	10

LVI Low Vision International AB grundades 1978 och är en av världens ledande tillverkare av förstorande TV- och datorsystem för synsvaga. Utveckling av nya produkter sker i nära samarbete med användare och professionell personal inom synrehabiliteringen. LVI är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 och miljöcertifierat enligt ISO 14001.

Eftersom produktutveckling hela tiden förekommer, förbehåller sig LVI rätten att vid alla tillfällen utan föregående information eller förpliktelse göra förbättringar i den här bruksanvisningen och den produkt som beskrivs i den.

1. Introduktion

Vi gratulerar dig till ditt val av Glamox Luxo-lampa. Vårt mål är att du ska känna dig nöjd med ditt val av leverantör och synhjälpmedel.

Lampor från Glamox Luxo levereras som standard med bordfäste samt ljuskälla. Som tillbehör finns bl a golvstativ och olika tilläggslinser. Alla produkter från Glamox Luxo har 5 års garanti.

2. Produkt

Luxo LFM LED G2

LFM LED G2 är en förstoringslampa med låg vikt helt i metall, LED ljuskälla och en flexibel fjäderbalanserad arm i Luxo tradition. Armen ger lång räckvidd och maximal vertikal och horisontell rörelse och stannar alltid i rätt läge utan att dippa. Flexibiliteten i skärmfästet mellan lampans huvud och arm gör exakt positionering lätt. LFM LED G2 är lika väl lämpad för professionellt bruk som för användning av synskadade och andra med behov av exakt förstoring. Den låga vikten gör den enkel att flytta runt. LFM LED G2 monteras enkelt med ett avtagbart bordsfäste.

Skuggfri förstoring

Den ø127 mm glaslinsen är placerad i mitten av en cirkel av LED ljuskällor. Detta är det perfekta sättet att belysa ett objekt, det praktiskt taget eliminerat från skuggor. LFM LED G2 levereras med en 3 eller 5 dioptrier glaslins. En tygpåse följer med som solskydd och för att skydda linsen från damm.

LED: Framtidens ljuskälla!

LFM LED G2 är utrustad med en full cirkel av lysdioder (LED) med en total energiförbrukning på endast 9,5 W. Den har trestegs dimning av ljuset (100%, 50%, 0%). Lysdioder har en otroligt lång livslängd. Dioderna i LFM LED G2 har en livslängd på 50.000 timmar. Det betyder 25 år eller mer med normal användning. Du kommer sannolikt aldrig att behöva byta ljuskällan!



On/off + dimming



3. Montering


Armaturen har en fjäderbelastad arm. För att undvika att armen svänger ut och skadar någonting i sin omgivning, montera först bordfäste eller golvstativ. Placera därefter produkten i fästet innan armen fälls ut.

Använd alltid medföljande bordsfäste eller golvstativ. Luxo garanterar inte produktens funktionalitet eller livslängd vid användande av icke originaltillbehör.

Försiktighetsåtgärder



- Lampan får **ej** placeras i solljus utan att täckas över, då detta kan innebära brännrisk. Använd därför linsskyddet/vinkla undan lampan när den inte används.
- Undvik att spilla vätska på lamphuvudet.
- Öppna aldrig lamphuvudet när strömmen är på.

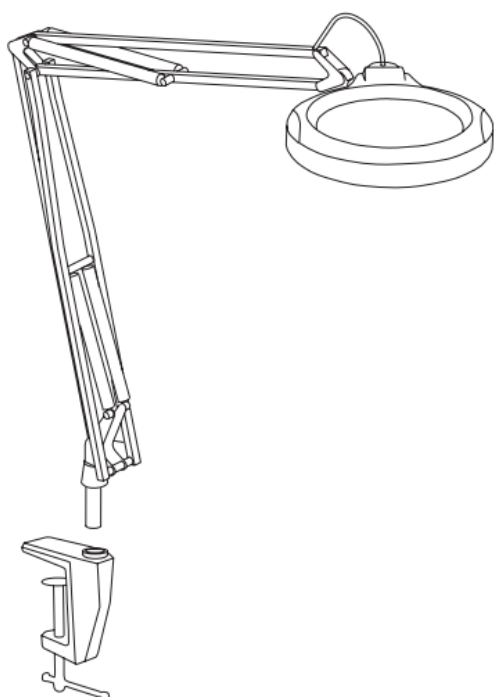

Renhållning:

Torka bort damm med vanlig fuktig trasa – Undvik att använda starka rengöringsmedel eller mekaniska lösningsmedel Om produkten är extremt smutsig kan exempelvis Wetwip klorduk användas.

Felsökning

Kontrollera strömförsörjningen.

Säkerhet

- Användaren av denna produkt är informerad om att tillverkaren enbart kan ta ansvar för säkerhet av belysningen då underhåll, reparation och förändringar är utförda av tillverkaren eller behöriga företag godkända av tillverkaren och när säkerhetskomponenter i produkten är ersatta med originaldelar.
- Lampan får ej placeras i solljus utan att täckas över, då detta kan innebära brännrisk. Använd därför linsskyddet/vinkla undan lampan när den inte används.
- Armatyren är inte avsedd att användas i områden med explosionsrisk.
- Sladd bör enbart bytas av kvalificerad elinstallatör eller annan behörig fackperson.
- Reparation av armen skall enbart utföras av Luxo ASA eller av Luxo godkänd person.

Miljömässiga förhållanden

Transport och bevaring


Allmänntemperatur..... -20° C to 70° C
Fuktighetsgrad 10 % to 100 % (måste hållas torr)
Luftryck 500hPa till 1060hPa

Användning

Allmänntemperatur 5° C till 40° C
Fuktighetsgrad30 % till 75 %
Luftryck 700hPa till 1060hPa

Klassifikation


Skyddsklass	Klass 1 (jordad)
Skyddad mot explosionsrisk	Ej skyddad
Täthetsklass	IP20
Ställbar armatur	ja
Säkerhetstest enligt	EN 60598-1(2008) EN 60598-2-4 (1997)
EMC-test enligt	EN55015 (2006)

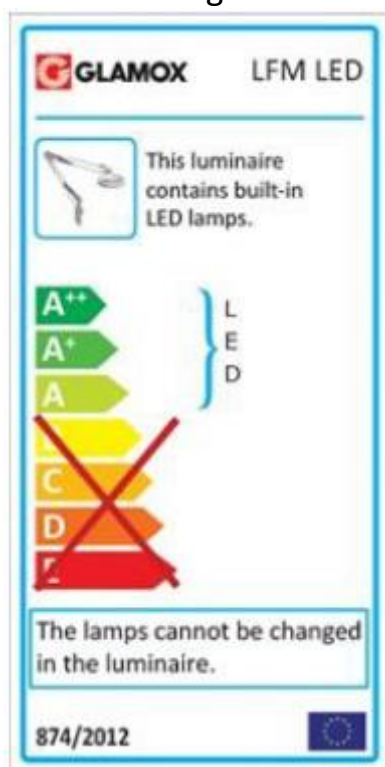

4.

Säkerhetsinformation

Om den externa flexibla kabeln eller sladden i denna armatur är skadad, skall den endast bytas av tillverkaren eller dennes serviceverkstad eller motsvarande behörig person för att undvika fara.

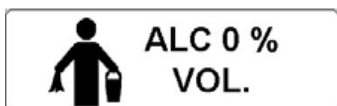

Denna produkt bör inte rengöras med alkohol



Elektriskt avfall. Produkten ska återvinnas.




CE-märkning enligt försäkran om överenskommelse



Godkänd av Nemko



Varning, läs bruksanvisningen innan användning

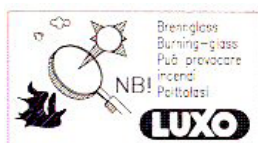

Håll produkten undan solljus. Linsen kan bli en brandfara. Använd gärna linsskyddet när den ej används.