

# MagniLink PRO





# För en tillgänglig arbetsplats

MagniLink PRO är utvecklad med ambitionen att vara det ultimata systemet för alla yrkesverksamma användare, oavsett yrke. Redan i grundutförandet är systemet komplett och har många av de funktioner som efterfrågas på en arbetsplats – och resten erbjuds som tillbehör.

## Se allt du behöver

Kamera med Full HD i både läs-, avstånds- och spegelläge möter alla dina behov och förväntningar. Enheten är även utrustad med en kraftfull optisk zoom och ett flertal bildförbättrande tekniker, vilket ger en skarp och detaljerad bild med naturlig och djup färgåtergivning – oavsett förstöringsnivå.

## Full valfrihet

Anslut din MagniLink PRO till PC, Mac eller Chromebook – eller direkt till en monitor eller en interaktiv whiteboard. Välj det alternativ som passar bäst för stunden och få full valfrihet i ditt användande!

## Spara arbetet på läskameran


Du kan också spara dina bilder med läskameran och spela in föreläsningar och se dem igen – när som helst och var du än befinner dig.

## Ta den med dig

Du fäller enkelt och snabbt upp eller ned din MagniLink PRO och kan på ett smidigt sätt rensa ditt skrivbord innan du går hem för dagen. Den medföljande väskan gör systemet enkelt att transportera. Väljer du dessutom till ett batteri blir du ännu mer flexibel och kan använda systemet upp till 9 timmar utan att behöva ladda enheten.


## Gott om arbetsplats


Med upp till 46 centimeters arbetshöjd kan du bläddra i större böcker och pärmar helt obehindrat under kameran.

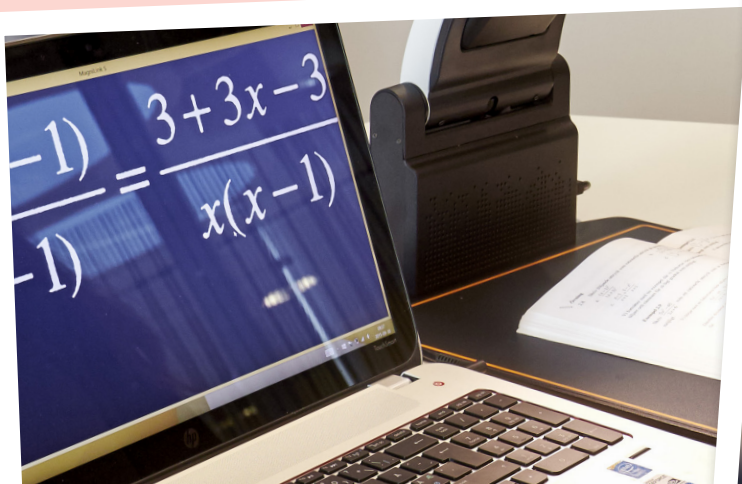

# Det är du som bestämmer

Med den medföljande programvaran styr du läskamerans egenskaper, som förstoringsgrad, artificiella färger och ljusstyrka så att enheten passar just dig och dina behov. Och du kan skräddarsy din MagniLink PRO ytterligare genom att välja till olika praktiska tillbehör för ett smidigare användande.

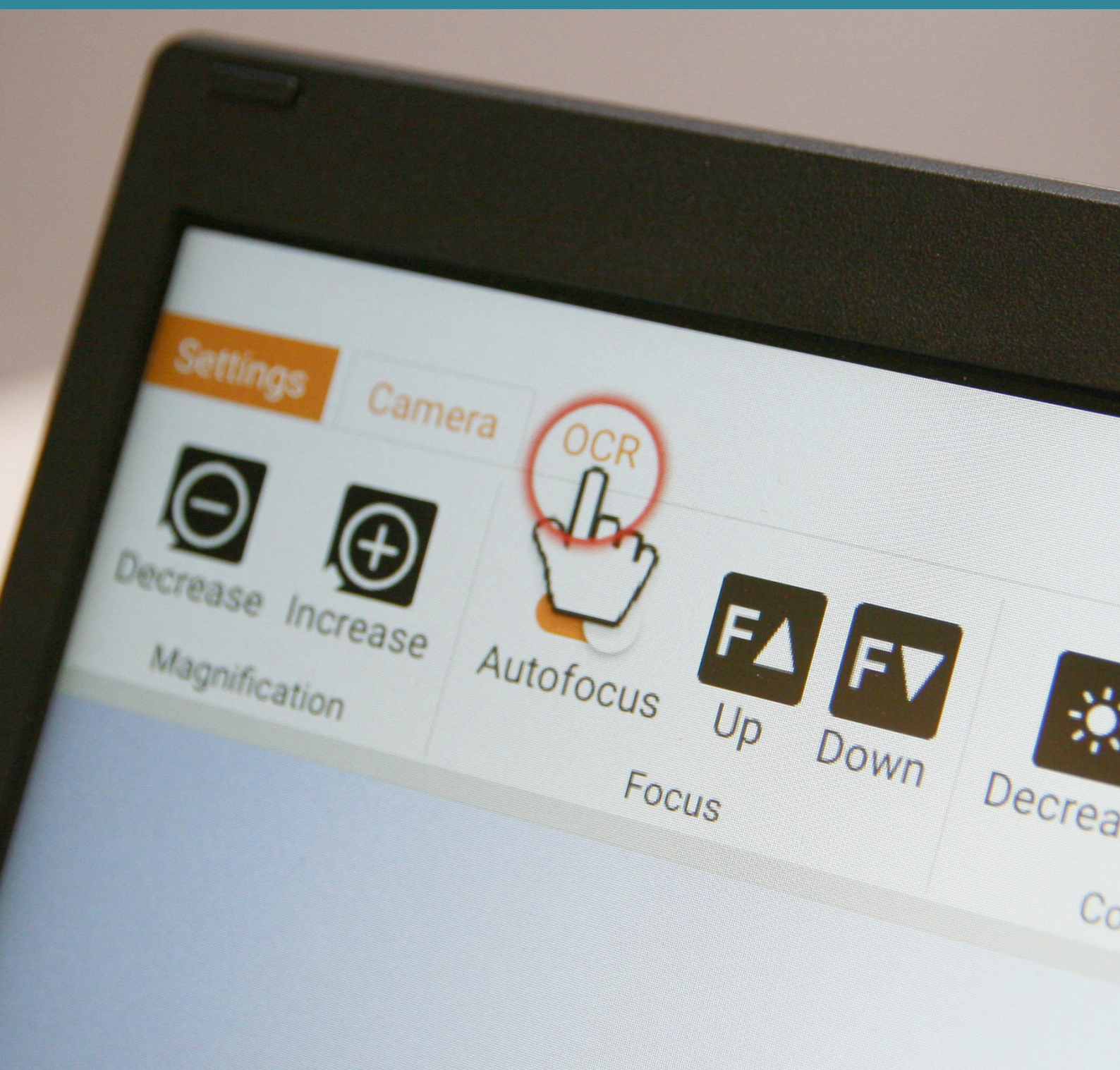

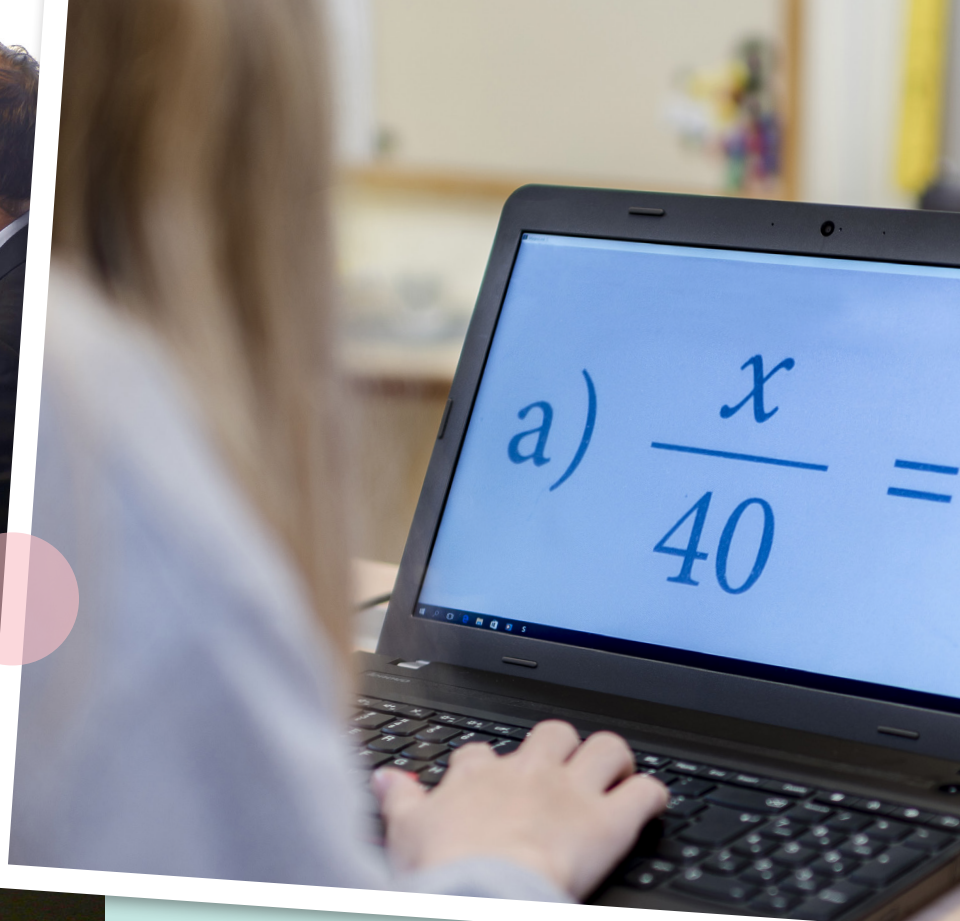

### Lyssna på dina texter

Den medföljande programvaran används för att visa bild från din MagniLink PRO på en PC, Mac eller Chromebook. Som tillval till mjukvaran finns en text-till-tal-funktion, TTS (Text to Speech). Med denna funktion är det möjligt att OCR-behandla en text och få den uppläst. Den OCR-behandlade texten kan visas i flera olika bildvisningslägen samtidigt som texten är synkroniserad med tal.

Det går både att OCR-behandla text från en bild som du tagit med din MagniLink PRO, och att dra in andra dokument i programmet för att få dem OCR-behandlade. Det är också möjligt att klistra in text rakt in i programmet för att få den uppläst.

Att få texten uppläst samtidigt som man läser ger ökad läsförståelse och uthållighet i läsandet.

### Kompatibilitet

Den medföljande programvaran är kompatibel med flera andra förstorande programvaror, som exempelvis ZoomText och SuperNova.





### **Underlätta med ett läsbord**

Välj till det dockningsbara och stabila läsbordet med friktionsbromsar i X/Y-riktning. Läsbordet underlättar vid läsning av framför allt längre texter.

### **Välj en anpassad skärm**

För dig som vill ha en separat skärm har vi utvecklat bildskärmar som är speciellt anpassade för användare med nedsatt syn. De har matt antireflekterande skärm med hög ljusstyrka, skärpa och kontrast.

### **Anslut en extern avståndskamera**

I vissa situationer kan en tvåkameralösning vara det idealiska, och då kan du lätt kombinera din MagniLink PRO med en extern avståndskamera.



## **Tekniska specifikationer**

### **Modell**

MagniLink PRO

### **Anslutningar**

USB 3.0 (typ C), HDMI

### **Kameraupplösning**

FHD: 1920x1080

### **Förstoring**

FHD: 1.1x-70x\* (23" skärm)

### **Fri arbetshöjd**

46 cm

### **Färglägen**

Naturliga färger, 6 artificiella färger (positiva/negativa)

### **Bildlägen**

Läs (vänster/höger), avstånd, spegel

### **Bilduppdatering**

60 digitala helbilder/sekund

### **Batteri** (tillval)

Dritftid: 5-9 h, uppladdningstid: ca 2,5 h

### **Kompatibilitet**

PC: ZoomText 10.X eller senare, Dolphin SuperNova 12 eller senare, iZoom 4

### **Systemkrav**

PC: Windows 7 eller senare

Mac: Mac OS X 10.14, Snow Leopard eller senare

Chromebook: Chrome OS 59 eller senare

### **Dimensioner**

Ihopfälld: 33x47x17 cm

Uppfälld: 33x38x52 cm

### **Vikt**

4,2 kg

\* Minimum och maximum förstoring kan konfigureras i EUC-programvaran

LVI Low Vision International är en av världens ledande tillverkare av synhjälpmedel med uppdrag att göra vardagen enklare för människor med synnedsättning.

Vi är certifierade enligt ISO 14001 & 9001



LVI Low Vision International  
Verkstadsgatan 5  
352 46 Växjö, SWEDEN  
Tel: +46 (0)470 72 77 00  
Fax: +46 (0)470 72 77 25  
E-mail: [info@lvi.se](mailto:info@lvi.se)  
[WWW.LVI.SE](http://WWW.LVI.SE)