

MagniLink Vision Premium



Möjligheternas system!

MagniLink Vision Premium är en avancerad läskamera som förstorar och förstärker text och bild med ett fantastiskt resultat. Systemet är ergonomiskt utformat och fullt modulariserat – varje användare väljer sin egen kombination.





Det är du som bestämmer

MagniLink Vision är ett moduluppbyggt system där du själv väljer vilken kombination av kamera, skärmstorlek och frontpanel som passar just dig.

Du väljer även om du vill ha din MagniLink Vision Premium med HD- eller Full HD-kamera. Systemet kan också utrustas med en text-till-tal-funktion, TTS (Text To Speech), samt datoranslutning och avståndskamera.

Ergonomisk och enkel att använda

Systemet är utvecklat för att ge bästa bild, vara hållbart och användarvänligt. De taktila knapparna eller vreden, beroende på vilken kontrollpanel du valt, är framtagna för att underlätta användandet för dig med synnedsättning. Du ställer enkelt in skärmens höjd och vinkel så att enheten passar just dig och även läsbordet är ergonomiskt utformat. Den mjukt rundade framkanten på läsbordet är bekväm att vila händerna på och bidrar till en idealisk arbetsposition.

Anpassad skärm

Skärmen är speciellt framtagen för dig med nedsatt syn. Den är antireflexbehandlad, har hög kontrast samt naturlig färgåtergivning och hög upplösning.

Lyssna och förhöj upplevelsen!

Tillvalet Text To Speech erbjuder det bästa av två världar – en högpresterande läskamera och läsmaskin med uppläsning av text i en och samma produkt – vilket innebär ökad läshastighet, uthållighet samt en mer avslappnad läsning.

Lyssna och läs samtidigt

Om du väljer en MagniLink Vision Premium TTS är systemet utrustat med inbyggd högtalare samt mjukvara för talfunktion så du kan få dina texter upplästa. Den upplästa texten synkroniseras med texten som du samtidigt kan läsa på skärmen. Du väljer själv hur du vill att texten presenteras, exempelvis ord för ord eller rad för rad. Du kan också välja att luta dig tillbaka och lyssna på hela texten, antingen från högtalaren eller via anslutna hörlurar.

Lätt att använda

För att OCR-behandla en text och få den uppläst använder du den medföljande externa handkontrollen – tryck bara på den orangefärgade knappen och texten omvandlas till tal!

Smarta funktioner

Du kan också välja att läsa upp text från en USB-sticka och enheten kan OCR-behandla dokument även om de hamnat snett under kameran. Den externa handkontrollen har två lägen – enkelt och avancerat, och du byter lätt mellan dessa två lägen.

Observera att tillvalet TTS inte kan väljas till i efterhand utan måste beställas vid köp då högtalaren är fabriksinstallerad.





further

Flexibelt med Split

Tillvalet Split möjliggör växling och delning av skärmbilden mellan läskamera, avståndskamera och dator. Split lämpar sig framför allt i arbets- och skolmiljöer.

Exemplarisk i skolmiljö

I skolmiljö kan en splitlösning med avståndskamera vara till stor hjälp för ökad delaktighet. På så sätt kan eleven i fråga läsa i sin lärobok med hjälp av läskameran, använda sin dator och samtidigt se vad läraren gör framme vid tavlan med den externa avståndskameran.


Användarvänlig kontrollpanel

Kontrollpanelens design med taktila knappar gör splitfunktionen enkel att använda. Med kontrollpanelen når du flera smarta funktioner, som exempelvis enkel

växling mellan olika bilddelningslägen och val av aktiv kamera. Kontrollpanelen har tre programmeringsbara lägen så att du snabbt kan få den motoriserade avståndskameran att inta önskad position och förstoringsgrad. Bilden från den aktiva kameran är tydligt markerad med en orange ram på skärmen.

Optiskt centrum

När du ändrar förstoringsgrad eller delningsförhållande på skärmbilden, bibehålls fokus i bildens optiska centrum, bildens centrum blir därmed aldrig beskuren.

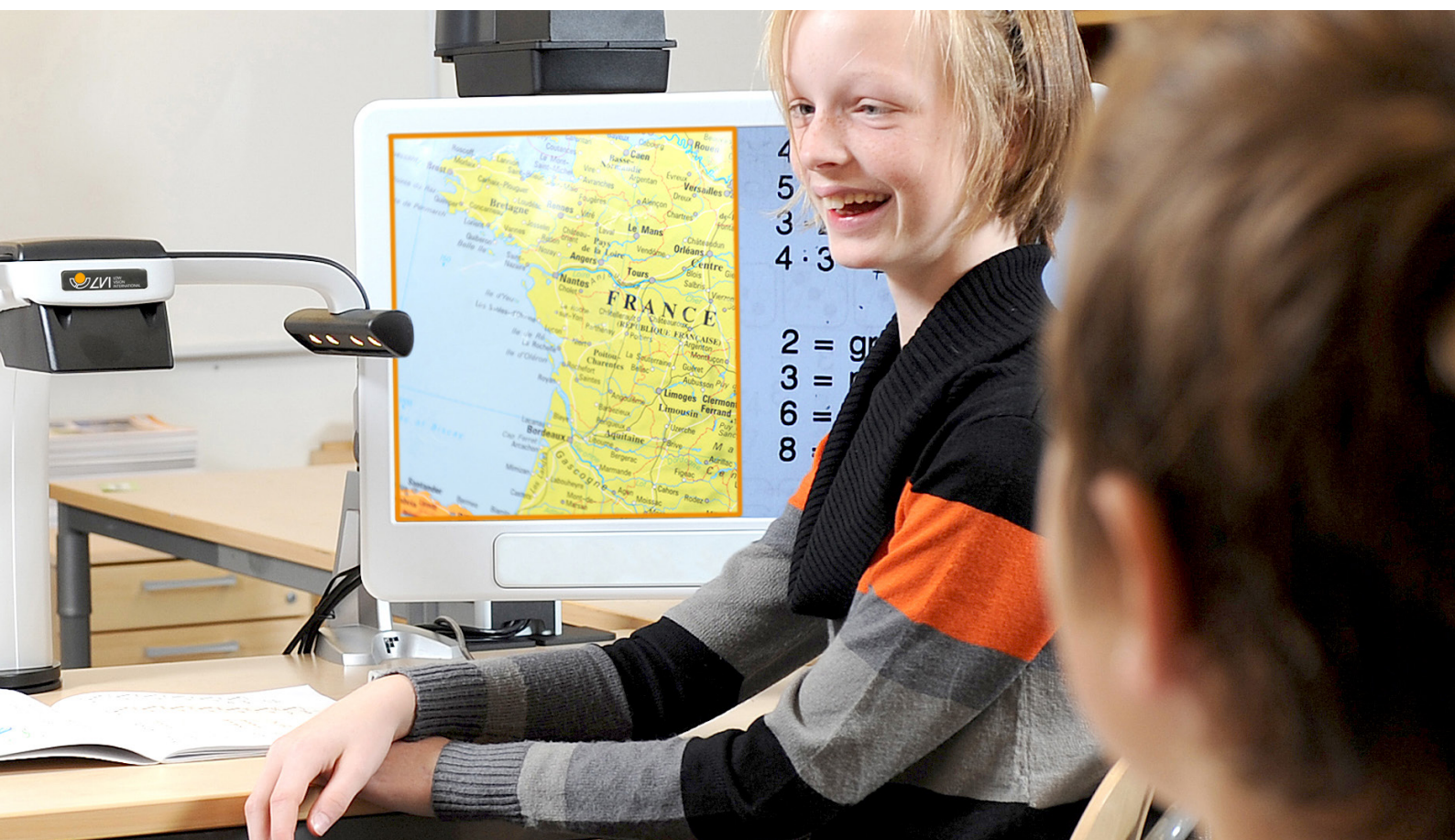



Anpassning på individnivå

EUC (End User Configuration) finns som tillval till din MagniLink Vision Premium. EUC är en mjukvara som gör det möjligt att anpassa systemet till just dina unika behov. Funktioner som inte önskas kan tas bort och färger, typsnitt, referenslinjer, förstöringsnivåer och andra funktioner kan ställas in efter egna önskemål.



Tekniska specifikationer

Modell	MagniLink Vision 18,5"	MagniLink Vision 23"
Kamera	HD: 720p, FHD: 1080p	HD: 720p, FHD: 1080
Upplösning	1 366x768	1920x1 080
Förstoring	HD: 1,7-60x, FHD: 1,5-75x	HD: 2,0-60x, FHD: 1,9-90x
Fri arbetshöjd	11-19,5 cm	11-19,5 cm
Dimensioner, uppfälld	42x47x57 cm (BxDxH)	42x47x57 cm (BxDxH)
Vikt läskamera med läsbord	8 kg	8 kg
Vikt skärm	3,8 kg	5,5 kg
Dimensioner läsbord	42x30 cm	42x30 cm

MagniLink Vision Premium

LVI Low Vision International är en av världens ledande tillverkare av synhjälpmedel med uppdrag att göra vardagen enklare för människor med synnedsättning.

Vi är certifierade enligt ISO 14001 & 9001



LVI Low Vision International
Verkstadsgatan 5
352 46 Växjö, SWEDEN
Tel: +46 (0)470 72 77 00
Fax: +46 (0)470 72 77 25
E-mail: info@lvi.se
WWW.LVI.SE