

MagniLink PRO





Pour tous les professionnels

MagniLink PRO a été conçu pour offrir le système le plus performant à tous les professionnels, quel que soit leur domaine. MagniLink PRO est un système complet intégrant de base la plupart des fonctionnalités souhaitées par les utilisateurs – les autres fonctionnalités étant proposées sous forme d'accessoires pour répondre à tous les besoins.

Voyez tout ce que vous devez voir

La caméra de grande qualité en mode lecture/ à distance/miroir gère tout ce dont vous avez besoin. La résolution FHD, combinée à un puissant zoom optique et à différentes techniques d'amélioration d'image assure une image extrêmement nette et détaillée aux couleurs riches et naturelles à tous les niveaux de grossissement.

Liberté totale de choix

MagniLink PRO peut être connecté à la plupart des ordinateurs PC, Mac ou Chromebook – ou directement sur un moniteur ou un SmartBoard. Choisissez l'option qui vous convient le mieux à l'instant même et obtenez la liberté totale de choix lorsque vous utilisez l'appareil !


Vous pouvez enregistrer vos photos avec la caméra de lecture – ou enregistrer une conférence avec la caméra à distance, pour vous permettre de la visionner ultérieurement.

Prends le avec toi

Il se plie et se déploie facilement, vous permettant de laisser facilement un bureau dégagé en partant. Il est fourni avec un sac facilitant le transport, si vous devez travailler chez vous, par exemple. Ajoutez une batterie pour encore plus de liberté – et vous pourrez l'utiliser jusqu'à 9 heures, où que vous soyez.


Un large espace


Avec jusqu'à 46 centimètres de hauteur de travail, vous pouvez consulter de plus grands livres et dossiers sans aucun problème à l'aide la caméra.

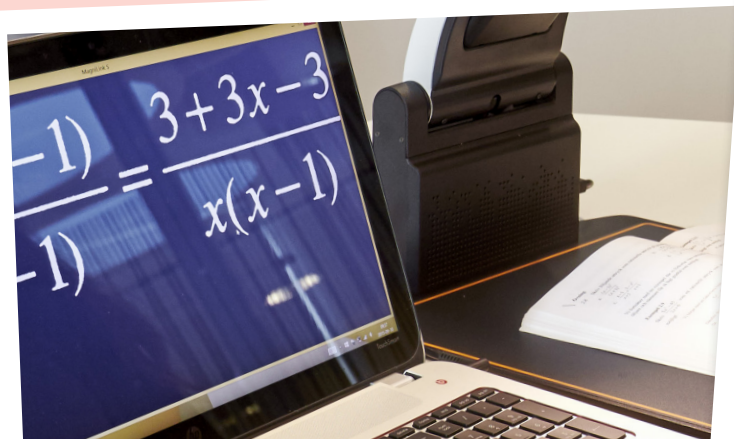

C'est vous qui décidez

Avec le logiciel inclus, vous contrôlez les caractéristiques de la caméra de lecture, telles que le grossissement, les couleurs artificielles et la luminosité, de sorte que votre appareil vous convienne et convienne à vos besoins. Et vous pouvez de plus personnaliser votre MagniLink PRO en choisissant différents accessoires pour une utilisation plus simple.

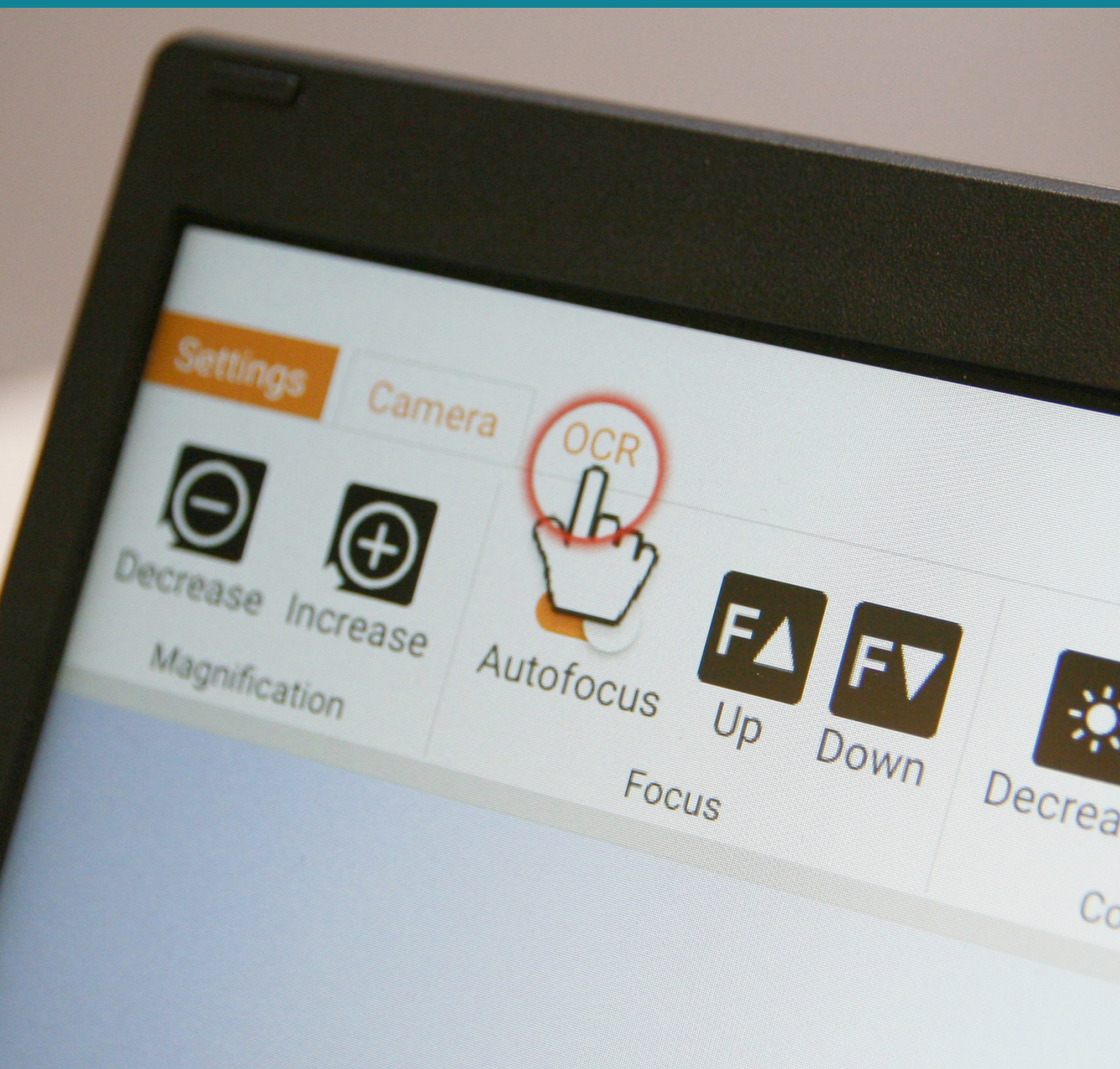

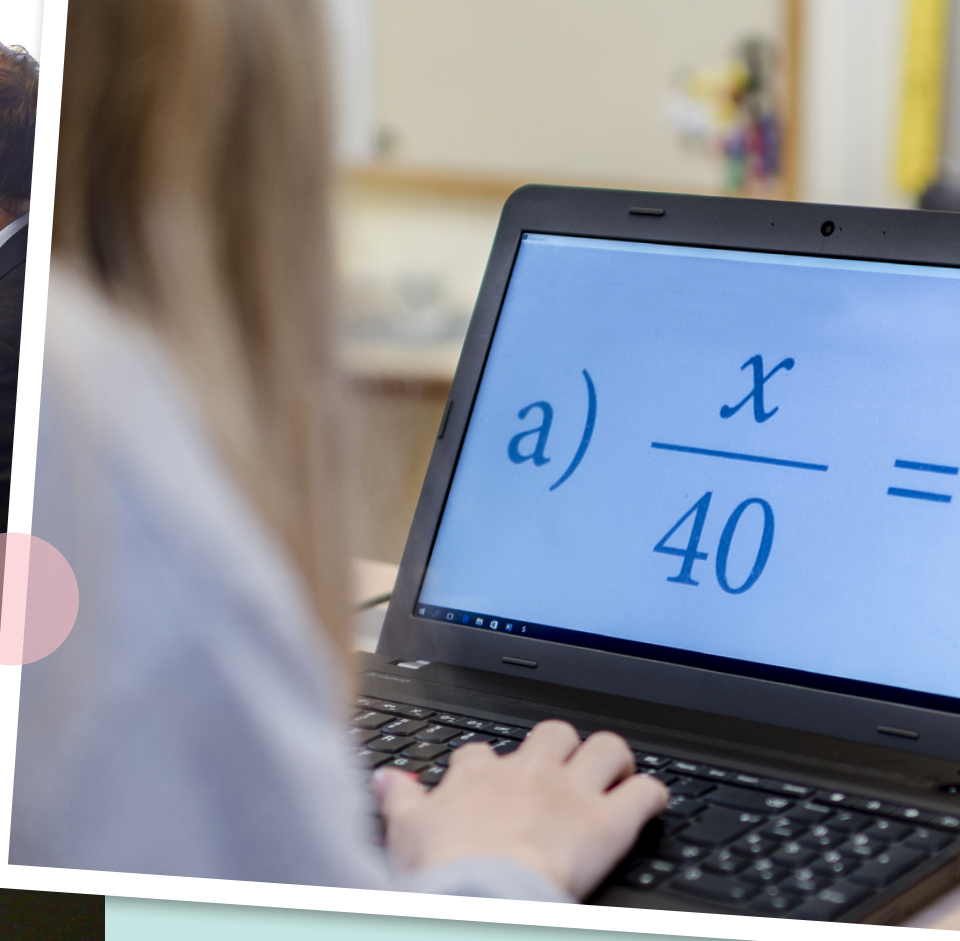

Écoutez votre texte

Le logiciel inclus est utilisé pour afficher l'image de votre MagniLink PRO sur un PC, Mac ou Chromebook. Vous pouvez également choisir la fonction de synthèse vocale (TTS). Grâce à cette fonction, il est possible de traiter un texte et de l'écouter. Le texte traité peut être affiché en plusieurs modes différents, par exemple, mot à mot ou ligne par ligne, et ce, pendant que le texte est lu.

Il est possible de traiter l'image prise avec la caméra MagniLink connectée, et vous pouvez également importer des documents extérieurs pour les traiter. Il est également possible de coller un texte directement dans le programme afin qu'il soit lu.

Pouvoir écouter un texte en même temps que le lire permet d'en améliorer la compréhension et l'endurance à la lecture.

Compatibilité

Le logiciel inclus est compatible avec plusieurs autres logiciels de grossissement, tels que ZoomText et SuperNova.





Pratique table XY connectable

Sélectionnez la table de lecture connectable avec les freins à friction dans la direction X/Y. La table de lecture facilite la lecture de textes particulièrement longs.

Moniteur adapté à la basse vision

Vous pouvez également choisir un écran séparé. Il est doté d'une vitre anti-reflets et procure une netteté et un contraste excellents et ses bords arrondis sont parfaitement assortis à votre MagniLink PRO.

Caméra à distance externe

Dans certaines situations, deux caméras peuvent être idéales. Vous pouvez alors facilement combiner votre MagniLink PRO avec une caméra à distance externe.



Caractéristiques techniques

Modèle

MagniLink PRO

Connexions

USB 3.0 (type C), HDMI

Résolution de la caméra

FHD : 1920 x 1080

Plage d'agrandissement

FHD : 1.1x-75x*

Hauteur de travail dégagée

46 cm

Modes de couleurs

Couleurs naturelles, 6 couleurs artificielles (positives/négatives)

Modes d'affichage

Lecture (gauche/droite), à distance, miroir

Fréquence d'images

60 images/seconde entièrement numériques

Batterie (optionnel)

Autonomie : 5-9 h

Temps de charge : environ 2,5 h

Compatibilité

PC: ZoomText 10.X ou version plus récente

Dolphin SuperNova 12 ou version plus récente

Configuration minimale du système

PC : Windows 7 ou version plus récente

Mac : Mac OS X 10.14 ou version plus récente

Chromebook: Chrome OS 59 ou version plus récente

Dimensions

Replié : 33 x 47 x 17 cm

déployé : 33 x 38 x 52 cm

Poids

4,2 kg

* Le grossissement min / max peut être configuré dans le logiciel EUC

La société LVI Low Vision International est reconnue comme étant l'un des plus grands fabricants d'assistance à la basse vision. Sa mission consiste à faciliter la vie quotidienne des personnes souffrant de déficiences visuelles.

Nous sommes certifiés ISO 14001 & 9001



LVI Low Vision International GmbH

Hinterbrunnenstrasse 1
8312 Winterberg, SUISSE
Tel: 052 202 96 16
E-mail: info@lvi.ch
WWW.LVI.CH



LVI Low Vision International
Verkstadsgratan 5
352 46 Växjö, SWEDEN
Tel: +46 (0)470 72 77 00
Fax: +46 (0)470 72 77 25
E-mail: info@lvi.se
WWW.LVI.SE