

MagniLink Vision Premium



Aussergewöhnlich clever

MagniLink Vision ist ein fortschrittliches Lesegerät. Es vergrössert und verstärkt auf hervorragende Weise Texte und Abbildungen aller Art. Das System ist ergonomisch und vollständig modular aufgebaut, so dass jeder Benutzer alle gewünschten Funktionen und Zubehörteile bedarfsgerecht kombinieren kann.





Sie entscheiden

MagniLink Vision ist ein modulares System, bei dem Sie selbst entscheiden, welche Kombination aus Kamera, Bildschirmgröße und Steuerkonsole für Sie persönlich passt.

Sie bestimmen auch, ob Sie Ihre MagniLink Vision Premium mit HD oder Full HD-Kamera haben möchten. Das System kann zudem mit einer Text-zu-Sprache-Funktion, Text To Speech (TTS), sowie Computeranschluss und Distanzkamera ausgestattet werden.

Ergonomisch und einfach zu bedienen

Das System ist darauf ausgelegt, optimale Bilder wiederzugeben sowie nachhaltig und benutzerfreundlich zu sein. Die taktilen Tasten oder der Drehknopf, je nachdem, für welche Steuerkonsole Sie sich entschieden haben, wurden dafür entwickelt, Menschen mit Sehbehinderung die Nutzung zu erleichtern. Sie können die Höhe und die Neigung des Bildschirms für Sie persönlich genau richtig einstellen, und auch der Lesetisch ist ergonomisch gestaltet. Auf der sanft abgerundeten Vorderkante des Lesetisches lassen sich die Hände angenehm ablegen und er fördert eine ideale Arbeitsposition.

An Sehbehinderung angepasster Monitor

Hochwertiger Monitor von LVI, speziell entwickelt für Sehbehinderte. Er bietet entspiegeltes Glas, exzellente Schärfe und einen ausgezeichneten Kontrast.

Vom Text zur Stimme

Die Text-To-Speech Option bietet das Beste aus zwei Welten – eine hochwertige Lesekamera und eine Vorlesefunktion in ein und demselben Produkt. Sich den Text parallel zum Lesen laut vorlesen zu lassen, sorgt für ein verbessertes Leseverständnis und mehr Ausdauer beim Lesen.

Lassen Sie sich Texte einfach vorlesen

Diese Funktion ermöglicht die OCR-Verarbeitung eines Textes. Das bedeutet, Sie können sich den Text vorlesen lassen und auf diese Weise nicht nur schneller, sondern auch ausdauernder lesen. Sie können sowohl Text aus einem Bild, das Sie mit Ihrer Lesekamera aufgenommen haben, OCR-verarbeiten als auch andere Dokumente in der Software einlesen, um sie OCR-verarbeiten zu lassen.

Zuhören über eingebaute Lautsprecher oder über Kopfhörer.

Einfach zu bedienen

MagniLink Vision Premium TTS ist sehr einfach zu bedienen – Sie brauchen lediglich die orangefarbene Taste zu drücken, dann wird der Text in Sprache umgewandelt!

Hilfreiche Funktionen

Auch Text auf einem USB-Stick können Sie vorlesen lassen und das Gerät kann zudem Dokumente OCR verarbeiten, die versehentlich schräg unter der Kamera liegen. Das externe Steuergerät hat zwei Modi – einfach und fortgeschritten, und Sie können einfach zwischen diesen beiden Modi wechseln.

Das optionale TTS nicht nachträglich hinzugenommen werden kann und beim Kauf mitbestellt werden muss, weil der Lautsprecher werkseitig eingebaut wird.





further

Die flexible Lösung

Die Split Option ermöglicht eine Schaltung und Aufteilung zwischen einer Lesekamera, einer Distanzkamera und einem Computer. Das System ist ergonomisch und für den Einsatz in der Schule oder bei der Arbeit bestens geeignet

Klassische Situation Schule

In der Schule kann eine Teilen-Lösung mit Distanzkamera mehr Mitarbeit fördern. Auf diese Weise kann der betreffende Schüler mit Hilfe der Lesekamera in seinem Lehrbuch lesen, seinen Computer nutzen und zugleich mit der externen Distanzkamera sehen, was der Lehrer vorne an der Tafel macht.


Benutzerfreundliches Bedienfeld

Das Bedienfeld mit seinen taktilen Tasten macht es einfach, die Split-Funktion zu nutzen. Das Bedienfeld bietet Ihnen

weitere praktische Funktionen, wie beispielsweise einfaches Umschalten zwischen den Modi gesplitteter Bildschirm und die Auswahl der aktiven Kamera. Das Bild, das von der aktiven Kamera stammt, ist auf dem Bildschirm klar mit einem orangefarbenen Rahmen gekennzeichnet.

Optisches Zentrum

Wenn Sie den Vergrößerungsgrad oder das Teilungsverhältnis der Bildschirmanzeige ändern, bleibt der Fokus auf das Zentrum des Bildes erhalten. Der Bildmittelpunkt wird somit nie beschnitten.

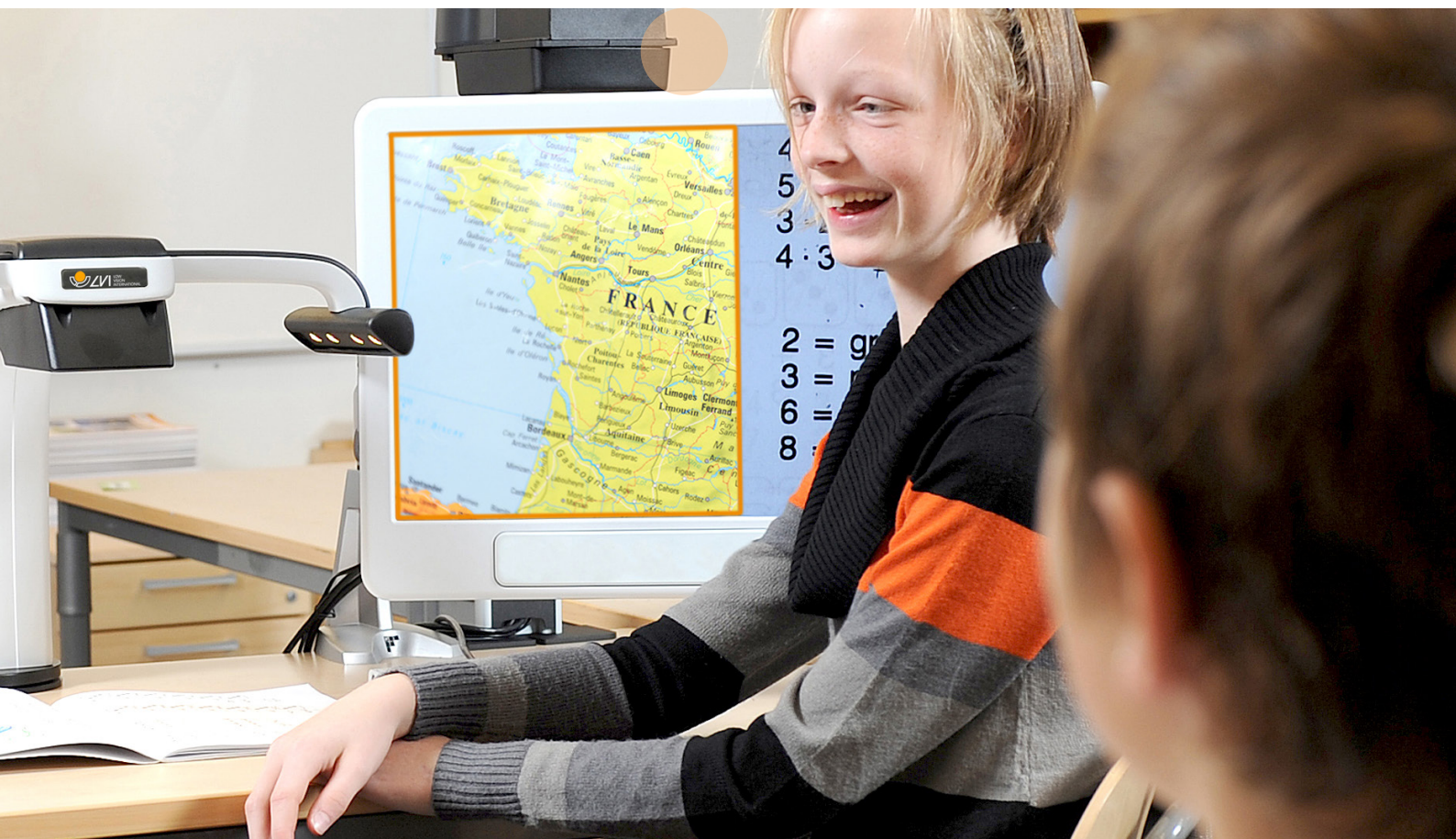



Personalisierung

EUC (End User Configuration) ist als Extra zu Ihrem MagniLink Vision Premium erhältlich. EUC ist eine Software, die die Anpassung des Systems an Ihre persönlichen Anforderungen ermöglicht. Funktionen, die nicht gewünscht sind, können entfernt und Farben, Schrift, Referenzlinien, Zoomfaktor und andere Funktionen können den eigenen Wünschen entsprechend eingestellt werden.



Technische Daten

Modell	MagniLink Vision 18,5"	MagniLink Vision 23"
Kamera	HD: 720p, FHD: 1080p	HD: 720p, FHD: 1080
Kameraauflösung	1366x768	1920x1080
Vergrößerungsbereich	HD: 1,7-60x, FHD: 1,5-75x	HD: 2,0-60x, FHD: 1,9-90x
Freie Arbeitshöhe	11-21 cm	11-21 cm
Abmessungen, aufgeklappt	42x47x57 cm	42x47x57 cm
Gewicht Lesegerät und Tisch	8 kg	8 kg
Gewicht Monitor	3,8 kg	5,5 kg
Grösse des Lesetisches	42x39 cm	42x39 cm

MagniLink Vision Premium

LVI Low Vision International ist als einer der weltweit führenden Hersteller von elektronisch vergrößernden Sehhilfen anerkannt mit der Mission, das tägliche Leben für Menschen mit Sehbehinderung angenehmer zu gestalten.

Wir sind zertifiziert nach ISO 14001 & 9001.



Intertek

LVI Low Vision International GmbH

Hinterbrunnenstrasse 1
8312 Winterberg, SCHWEIZ
Tel: 052 202 96 16
E-mail: info@lvi.ch
WWW.LVI.CH



LVI Low Vision International
Verkstadsgatan 5
352 46 Växjö, SWEDEN
Tel: +46 (0)470 72 77 00
Fax: +46 (0)470 72 77 25
E-mail: info@lvi.se
WWW.LVI.SE