

MagniLink Vision Premium



Extrêmement intelligent !

MagniLink Vision est un téléagrandisseur avancé. Il agrandit et améliore tout texte ou image pour des résultats incroyables. Le système est ergonomique et totalement modulaire – chaque utilisateur peut combiner les fonctionnalités et accessoires de son choix pour répondre au mieux à ses besoins.





C'est vous qui décidez

MagniLink Vision est un système modulaire dont vous choisissez vous-même la combinaison caméra, taille de l'écran et panneau avant qui vous convient.

Vous pouvez également décider si vous voulez MagniLink Vision Premium avec caméra HD ou caméra FHD. Le système peut également être équipé d'une fonction synthèse vocale, Text To Speech (TTS), ainsi que d'une connexion informatique et d'une caméra à distance.

Ergonomique et facile d'utilisation

Le système est conçu pour apporter la meilleure image, être durable et facile d'utilisation. Les boutons tactiles ou le bouton de réglage, selon le panneau de commande que vous avez sélectionné, sont conçus pour faciliter l'utilisation pour les personnes ayant une déficience visuelle. Vous pouvez facilement définir la hauteur et l'angle de l'écran en fonction de votre appareil et même la table de lecture est ergonomiquement conçue. Le bord légèrement arrondi de la table de lecture permet d'y reposer les mains et contribue à une position de travail idéale.

Moniteur adapté à la basse vision

Moniteur de haute qualité pour les malvoyants. Il est doté d'une vitre anti-reflets et procure une netteté et un contraste.

Écoutez votre texte

L'option Text-to-speech offre le meilleur des deux technologies – une caméra de lecture de haute qualité et la fonction Text-to-speech réunies dans un seul et même produit, se traduisant par une vitesse de lecture accrue, un temps de lecture plus long et une lecture plus détendue.

Écoutez et lisez en même temps

Avec MagniLink Vision TTS vous bénéficiez d'un CCTV de haute qualité qui lit également les textes à voix haute. Le texte lu est synchronisé avec le texte agrandi que vous pouvez suivre aisément si vous le souhaitez. Sinon, installez-vous confortablement et laissez MagniLink Vision TTS vous faire la lecture. Vous le trouverez reposant et plaisant. Par ailleurs, le mode de lecture contribue à optimiser votre endurance de la lecture.

Simple à utiliser

Pour traiter un texte et l'écouter, utilisez la boîte de contrôle externe incluse – il suffit d'appuyer sur le bouton orange pour convertir le texte en voix !

Fonctions intelligentes

Vous pouvez également choisir de lire et d'écouter un texte à partir d'une clé USB et l'appareil peut traiter d'autres documents, même s'ils sont placés de travers sous la caméra. La boîte de contrôle externe a deux modes, simple et avancé, et vous pouvez facilement passer de l'un à l'autre. Attention, l'option TTS ne peut pas être ajoutée postérieurement mais doit être choisie lorsque le haut-parleur est installé en usine.





further

Split – une solution flexible

L'option Split offrant une connectivité informatique et un boîtier de répartition. Elle permet d'alternier entre la caméra de lecture, la caméra à distance et l'ordinateur, et de les diviser. Le système est adapté aux environnements scolaires ou professionnels.

Exemple en milieu scolaire

En milieu scolaire, une solution de division avec une caméra à distance peut être très utile pour une participation accrue. Cela permet à l'élève en question de lire son manuel à l'aide de la caméra de lecture, d'utiliser son ordinateur, et en même temps voir ce que l'enseignant fait au niveau du tableau avec la caméra à distance externe.

Panneau de contrôle facile d'utilisation


Le design du panneau de commande avec boutons tactiles rend la fonction

de division de l'écran facile à utiliser.

Le panneau de commande a plusieurs fonctions intelligentes, telles que le passage facile des modes de partage d'images à la sélection de la caméra active. L'image provenant de la caméra active est clairement marquée d'un cadre orange à l'écran.

Centre optique

Lorsque vous modifiez le degré de grossissement et les conditions de partage de l'écran, la mise au point dans le centre optique de l'image reste la même.

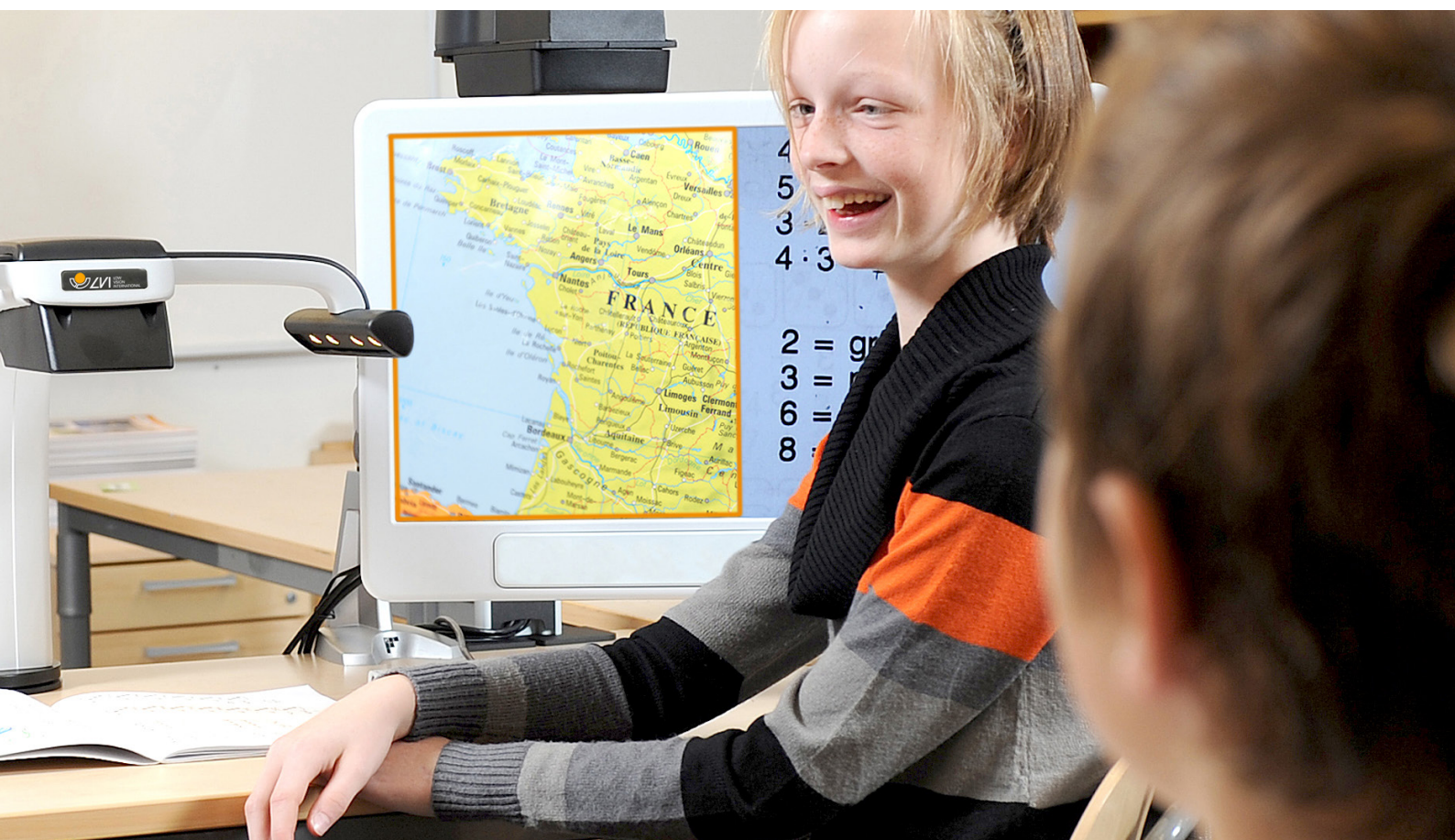



EUC – adaptable au cas par cas

Le logiciel EUC (End User Configuration) offre la possibilité de régler le système pour répondre aux besoins de chaque utilisateur. Les fonctions non essentielles peuvent être supprimées, et les couleurs, la police de caractères, etc. peuvent être personnalisées selon les goûts de chaque utilisateur, ce qui rend le système flexible et compatible dans toute une série de situations.



Caractéristiques techniques

Modèle	MagniLink Vision 18,5"	MagniLink Vision 23"
Caméra	HD : 720p, FHD : 1080p	HD : 720p, FHD : 1080
Résolution de la caméra	1366x768	1920x1080
Grossissement	HD : 1,7-60x, FHD : 1,5-75x	HD : 2,0-60x, FHD : 1,9-90x
Hauteur de travail dégagée	11-21 cm	11-21 cm
Dimensions	42x47x57 cm (BxDxH)	42x47x57 cm (BxDxH)
Poids caméra de lecture + table	8 kg	8 kg
Poids moniteur	3,8 kg	5,5 kg
Dimensions table	42x39 cm	42x39 cm

MagniLink Vision Premium

La société LVI Low Vision International est reconnue comme étant l'un des plus grands fabricants d'assistance à la basse vision. Sa mission consiste à faciliter la vie quotidienne des personnes souffrant de déficiences visuelles.

Nous sommes certifiés ISO 14001 & 9001



LVI Low Vision International GmbH

Hinterbrunnenstrasse 1
8312 Winterberg, SUISSE
Tel: 052 202 96 16
E-mail: info@lvi.ch
WWW.LVI.CH



LVI Low Vision International

Verkstadsgratan 5
352 46 Växjö, SWEDEN
Tel: +46 (0)470 72 77 00
Fax: +46 (0)470 72 77 25
E-mail: info@lvi.se
WWW.LVI.SE