

MagniLink Zip Premium

Portabel och mångsidig!

Portabla MagniLink Zip utmärker sig med sin enastående bildkvalitet och enkelhet. Samtidigt erbjuder den alla egenskaper och funktioner som finns i en avancerad läskamera.

Liten och lätt

MagniLink Zip är enkel att fälla upp och ned och kan smidigt stivas undan då den inte används. Väljer du dessutom till ett batteri blir enheten en mycket smidig reskamrat.

Användarvänlig och ergonomisk

Den integrerade kontrollpanelen med taktila knappar och vred är mycket enkel att använda. Förutom standardläget finns ett avancerat läge för dem som önskar fler funktioner. Du växlar enkelt mellan dessa två lägen med hjälp av kontrollpanelen.


När du fällt upp din enhet kan du ställa in skärmen i den höjd och vinkel som passar just dig bäst. Ha gärna skärmen i ett läge så att du tittar på den i en 20-gradig vinkel nedåt. På så sätt sitter du mer ergonomiskt, vilket är skonsammare för nacke och axlar.

Din MagniLink Zip levereras i en praktisk väska som underlättar vid transport. Väskan har orangefärgade detaljer så att du lättare hittar exempelvis dragkedjor och fack.


Inbyggd avståndskamera

Läskameran kan enkelt fällas upp – och vips har du en avståndskamera! Avståndskameran passar perfekt i exempelvis skolmiljö då eleven behöver följa med och se vad som händer framme vid tavlan. Du kan justera avståndskameran både horisontellt och vertikalt. Med avståndskameran får du också tillgång till en spegelfunktion som kan vara lämplig om du exempelvis ska lägga makeup eller trimma skägget.

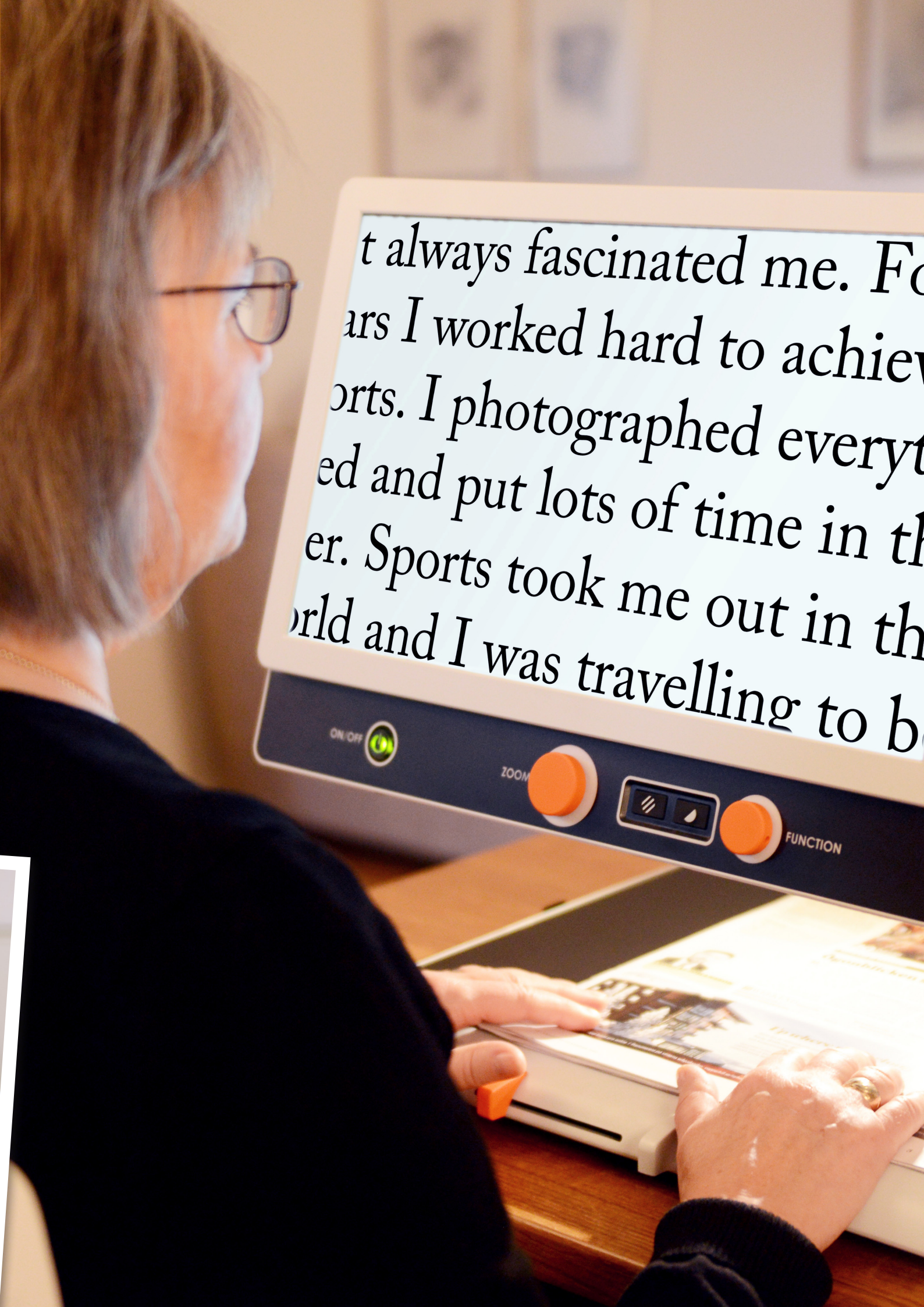

A woman with short grey hair and glasses is seen from the side, looking at a large electronic display. The display shows a paragraph of text in a serif font. Below the screen is a control panel with a green power button, a zoom knob, a small control panel with two buttons, and a function knob. The woman's hands are visible at the bottom, resting on a book or document that is part of the display's input.

t always fascinated me. For
ars I worked hard to achieve
orts. I photographed everyt
ed and put lots of time in th
er. Sports took me out in th
orld and I was travelling to b

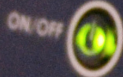


ZOOM



FUNCTION

Anpassa efter just dina behov!

MagniLink Zip går att anpassa efter varje användares unika behov. Den fungerar lika bra på arbetet och i skolan som hemma. Enheten är en stor hjälp när du exempelvis vill läsa olika dokument, se tavlan i klassrummet, lösa korsord, handarbete eller lyssna på texter.

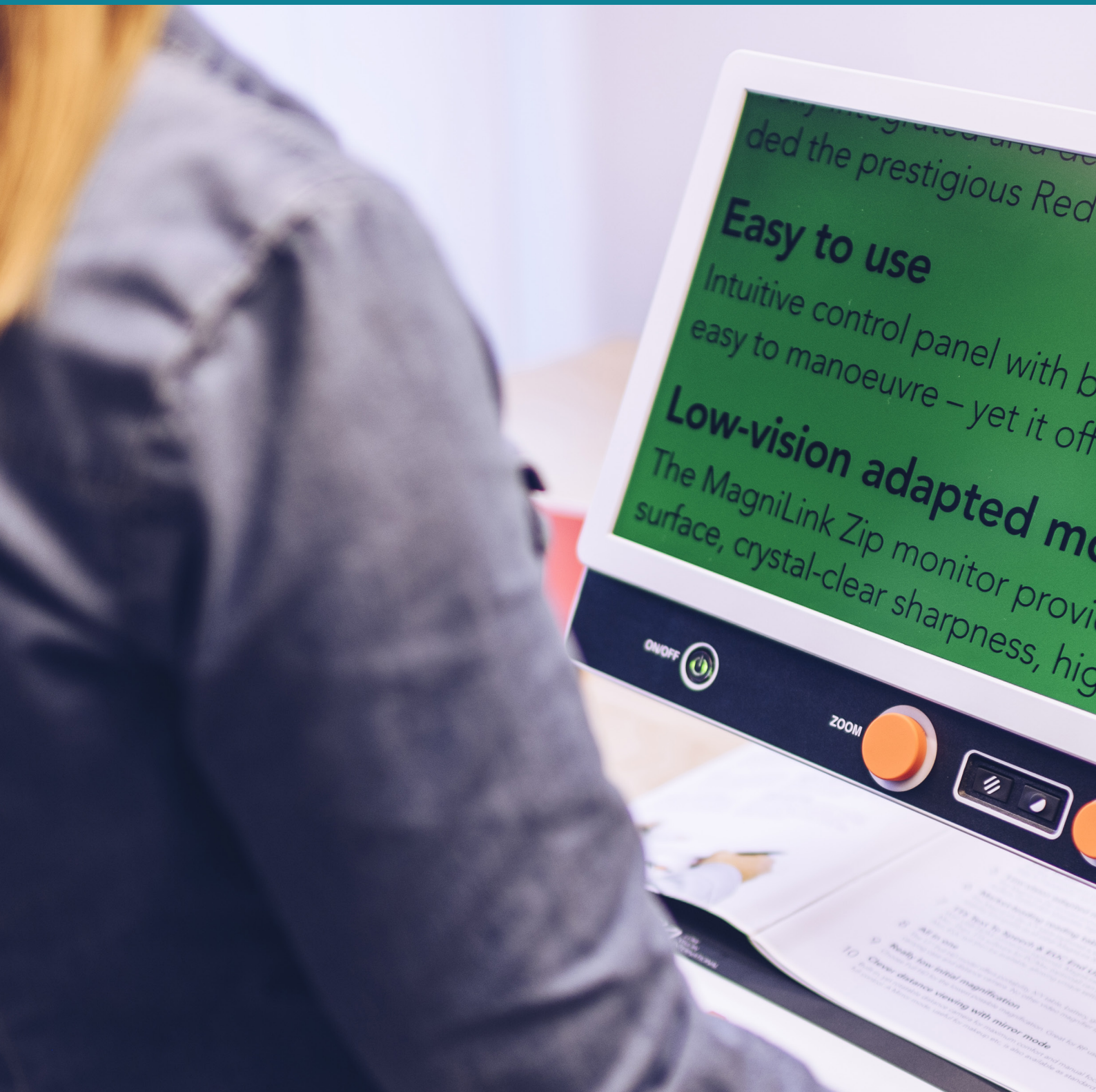



VÄLJ KAMERA I
HD ELLER FULL HD

VÄLJ STORLEK
PÅ SKÄRM

VÄLJ MED ELLER UTAN
INTEGRERAT LÄSBORD



Utmärkt bildkvalitet

Du väljer mellan HD- eller Full HD-kamera. HD-kameran ger en riktigt bra bild och fungerar för de flesta ändamål du kan tänka dig. Väljer du en Full HD-kamera blir bilden ännu skarpare och är exempelvis det idealiska valet för dig med RP, då den ger bästa kontrast och mycket låg initialförstoring.

Anpassad skärm

Det finns två skärmstorlekar att välja mellan. Den mindre skärmen på 13" passar dig som behöver transportera eller byta plats på enheten ofta. Är du däremot ute efter ett system som är mer åt det stationära hållet är skärmen på 17" med ett integrerat läsbord det självklara valet. Skärmarna har antireflexbehandlad yta och ger en skarp bild med hög kontrast.

Bekvämt läsbord

Det integrerade läsbordet är stabilt men samtidigt tunt och har friktionsbromsar i båda riktningarna. Bordet underlättar då du flyttar dokument vid läsning, speciellt vid hög förstoring. Det integrerade läsbordet är fabriksinstallerat och väljs i samband med köp och kan inte väljas till i efterhand.

Väljer du en enhet utan integrerat läsbord kan du välja till det mindre separata läsbordet MLRT-XY som också har friktionsbromsar. Detta bord kan köpas till i efterhand.

Datorkoppling

Med tillvalet USB/HDMI-anslutning blir det möjligt att ansluta din MagniLink Zip till en dator (PC/Mac/Chromebook). Då visas bilden på din datorskärm istället för på läskamerans integrerade skärm. En av fördelarna med datoranslutning är att du nu kan välja till en text-till-tal-funktion, TTS (Text To Speech) och få texten uppläst. Att lyssna på texten samtidigt som du läser ger ökad läsförståelse och uthållighet i läsandet.

Välj till ett batteri

Är tanken att byta plats på din MagniLink Zip ofta, eller kanske använda den under resa kan det vara smart att välja till ett batteri. På så sätt blir du mer mobil och flexibel i ditt användande – perfekt för dig som är i farten!

Berättelser från vardagen

Läs gärna våra kunreferenser på lvi.se där ett par användare berättar hur de använder sin MagniLink Zip i sin vardag!





Tekniska specifikationer

Modell	MagniLink Zip 13"	MagniLink Zip 17"
Kamera	HD: 720p, FHD: 1080p	HD: 720p, FHD: 1080
Upplösning	1600x900	1920x1080
Förstoring	HD: 1,3-35x, FHD: 1,1-35x	HD: 1,7-45x, FHD: 1,4-45x
Batteri, drifttid	Upp till 5 h	Upp till 4,5 h
Batteri, uppladdning	ca 2,5 h	ca 2,5 h
Dimensioner, ihopfälld	33x45x9 cm	44x47x12 cm
Dimensioner, uppfälld	33x45x51 cm	44x47x56 cm
Vikt	från 4,4 kg	från 5,1 kg
Strömkälla	Batteri eller AC	Batteri eller AC

MagniLink Zip Premium

LVI Low Vision International är en av världens ledande tillverkare av synhjälpmedel med uppdrag att göra vardagen enklare för människor med synnedsättning.

Vi är certifierade enligt ISO 14001 & 9001



LVI Low Vision International
Verkstadsgatan 5
352 46 Växjö, SWEDEN
Tel: +46 (0)470 72 77 00
Fax: +46 (0)470 72 77 25
E-mail: info@lvi.se
WWW.LVI.SE