

MagniLink Zip Premium

Portable et polyvalent !

Portable MagniLink Zip se distingue de par sa qualité d'image exceptionnelle et sa simplicité. Ces qualités ont été optimisées et ce téléagrandisseur s'est, en outre, enrichi de nouvelles fonctionnalités.

Petit et léger

MagniLink Zip est facile à déplier et replier et peut être simplement rangé lorsque vous ne vous en servez pas. En choisissant également une batterie, l'appareil devient un compagnon de voyage très pratique.

Ergonomique et facile d'utilisation

Le panneau de commande intégré, avec boutons tactiles et bouton de réglage, est très facile d'utilisation. En plus du mode par défaut, il existe un mode avancé pour ceux qui souhaitent plus de fonctions. Vous pouvez facilement passer d'un mode à l'autre à l'aide du panneau de commande.

Une fois que vous ouvrez votre appareil, vous pouvez adapter la hauteur et l'angle de l'écran dans la position qui vous convient le mieux. N'hésitez pas à choisir un mode d'écran vous permettant de le voir avec un angle de 20 degrés vers le bas. De cette façon, vous êtes dans une position plus ergonomique, ce qui est moins douloureux pour le cou et les épaules.


Le Zip MagniLink est livré dans un sac pratique qui en facilite le transport. Le sac a des détails de couleur orange de sorte que vous pouvez par exemple trouver plus facilement les fermetures éclair et les compartiments.

Caméra à distance intégrée

La caméra de lecture peut facilement se transformer en caméra à distance ! La caméra à distance convient parfaitement, par exemple, en milieu scolaire où l'élève a besoin de voir ce qui se passe au niveau du tableau. Vous pouvez ajuster la caméra à distance horizontalement et verticalement. La caméra à distance vous donne également accès à une fonction miroir qui peut être appropriée si, par exemple, vous devez vous maquiller ou tailler votre barbe.



t always fascinated me. For
ars I worked hard to achieve
orts. I photographed everyt
ed and put lots of time in th
er. Sports took me out in th
orld and I was travelling to b

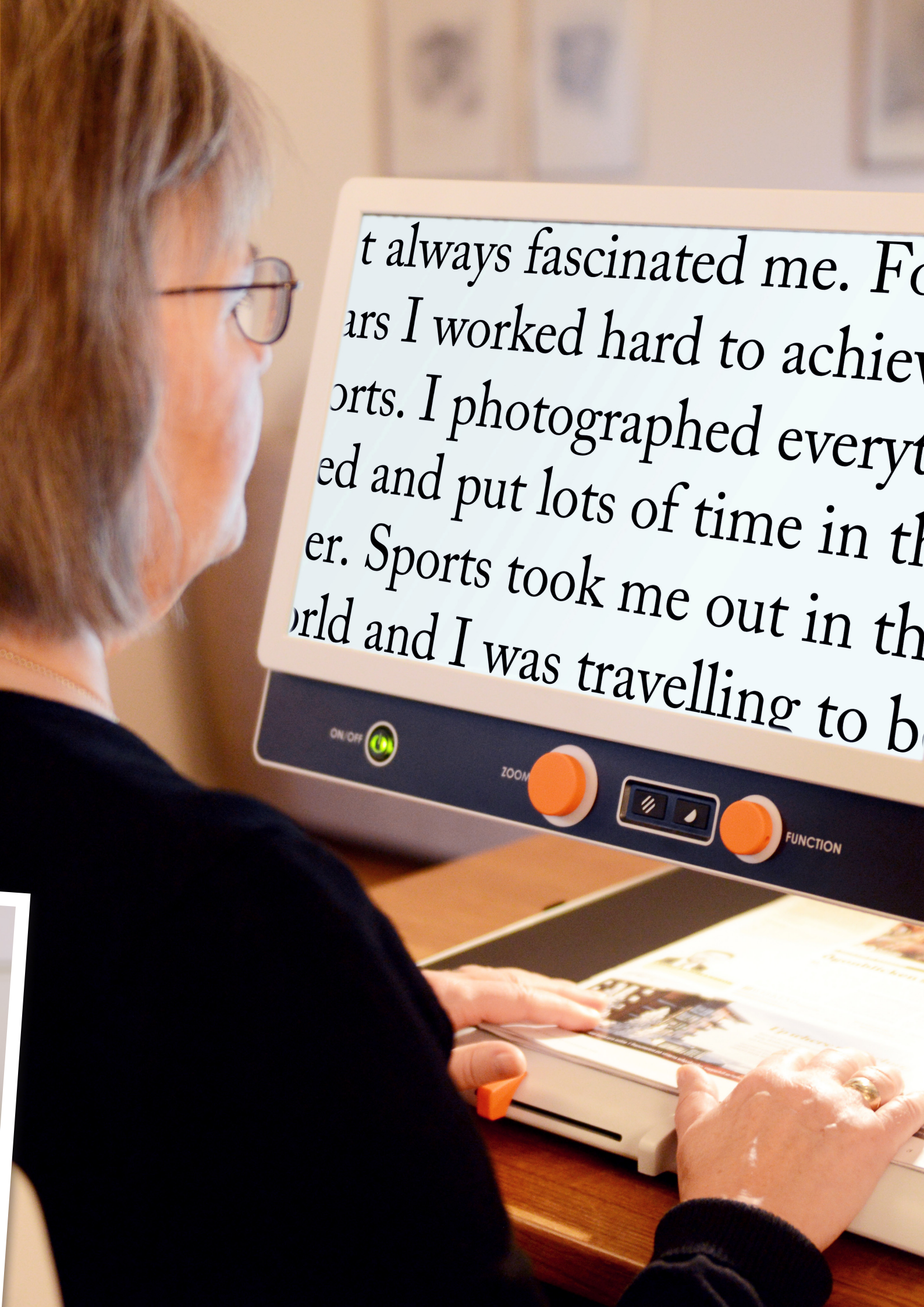

Adaptez l'appareil à vos besoins

MagniLink Zip peut être adapté aux besoins uniques de chaque utilisateur. Il fonctionne à diverses fins au travail, à l'école et à la maison. L'appareil est d'une grande aide lorsque, par exemple, vous voulez lire différents documents, voir le tableau, faire des mots croisés, faire des travaux manuels, ou écouter des textes.





CHOISISSEZ UNE
CAMERA HD OU FHD

SÉLECTIONNEZ
LA TAILLE DE L'ÉCRAN

CHOISISSEZ AVEC OU
SANS TABLE DE LECTURE
INTÉGRÉE



Excellente qualité d'image

Vous choisissez entre une caméra HD ou une caméra FHD. La caméra HD fournit une très bonne image et fonctionne pour la plupart des tâches auxquelles vous pouvez penser. Si vous choisissez une caméra FHD, l'image devient encore plus nette et est le choix idéal pour les personnes avec RP, car elle apporte le meilleur contraste et a un grossissement initial très faible.

Moniteur adapté aux malvoyants

Vous pouvez choisir entre deux tailles d'écran. Le plus petit écran de 13" convient à ceux et celles qui ont besoin de transporter l'appareil ou de le déplacer fréquemment. Cependant, si vous êtes à la recherche d'un système stationnaire, l'écran de 17" avec une table de lecture intégrée est idéal. Les écrans ont une surface anti-éblouissement et fournissent une image nette avec un contraste élevé.

Table de lecture confortable

La table de lecture intégrée est stable et en même temps mince, et a des freins de frottement dans les deux directions. La table facilite le déplacement des documents lors de la lecture, en particulier avec un grossissement élevé. La table de lecture intégrée est installée en usine et peut être sélectionnée lors de l'achat et ne peut pas être sélectionnée ultérieurement.



Connexion informatique

Avec l'option connexion USB/HDMI, il sera possible de connecter votre Zip MagniLink à un ordinateur (PC/Mac/Chromebook). L'image apparaîtra alors sur votre écran d'ordinateur au lieu de l'écran intégré de la caméra de lecture. Un des avantages de la connexion informatique est que vous pouvez maintenant choisir une fonction de synthèse vocale (TTS) et écouter le texte. Att lyssna på texten samtidigt som du läser ger ökad läsförståelse och uthållighet i läsandet.

Choisissez une batterie

Si vous avez l'intention de changer déplacer souvent votre MagniLink Zip ou, peut-être, d'utiliser l'appareil lors d'un voyage, il peut être intelligent de choisir une batterie. Cela rend votre utilisation plus mobile et flexible – parfait pour les personnes en déplacement !





Caractéristiques techniques

Modèle	MagniLink Zip 13"	MagniLink Zip 17"
Caméra	HD : 720p, FHD : 1080p	HD : 720p, FHD : 1080
Résolution de la caméra	1600x900	1920x1 080
Grossissement	HD : 1,3-35x, FHD : 1,1-35x	HD : 1,7-45x, FHD : 1,4-45x
Dimensions		
Repliée :	33x45x9 cm	44x47x12 cm
Dépliée :	33x45x51 cm	44x47x56 cm
Poids	à partir de 4,4 kg	à partir de 5,1 kg
Batterie (option)		
Utilisation :	5 heures	4,5 heures
Temps de charge :	2,5 heures	2,5 heures
Source d'énergie	Batterie ou courant alternatif	Batterie ou courant alternatif

MagniLink Zip Premium

La société LVI Low Vision International est reconnue comme étant l'un des plus grands fabricants d'assistance à la basse vision. Sa mission consiste à faciliter la vie quotidienne des personnes souffrant de déficiences visuelles.

Nous sommes certifiés ISO 14001 & 9001



LVI Low Vision International
39, avenue Pierre 1^{er} de Serbie
75008 Paris, FRANCE
E-mail : order@lvifrance.com
WWW.LVIFRANCE.COM



LVI Low Vision International
Verkstadsgratan 5
352 46 Växjö, SWEDEN
Tel: +46 (0)470 72 77 00
Fax: +46 (0)470 72 77 25
E-mail: info@lvi.se
WWW.LVI.SE