

MagniLink Zip Premium

Tragbar und vielseitig

Das tragbare MagniLink Zip zeichnet sich durch hervorragende Bildqualität und Einfachheit aus. Im Gegensatz zu vielen anderen klappbaren Lesegeräten, ist MagniLink Zip ein echtes Bildschirm-Lesegerät – mit allen Vorteilen.

Klein und leicht

MagniLink Zip lässt sich leicht auf- bzw. zusammenklappen und praktisch wegräumen, wenn es nicht genutzt wird. Wenn Sie noch einen Akku hinzuwählen, wird aus dem Gerät ein handlicher Reisegefährte.

Einfach zu bedienen

Das integrierte Bedienfeld mit taktilen Tasten und Drehknopf ist sehr leicht zu bedienen. Neben der Standardfunktion gibt es einen fortgeschrittenen Modus für diejenige, die sich mehr Funktionen wünschen. Anhand des Bedienfelds schalten Sie einfach zwischen diesen beiden Modi um.


Wenn Sie Ihr Gerät aufklappen, können Sie den Bildschirm in der Höhe und dem Neigungswinkel einstellen, der für Sie am besten passt. Sie sollten den Bildschirm so einstellen, dass Sie in einem 20-Grad-Winkel nach unten schauen. Auf diese Weise sitzen Sie ergonomischer, das ist schonender für Nacken und Schultern.

Ihr MagniLink Zip wird in einer praktischen Tasche geliefert, die den Transport erleichtert. Die Tasche hat orangefarbene Details, damit Sie z. B. Reißverschlüsse und Fächer einfacher finden.


Eingebaute Distanzkamera

Die Lesekamera lässt sich leicht aufklappen – und im Nu haben Sie eine Distanzkamera! Die Distanzkamera ist zum Beispiel ideal für die Schule, wenn der Schüler mitverfolgen und sehen muss, was vorne an der Tafel geschieht. Sie können die Distanzkamera horizontal und vertikal verstellen. Mit der Distanzkamera erhalten Sie auch Zugriff auf eine Spiegelfunktion, die hilfreich ist, wenn Sie beispielsweise Makeup auflegen oder sich den Bart trimmen möchten.

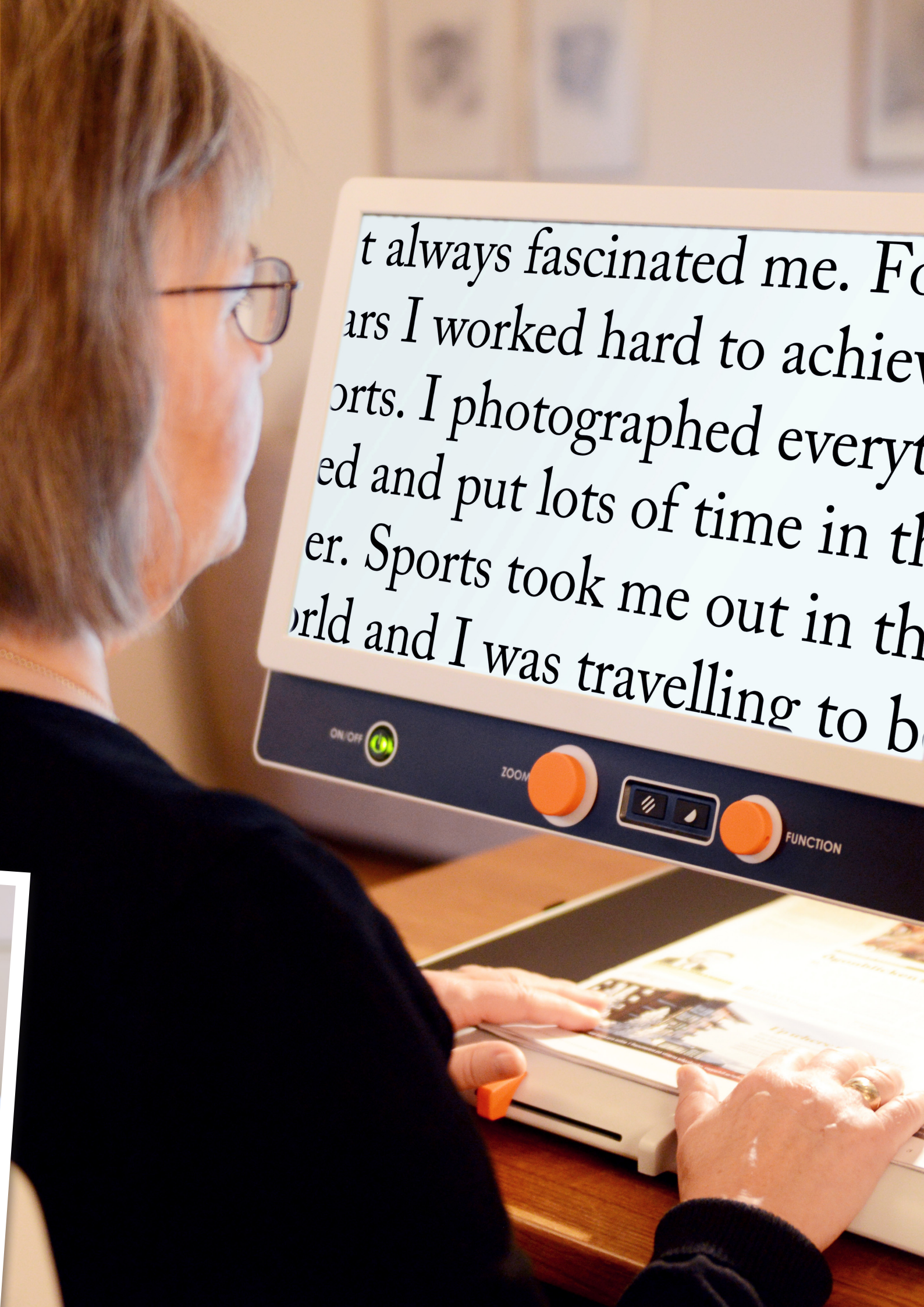

A woman with short grey hair and glasses is seen from the side, looking at a large electronic display. The display shows a paragraph of text in a serif font. Below the screen is a control panel with a green power button, a zoom knob, a small control panel with two buttons, and a function knob. The woman's hands are visible at the bottom, resting on a book or document that is part of the device's interface.

t always fascinated me. For
ars I worked hard to achieve
orts. I photographed everyt
ed and put lots of time in th
er. Sports took me out in th
orld and I was travelling to b

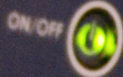


ZOOM



FUNCTION

Eigenschaften und Vorteile

MagniLink Zip lässt sich auf die individuellen Anforderungen eines jeden Benutzers einstellen. Das Gerät ist eine grosse Hilfe, wenn Sie beispielsweise verschiedene Dokumente lesen, die Tafel im Klassenzimmer sehen, Kreuzworträtsel lösen, Handarbeiten oder sich Texte anhören möchten.

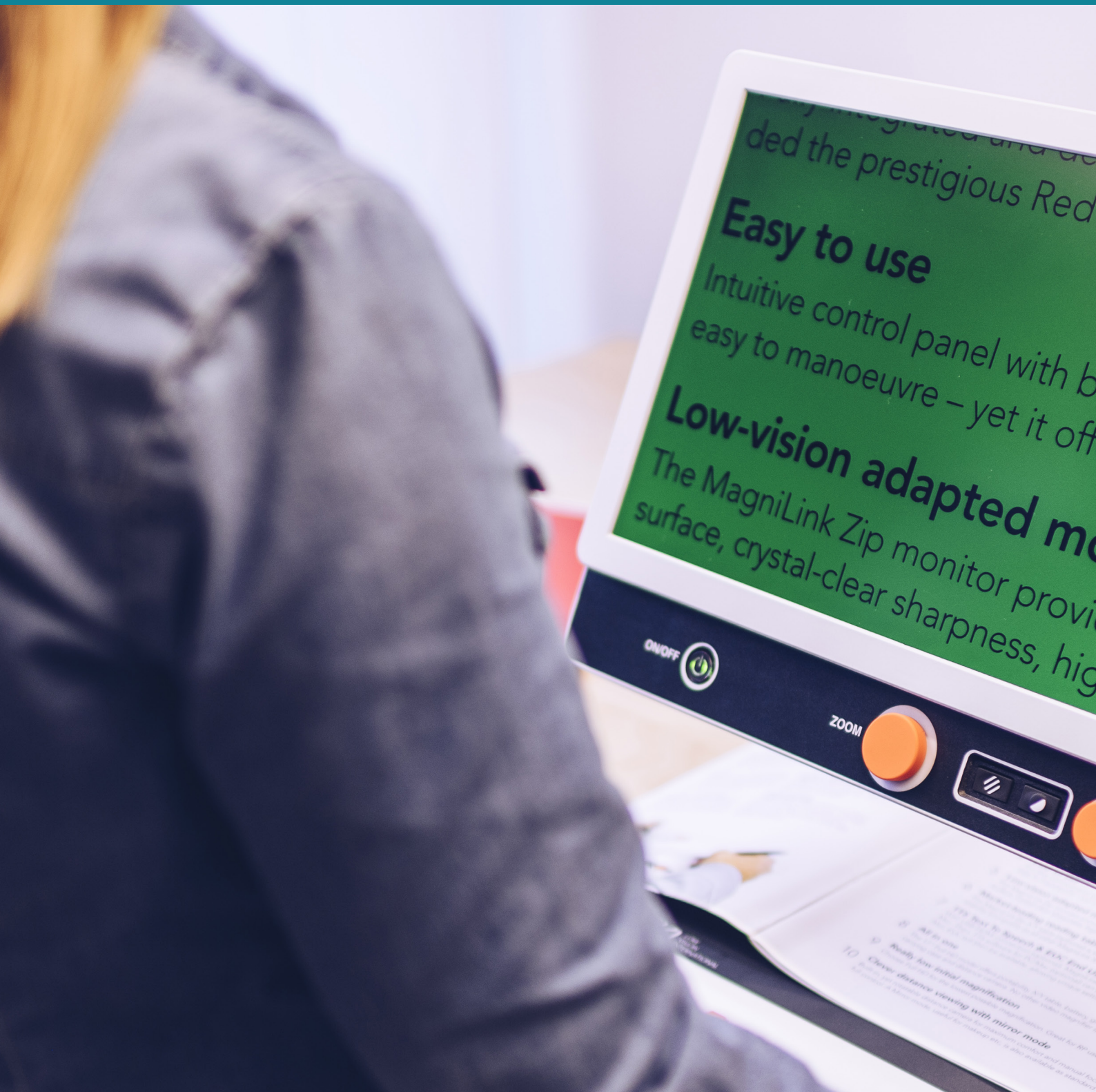



WÄHLEN SIE DIE
KAMERA IN HD
ODER FULL HD

WÄHLEN SIE DIE
GRÖSSE DES BILDSCHIRMS

WÄHLEN SIE OB
MIT ODER OHNE
INTEGRIERTEN
LESETISCH



Ausgezeichnete Bildqualität

Sie wählen zwischen HD- oder Full HD-Kamera. Die HD-Kamera liefert ein sehr gutes Bild und eignet sich für die meisten erdenklichen Zwecke. Wenn Sie die Full HD-Kamera wählen, wird das Bild noch schärfer und ist beispielsweise die perfekte Wahl für alle mit RP, weil sie den besten Kontrast und eine sehr geringe Anfangsvergrößerung liefert.

Es stehen zwei Bildschirmgrößen zur Auswahl. Der kleinere Bildschirm mit 13" eignet sich für diejenigen, die das Gerät häufig transportieren oder umstellen müssen. Wenn Sie hingegen ein System für einen eher festen Standort suchen, ist der 17"-Bildschirm mit integriertem Lesetisch eine selbstverständliche Entscheidung. Die Bildschirme haben eine entspiegelte Oberfläche und liefern ein scharfes Bild mit hohem Kontrast.

Bequemer Lesetisch

Der integrierte Lesetisch ist stabil und dennoch dünn und er hat Reibungsbremsen in beide Richtungen. Der Tisch vereinfacht das Verschieben von Dokumenten beim Lesen, insbesondere bei hoher Auflösung. Der integrierte Lesetisch ist ab Werk eingebaut und muss beim Kauf hinzugewählt werden. Ein nachträglicher Kauf ist nicht möglich.

Wenn Sie ein Gerät ohne integrierten Lesetisch wählen, können Sie den kleineren, separaten Lesetisch MLRT-XY hinzunehmen, der ebenfalls Reibungsbremsen hat. Dieser Tisch kann nachträglich gekauft werden.

Computeranschluss

Das Extra USB/HDMI-Anschluss ermöglicht es, Ihre MagniLink Zip an einen Computer anzuschliessen. Dann wird das Bild auf Ihrem Computerbildschirm anstatt auf dem integrierten Bildschirm der Lesekamera angezeigt. Der Anschluss an den Computer hat unter anderem den Vorteil, dass Sie eine Text-zu-Sprache-Funktion TTS (Text To Speech) wählen und den Text so vorlesen lassen können.

Wählen Sie einen Akku hinzu

Wenn Sie vorhaben, die MagniLink Zip häufig irgendwohin mitzunehmen, oder sie vielleicht auf Reisen zu nutzen, kann es nützlich sein, einen Akku hinzu zu wählen. Auf diese Weise werden Sie bei Ihrer Nutzung mobil und flexibler – ideal für alle, die unterwegs sind!





Technische Daten

Modell	MagniLink Zip 13"	MagniLink Zip 17"
Kamera	HD: 720p, FHD: 1080p	HD: 720p, FHD: 1080p
Kameraauflösung	1600x900	1920x1080
Vergrößerungsbereich	HD: 1,3-35x, FHD: 1,1-35x	HD: 1,7-45x, FHD: 1,4-45x
Akkubetriebszeit	Bis zu 5 Stunden	Bis zu 4,5 Stunden
Akkuladezeit	Etwa 2,5 h	Etwa 2,5 h
Abmessungen		
Zusammengeklappt	33x45x9 cm	44x47x12 cm
Aufgeklappt	33x45x51 cm	44x47x56 cm
Gewicht	ab 4,4 kg	ab 5,1 kg
Stromversorgung	Akku/Netzstrom	Akku/Netzstrom

MagniLink Zip Premium

LVI Low Vision International ist als einer der weltweit führenden Hersteller von elektronisch vergrößernden Sehhilfen anerkannt mit der Mission, das tägliche Leben für Menschen mit Sehbehinderung angenehmer zu gestalten.

Wir sind zertifiziert nach ISO 14001 & 9001.



LVI Low Vision International GmbH

Hinterbrunnenstrasse 1
8312 Winterberg, SCHWEIZ
Tel: 052 202 96 16
E-mail: info@lvi.ch
WWW.LVI.CH



LVI Low Vision International
Verkstadsatan 5
352 46 Växjö, SWEDEN
Tel: +46 (0)470 72 77 00
Fax: +46 (0)470 72 77 25
E-mail: info@lvi.se
WWW.LVI.SE