


MagniLink Software

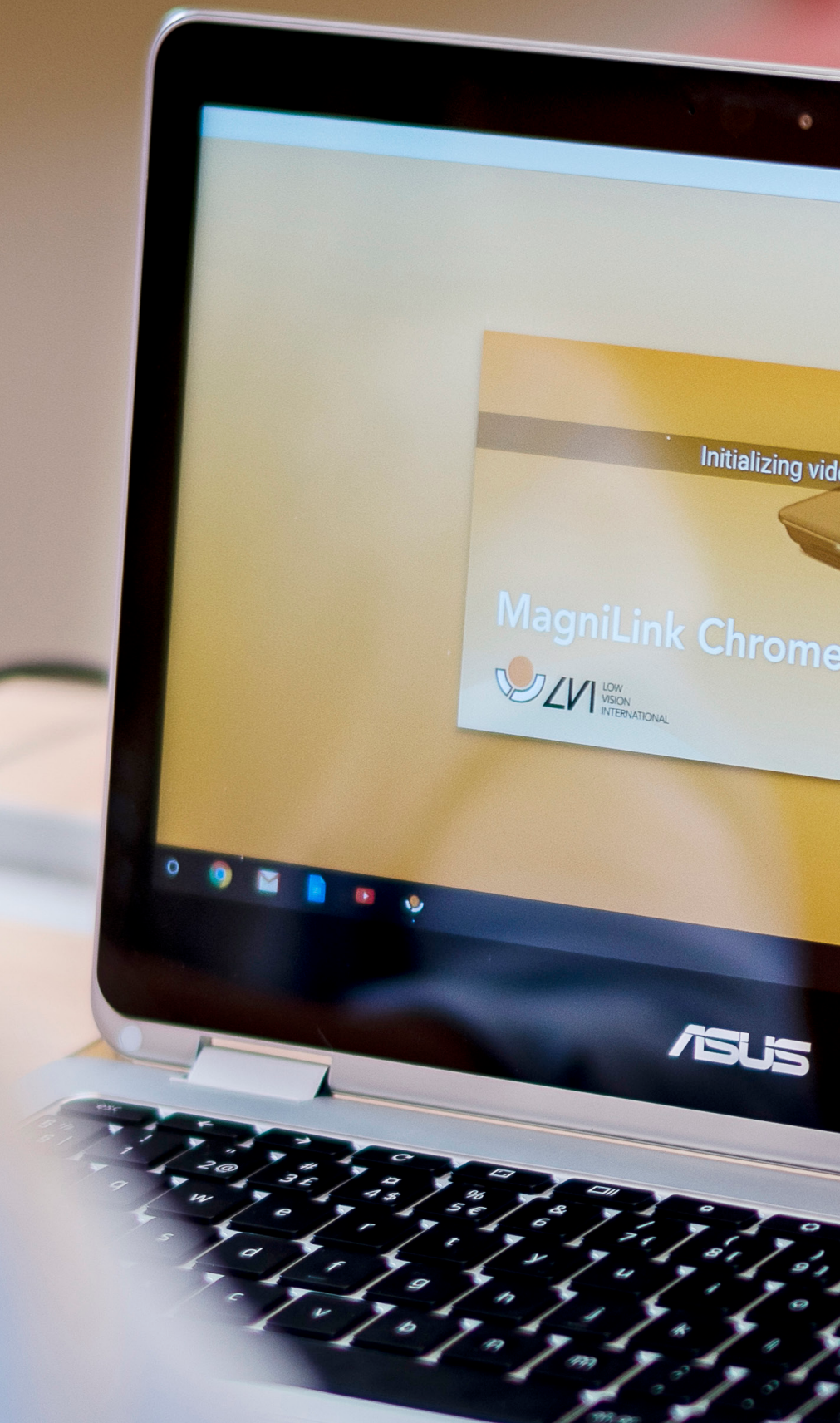

Tilpas efter eget behov!

Softwaren bruges til at vise billeder fra dit MagniLink-læsekamera, og den vælges baseret på din computer – PC, Mac eller Chromebook. Softwaren er banebrydende og styrer læsekameraets egenskaber, for eksempel forstørrelse, kunstige farver og lysstyrke, og giver brugeren mulighed for individuelle tilpasninger for at opnå den bedste oplevelse!

Funktionalitet

De tre softwareudgaver MagniLink PCViewer, MagniLink MacViewer og MagniLink ChromeViewer er ikke helt identiske, men har mange ens funktioner, som eksempelvis:

- Forskellige farve- og lysindstillinger.
- Forskellige forstørrelsesgrader.
- Låsbart autofokus.
- Tag og vis billeder.
- Optag og vis video.
- Spejl, roter og frys billeder.
- Hjælpelinjer til at lette læsning.
- Styring af funktionerne på forskellige måder. Enten via menuer, tastaturgenveje eller knapper på læsekameraets kontrolpanel.
- Konfiguration af egne tastaturgenveje.
- Kamerabilledet placeres øverst/foran alle åbne programmer.
- Vælg og skift mellem flere visninger.
- Understøttelse af motoriserede kameraer i Magni-Link AIR-familien.
- Understøttelse af flere videostreams og delt billede imellem dem, f.eks. Skift imellem flere MagniLink-kameraer.
- Notes-program med mulighed for at tegne, panorere og forstørre billedet (ikke MacViewer).

Valgfri TTS

Med den valgfrie TTS (Text To Speech) til PC, Mac og Chromebook er det muligt at OCR-behandle en tekst og få den læst op. Den OCR-behandlede tekst kan vises i flere forskellige billedvisningstilstande synkroniseret med tale. Det er muligt at OCR-behandle tekst fra et billede taget med det tilsluttede MagniLink-kamera, og det er muligt at forstørre og navigere i OCR-billedet. Til PC og Mac er det også muligt at trække andre dokumenter ind eller indsætte tekster direkte i programmet for at få dem OCR-behandlet og læst op.

MagniLink PCViewer Standalone

MagniLink PCViewer™ Standalone er et program, der kan bruges på en Windows-baseret pc uden at være forbundet til et MagniLink-læsekamera. Med programmet kan du OCR-behandle dokumenter og få dem læst højt med den indbyggede talesyntese. Du kan også få vist OCR-behandlet tekst med eller uden tale i forskellige visningstilstande, der er tilpasset svagsynede. Ved køb af læsekameraet MagniLink S Premium 2 og MagniLink Pro medfølger PCViewer og hvis man tilvælger TTS indgår også standalone-funktionen.

MagniLink PCViewer er kompatibel med andre forstørrelses- og skærmlæsningssoftware som ZoomText og SuperNova.



Anbefalede systemkrav

MagniLink PCViewer


- Microsoft Windows 7
- 1 integreret USB 3.0-port
- i5 eller i7 processor, 4 GB RAM, eksternt grafikkort med mindst 512 MB indbygget hukommelse

MagniLink MacViewer

- Mac Os 10,14 eller senere
- 1 integreret USB 3.0-port
- i5 eller i7 processor, 4 GB RAM, eksternt grafikkort med mindst 512 MB indbygget hukommelse

MagniLink ChromeViewer

- 1 integreret USB 3.0-port
- i5 processor
- 4 GB RAM

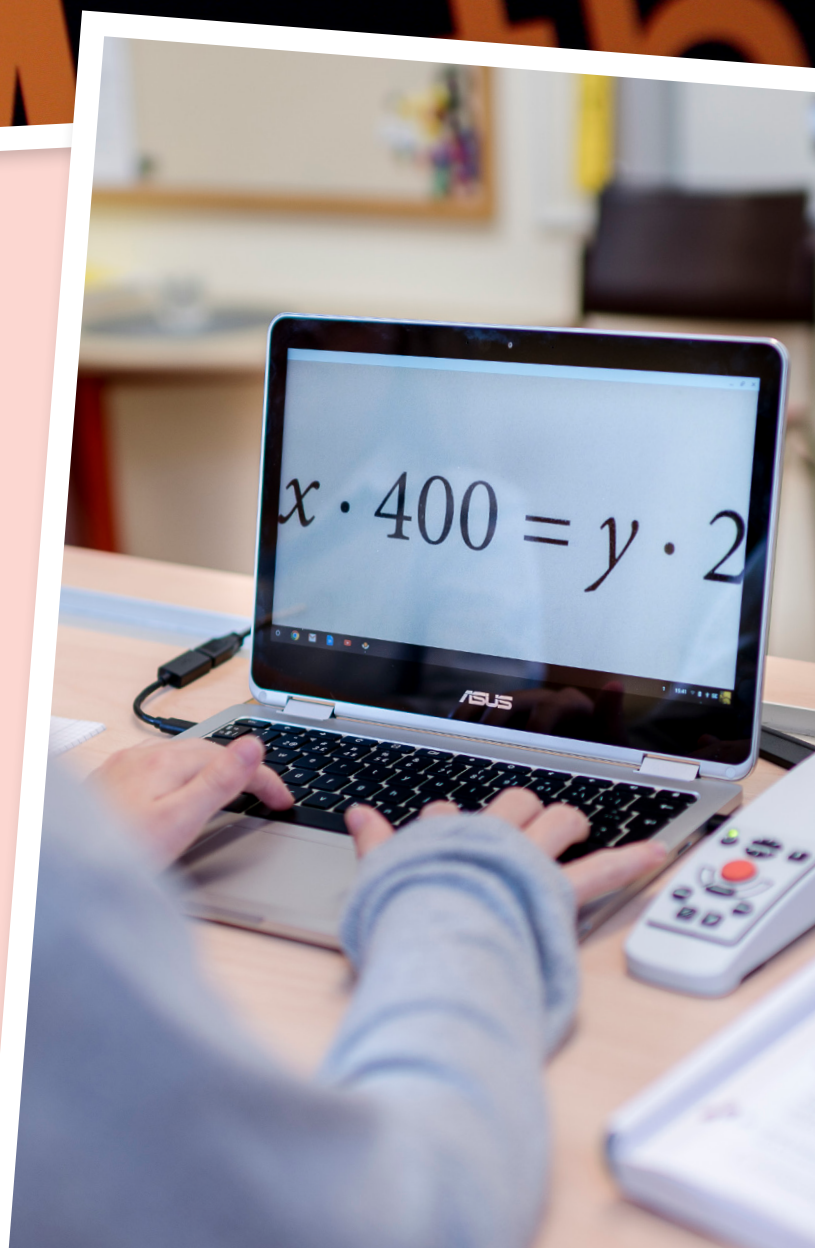

LVI Low Vision International er anerkendt som en af verdens førende producenter af hjælpemidler til personer med nedsat syn, og vores mission er at gøre hverdagen nemmere for sådanne personer.

Vi er certificeret i henhold til ISO 14001 og 9001.



LVI Danmark ApS

Hørkær 24, st. tv.

2730 Herlev, DANMARK

Tel: +46 (0)57 67 20 99

E-mail: info@lvi.dk

WWW.LVI.DK



LVI Low Vision International

Verkstadsgatan 5

352 46 Växjö, SWEDEN

Tel: +46 (0)470 72 77 00

Fax: +46 (0)470 72 77 25

E-mail: info@lvi.se

WWW.LVI.SE