


MagniLink Software

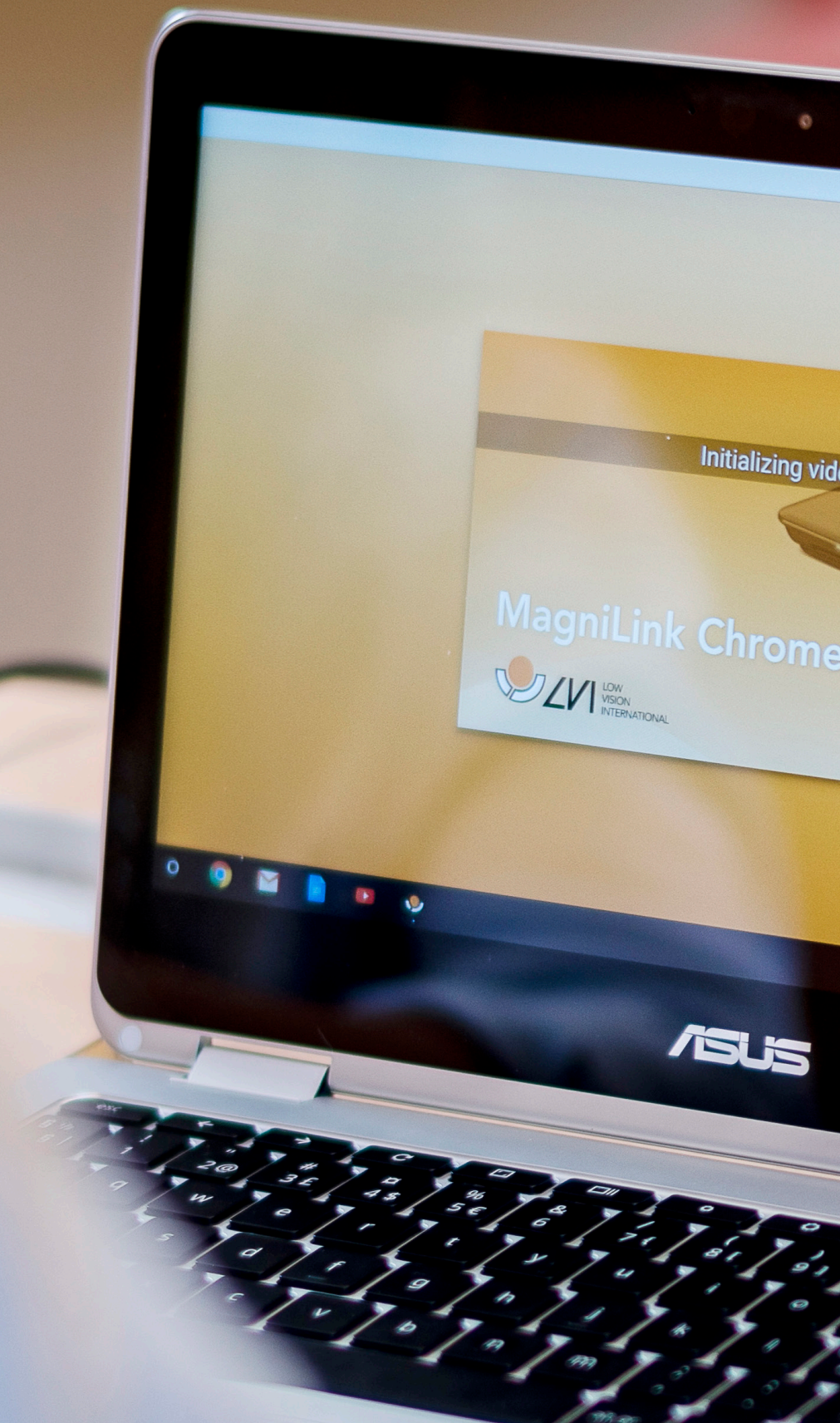

Für jeden Bedarf

Die Software dient zur Anzeige der Bilder Ihres MagniLink-Lesesystems. Die Auswahl erfolgt nach Ihrem Computer – PC, Mac oder Chromebook. Anhand der Software steuern Sie die Funktionen der Lesekamera, wie z. B. die Vergrößerungsstufe, künstliche Farben und Helligkeit. Die individualisierbare Oberfläche des MagniLink PCViewer ist für jeden Bedarf anpassbar und erhöht damit den Bedienkomfort und die Übersichtlichkeit.

Funktionalität

Die drei Software-Programme MagniLink PCViewer, MagniLink MacViewer und MagniLink ChromeViewer verfügen jeweils für das entsprechende Betriebssystem über Steuerungsmöglichkeiten wie zum Beispiel:

- Verschiedene Farb- und Helligkeitseinstellungen.
- Abschaltbarer Autofokus.
- Speichern und anzeigen von Bildern.
- Videos aufnehmen und wiedergeben.
- Bildanzeige spiegeln, drehen, einfrieren.
- Verschiedene Hilfslinien.
- Steuerung aller Funktionen über Schaltflächen oder Tastenkommandos.
- Anpassung von Tastenbefehlen.
- Das Kamerabild befindet sich bei allen geöffneten Anwendungen immer im Vordergrund.
- Die Software verfügt über eine integrierte Bildschirmteilung.
- Unterstützung für motorisierte Kameras der MagniLink AIR-Familie.
- Unterstützung für mehrere Videostreams und gemeinsam genutzte Bilder, z. B. die gleichzeitige Verwendung mehrerer MagniLink-Kameras.
- Notizwerkzeug mit der Möglichkeit, ein Bild zu bearbeiten, zu vergrößern und zu verschieben (nicht möglich mit MacViewer)

Text to Speech als Option

Mit dem Zubehör TTS (Text To Speech) für PC, Mac oder Chromebook ist es möglich, einen Text mit OCR zu erfassen und ihn vorlesen zu lassen. Der mit OCR erfasste Text kann in unterschiedlichen Wiedergabemodi mit Sprachsynchronisation wiedergegeben werden. Es ist möglich, Texte aus einem mit der angeschlossenen MagniLink-Kamera aufgenommenen Bild erkennen zu lassen (OCR). Ebenso ist es möglich, das OCR-Bild zu vergrößern und darin zu navigieren. Für PC und Mac ist es auch möglich, andere Dokumente per Drag & Drop zu verschieben oder Text direkt in das Programm einzufügen, um ihn mit OCR zu verarbeiten und sich vorlesen zu lassen.

MagniLink PCViewer Standalone

So können bereits gespeicherte Text- oder Bilddokumente per Texterkennung erfasst per integrierter Sprachsynthese vorgelesen werden. Bei Kauf eines Lesegerätes MagniLink S Premium 2 oder MagniLink Pro mit Vorlesefunktion (TTS) ist diese PCViewer-Standalone-Funktion bereits im Lieferumfang enthalten. So sind viele Funktionen auch ohne angeschlossenes MagniLink-Kamerasystem eigenständig nutzbar.

Kompatibilität

MagniLink PCViewer ist mit PC-Assistenzsoftware wie ZoomText und SuperNova kompatibel.



Empfohlene Systemanforderungen

MagniLink PCViewer


- Microsoft Windows 7 oder höher
- 1 integrierter USB 3.0-port
- i5 oder i7-Prozessor, 4GB Hauptspeicher, Grafikkarte mit mindestens 512MB Speicher

MagniLink MacViewer

- Mac Os 10,14 oder höher
- 1 integrierter USB 3.0-port
- i5 oder i7-Prozessor, 4GB Hauptspeicher, Grafikkarte mit mindestens 512MB Speicher

MagniLink ChromeViewer

- 1 integrierter USB 3.0-port
- i5-Prozessor
- 4 GB RAM

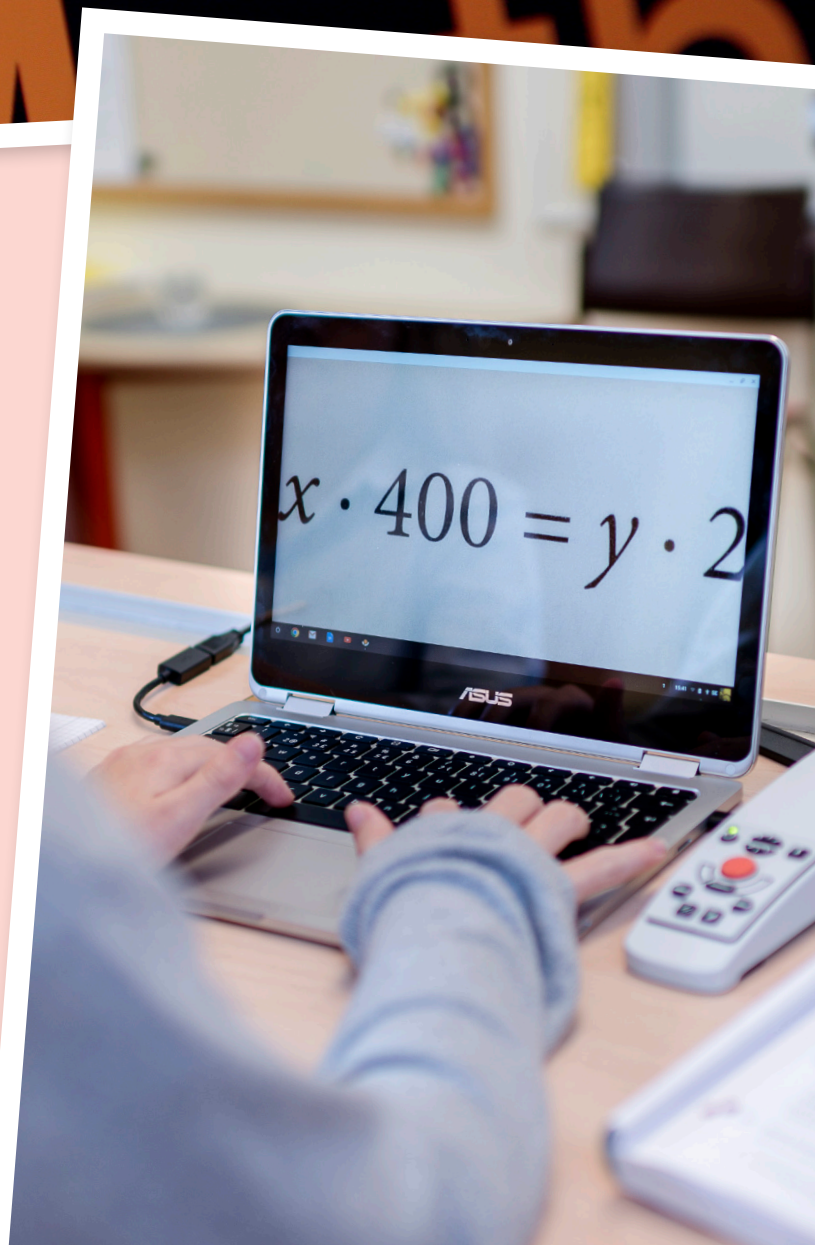

LVI Low Vision International ist als einer der weltweit führenden Hersteller von elektronisch vergrößernden Sehhilfen anerkannt mit der Mission, das tägliche Leben für Menschen mit Sehbehinderung angenehmer zu gestalten.

Wir sind zertifiziert nach ISO 14001 & 9001.



LVI Low Vision International GmbH

Hinterbrunnenstrasse 1
8312 Winterberg, SCHWEIZ
Tel: 052 202 96 16
E-mail: info@lvi.ch
WWW.LVI.CH



LVI Low Vision International
Verkstadsgatan 5
352 46 Växjö, SWEDEN
Tel: +46 (0)470 72 77 00
Fax: +46 (0)470 72 77 25
E-mail: info@lvi.se
WWW.LVI.SE