

MagniLink Zip Premium

Tragbar und vielseitig

Das tragbare MagniLink Zip zeichnet sich durch hervorragende Bildqualität und Einfachheit aus. MagniLink Zip ein echtes Bildschirmlesegerät – mit allen Vorteilen.

Klein und leicht

MagniLink Zip lässt sich leicht auf- bzw. zusammenklappen und praktisch wegräumen, wenn es nicht genutzt wird. Wenn Sie noch einen Akku hinzuwählen, wird aus dem Gerät ein handlicher Reisegefährte.

Einfach zu bedienen

Das integrierte Bedienfeld mit taktilen Tasten und Drehknopf ist sehr leicht zu bedienen. Neben der Standardfunktion gibt es einen Modus für Fortgeschrittene, die mehr Funktionen wünschen. Über das Bedienfelds schalten Sie einfach zwischen diesen beiden Modi um.

Wenn Sie Ihr Gerät aufklappen, können Sie den Bildschirm in der Höhe und dem Neigungswinkel einstellen, der für Sie am Besten passt. Ideal blicken Sie in einem 20-Grad-Winkel nach unten und schonen so Nacken und Schultern.


Ihr MagniLink Zip wird in einer praktischen Tasche geliefert, die den Transport

erleichtert. Die Tasche hat orangefarbene Details, damit Sie z. B. Reißverschlüsse und Fächer einfacher finden.

Eingebaute Distanzkamera

Die Lesekamera lässt sich leicht herausklappen – im Nu haben Sie eine Distanzkamera! Die Distanzkamera ist zum Beispiel ideal für die Schule, wenn der Schüler mitverfolgen und sehen muss, was vorne an der Tafel geschieht. Sie können die Distanzkamera horizontal und vertikal schwenken. Mit der Distanzkamera erhalten Sie auch Zugriff auf eine Spiegelfunktion, die hilfreich ist, wenn Sie beispielsweise Make-up auflegen oder sich den Bart trimmen möchten.

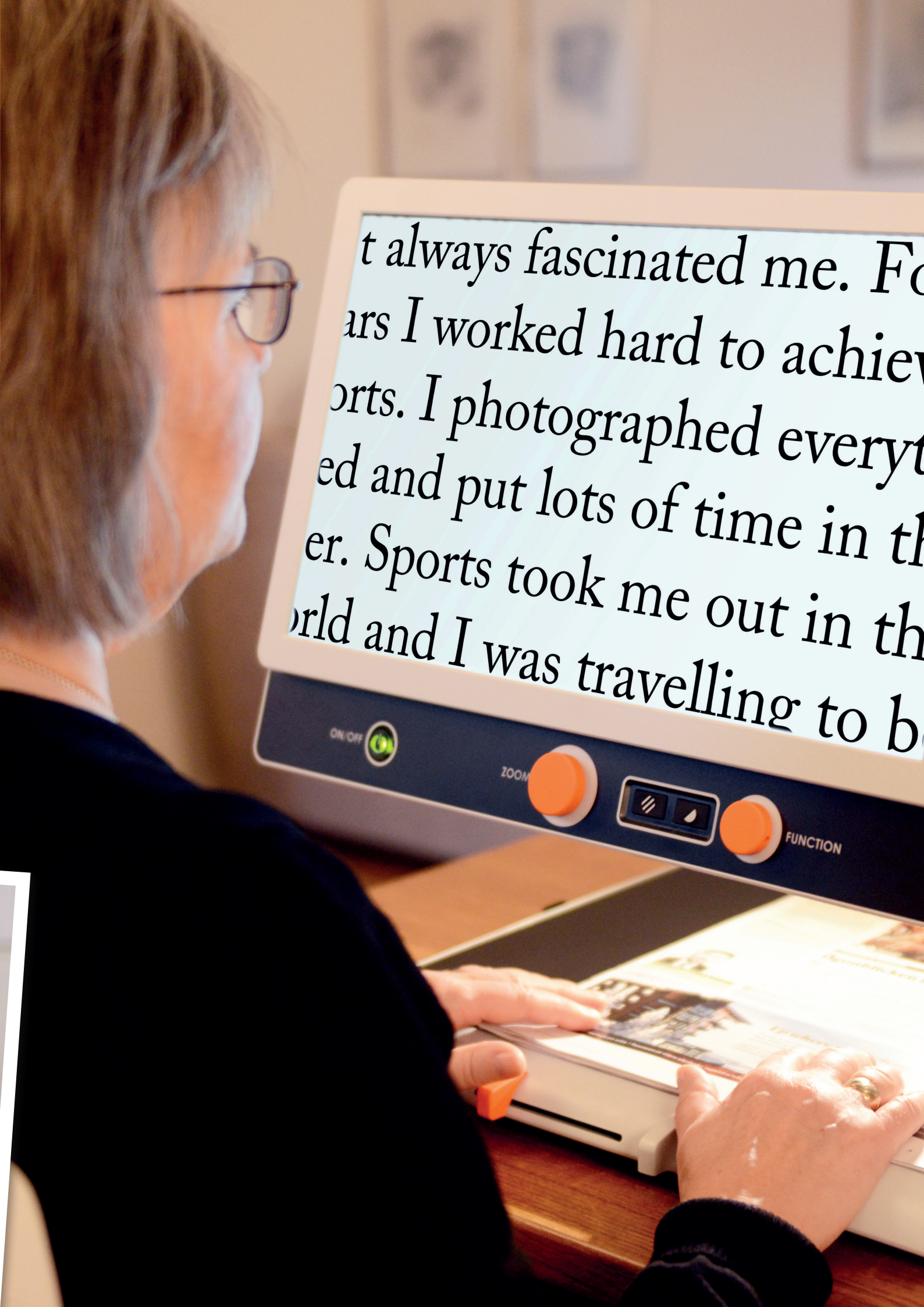


A woman with short grey hair and glasses is shown in profile, looking at a large electronic magnifying glass. The device has a white screen displaying a newspaper article in a large, black, serif font. Below the screen is a dark blue control panel with a green 'ON/OFF' button, an orange 'ZOOM' knob, a small control panel with two buttons, and another orange 'FUNCTION' knob. The woman's hands are visible at the bottom, holding the device. The background is a blurred indoor setting.

t always fascinated me. For
ars I worked hard to achieve
orts. I photographed everyt
ed and put lots of time in th
er. Sports took me out in th
orld and I was travelling to b

Eigenschaften und Vorteile

MagniLink Zip lässt sich auf die individuellen Anforderungen eines jeden Benutzers einstellen. Das Gerät ist eine große Hilfe, wenn Sie beispielsweise verschiedene Dokumente lesen, die Tafel im Klassenzimmer sehen, Kreuzworträtsel lösen, Handarbeiten oder sich Texte anhören möchten.

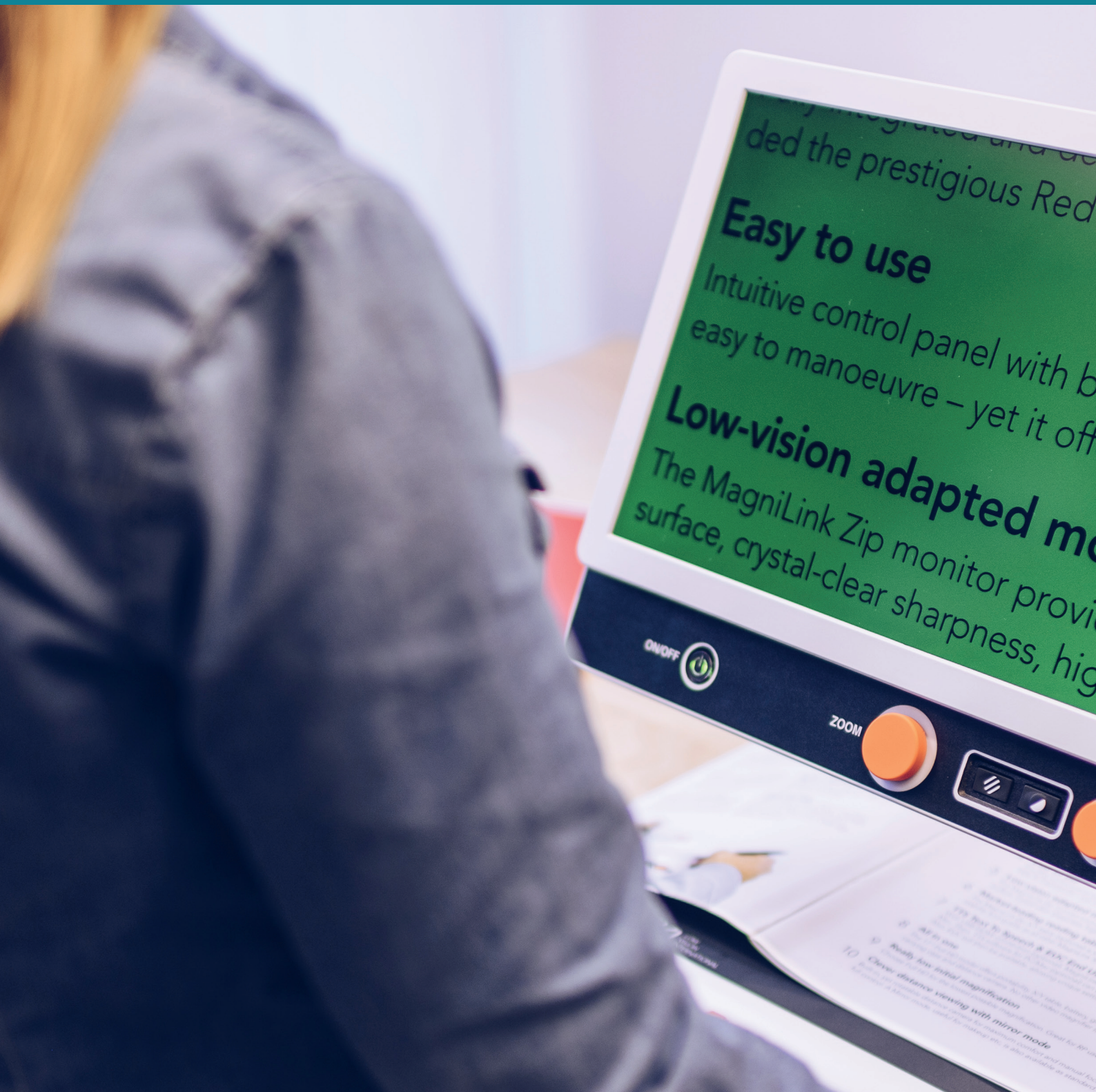



WÄHLEN SIE DIE
GRÖSSE DES BILDSCHIRMS

WÄHLEN SIE OB
MIT ODER OHNE
INTEGRIERTEN
LESETISCH



Ausgezeichnete Bildqualität

Die Full HD-Kamera bietet die höchste Bildqualität und ist auch die beste Wahl für RP-Nutzer, da sie unglaublich guten Kontrast und niedrige Eingangsvergrößerung kombiniert.

Es stehen zwei Bildschirmgrößen zur Auswahl. Der kleinere Bildschirm mit 13" eignet sich für diejenigen, die das Gerät häufig transportieren oder umstellen müssen. Wenn Sie hingegen ein System für einen eher festen Standort suchen, ist der 17"-Bildschirm mit integriertem Lesetisch eine selbstverständliche Entscheidung. Die Bildschirme haben eine entspiegelte Oberfläche und liefern ein scharfes Bild mit hohem Kontrast.

Bequemer Lesetisch

Der integrierte Lesetisch ist stabil und dennoch dünn und verfügt über Reibungsbremsen in beide Richtungen. Der Tisch vereinfacht das Verschieben von Dokumenten beim Lesen, insbesondere bei höherer Vergrößerung. Der integrierte Lesetisch ist ab Werk eingebaut und muss beim Kauf hinzugewählt werden. Ein nachträglicher Kauf ist nicht möglich.

Wenn Sie ein Gerät ohne integrierten Lesetisch wählen, können Sie den kleineren, separaten Lesetisch MLRT-XY hinzunehmen, der ebenfalls Reibungsbremsen hat. Dieser Tisch kann als Option nachträglich einfach hinzugefügt werden.

Computeranschluss

Das Extra USB/HDMI-Anschluss ermöglicht es, MagniLink Zip an einen Computer anzuschließen. Dann wird das Bild auf Ihrem Computerbildschirm anstatt auf dem integrierten Bildschirm angezeigt. Der Anschluss an den Computer hat unter anderem den Vorteil, dass Sie eine Text-zu-Sprache-Funktion TTS (Text To Speech) wählen und den Text so vorlesen lassen können. Das erhöht die Lesegeschwindigkeit und ermöglicht eine längere Lesedauer und ein entspannteres Arbeiten.

Wählen Sie einen Akku hinzu

Wenn Sie vorhaben, Ihr MagniLink Zip häufig mitzunehmen oder auf Reisen zu nutzen, kann es nützlich sein, einen Akku hinzuzuwählen. Auf diese Weise bleiben Sie auch bei der Nutzung mobil und flexibler – ideal für alle, die unterwegs sind!



MagniLink Zip 13"



MagniLink Zip 13"

Mögliche Varianten

Modell	Kamera	Lesetisch (integr.)	Akku	USB/HDMI	TTS
MLZ-FHD-13-B	1.080p Full HD	Nein	Ja	Nein	Nein
MLZ-FHD-13-BD	1.080p Full HD	Nein	Ja	Ja	Nein
MLZ-FHD-13-BE	1.080p Full HD	Nein	Ja	Ja	Ja

Modell	Kamera	Lesetisch (integr.)	Akku	USB/HDMI	TTS
MLZ-FHD-17-A	1.080p Full HD	Ja	Nein	Nein	Nein
MLZ-FHD-17-AB	1.080p Full HD	Ja	Ja	Nein	Nein
MLZ-FHD-17-ABD	1.080p Full HD	Ja	Ja	Ja	Nein
MLZ-FHD-17-ABE	1.080p Full HD	Ja	Ja	Ja	Ja
MLZ-FHD-17-B	1.080p Full HD	Nein	Ja	Nein	Nein
MLZ-FHD-17-BD	1.080p Full HD	Nein	Ja	Ja	Nein
MLZ-FHD-17-BE	1.080p Full HD	Nein	Ja	Ja	Ja

Zubehör: MLRT-XY Separater, andockbarer A4 Kreutztisch. Kombinierbar mit allen MLZ-Systemen OHNE integrierten A3-Kreutztisch.

Andere Kombinationen bieten wir bei Bedarf gern an. Sprechen Sie uns einfach an!



Technische Daten

Modell	MagniLink Zip 13"	MagniLink Zip 17"
Kamera	FHD: 1080p	FHD: 1080p
Kameraauflösung	1600x900	1920x1080
Vergrößerungsbereich	FHD: 1,1-35x	FHD: 1,4-45x
Akkubetriebszeit	Bis zu 5 Stunden	Bis zu 4,5 Stunden
Akkuladezeit	Etwa 2,5 h	Etwa 2,5 h
Abmessungen		
Zusammengeklappt	33x45x9 cm	44x47x12 cm
Aufgeklappt	33x45x51 cm	44x47x56 cm
Gewicht	ab 4,4 kg	ab 5,1 kg
Stromversorgung	Akku/Netzstrom	Akku/Netzstrom

MagniLink Zip Premium

LVI Low Vision International ist als einer der weltweit führenden Hersteller von elektronisch vergrößernden Sehhilfen anerkannt mit der Mission, das tägliche Leben für Menschen mit Sehbehinderung angenehmer zu gestalten.

Wir sind zertifiziert nach ISO 14001 & 9001.



MagniLink Zip Premium 2022-02-09

BUNDESWEIT vor Ort, Deutschland-Zentrale:

LVI Deutschland GmbH
Bahnhofsplatz 1
21423 Winsen (Luhe)
Tel: 04171-66 938 44
Fax: 04171-66 938 45
E-mail: info@lvideutschland.de
WWW.LVIDEUTSCHLAND.DE



LVI Low Vision International
Verkstadsgatan 5
352 46 Växjö, SWEDEN
Tel: +46 (0)470 72 77 00
Fax: +46 (0)470 72 77 25
E-mail: info@lvi.se
WWW.LVI.SE

Irrtum, technische Änderungen und Ergänzungen vorbehalten.